



Wundversorgung

Sortimentsübersicht
Schweiz 2021/2022


Mölnlycke®

Wichtige **Tipps und Tricks** für die Wundversorgung

- Nehmen Sie die Schmerzen des Patienten immer ernst
- Klären Sie die Ursache für die Wunde
- Jede Berührung der Wunde kann Schmerzen verursachen
- Schonendes Ablösen der Wundauflage, ggf. durch Anfeuchten der Wundauflage
- Unnötige Reize wie z.B. Zugluft oder Anstossen der Wunde vermeiden
- Dokumentieren Sie jeden Verbandwechsel und die Situation der Wunde
- Beachten Sie die Richtlinien zur Infektionskontrolle
- Verwenden Sie nur sterile Instrumente z.B. zum Zuschneiden der Materialien
- Materialien, die Wundkontakt haben, müssen steril sein; einmal angebrochene Materialien finden beim nächsten Verbandwechsel keine Verwendung mehr; siehe ☒ auf der Verpackung
- Reinigen Sie die Wunde stadiengerecht
- Wundspüllösungen vor Gebrauch ggf. anwärmen
- Entfernen Sie die Schutzfolie erst nach dem Zuschneiden
- Wählen Sie einen Verband, der beim Verbandwechsel keine Schmerzen oder eine Traumatisierung der Wunde verursacht oder die wundumgebende Haut verletzt
- Folienverbände bei der Entfernung parallel zur Haut überdehnen
- Wundfüller, z.B. Alginat, nicht stopfen
- Verband spannungsfrei applizieren und darauf achten, dass es keine Einschnürungen durch zu festes Anlegen von fixierenden Binden gibt
- Bedenken Sie die Fließrichtung des Exsudats beim Positionieren des Verbands
- Keine einschnürende Kleidung tragen, z.B. Socken mit engen Bündchen, Miederhosen, Korsetts, da diese die Durchblutung stören
- Wählen Sie die Grösse der Verbandes so, dass er 1-2cm über den Wundrand hinaus geht.

Bitte beachten Sie immer die Packungsbeilage des jeweiligen Produktes.

Legende:



kein bis geringes Exsudat



mittelstarkes Exsudat



starkes Exsudat



kein bis starkes Exsudat. Bei starkem Exsudat bitte Sekundärverband verwenden!



Fixierung notwendig



Zuschneidbar



sehr geringes Allergiepotezial



Duschfest



Viren- und Bakterienundurchlässig



Sekundärverband notwendig



Sekundärverband möglich



Tragedauer

Hinweis:

Dies sind allgemeine Ratschläge zur Wundversorgung und haben keinerlei Anrecht auf Vollständigkeit.

Bitte beachten Sie ggf. Ihre lokalen Behandlungsrichtlinien!

Bitte beachten Sie die jeweiligen Gebrauchsanweisungen der Verbände!

Inhalt

SCHAUMVERBÄNDE OHNE HAFTRAND

| | |
|------------------------|----|
| Mepilex XT | 8 |
| Mepilex / Heel | 9 |
| Mepilex Lite | 10 |
| Mepilex Transfer | 11 |

SCHAUMVERBÄNDE MIT HAFTRAND

| | |
|------------------------------|----|
| Mepilex Border Flex | 14 |
| Mepilex Border | 16 |
| Mepilex Border Lite | 17 |
| Mepilex Border Post-Op | 18 |

ANTIMIKROBIELLE WUNDAUFLAGEN

| | |
|---------------------------|----|
| Mepilex Ag | 23 |
| Mepilex Border Ag | 24 |
| Mepilex Transfer Ag | 25 |

WUNDDISTANZGITTER

| | |
|--------------------|----|
| Mepitel One | 28 |
| Mepitel | 30 |
| Mepitel Film | 31 |

HÄMOGLOBIN SPRAY & WUNDSPÜLLÖSUNG

| | |
|------------------|----|
| Granulox | 34 |
| Granudacyn | 35 |

ZUSCHNITTMUSTER & ANWENDUNGSBEISPIELE

| | |
|------------------------------|----|
| Verbandzuschnittposter | 37 |
| Safetac Übersicht | 40 |

FIXIERUNG & NARBENBEHANDLUNG

| | |
|----------------|----|
| Mepitac | 48 |
| Mepiform | 49 |

ALGINATE & GELBILDENDE FASERVERBÄNDE

| | |
|----------------------|----|
| Exufiber | 52 |
| Exufiber Ag+ | 53 |
| Melgisorb Plus | 54 |
| Melgisorb Ag | 55 |

ABSORBER & SUPERABSORBER

| | |
|-----------------------------|----|
| Mextra Superabsorbent | 58 |
| Mesorb | 59 |

DEKUBITUS BEHANDLUNG & PRÄVENTION

| | |
|-----------------------------|----|
| Mepilex Border Sacrum | 62 |
| Mepilex Border Heel | 63 |

SCHLAUCHBANDAGEN

| | |
|-------------------------|----|
| Tubifast | 66 |
| Tubifast Garments | 67 |

KONVENTIONELLE WUNDVERSORGUNG

| | |
|-----------------------|----|
| Mepore Film&Pad | 70 |
| Mepore Pro | 70 |
| Mepore | 71 |
| Mepore IV | 71 |
| Mepore Film | 72 |
| Mefix | 73 |
| Gauze | 74 |
| Mesoft | 75 |

NOTIZEN & QUELLENANGABEN

| | |
|----------------------|----|
| Notizen | 76 |
| Quellenangaben | 78 |



Proving it every day

Mölnlycke® liefert innovative Lösungen für das Wundmanagement, zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im OP und zur Vorbeugung von Dekubitus. Diese Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Alles, was wir tun, dient einem einzigen Zweck: Medizinische Fachkräfte in die Lage zu versetzen, ihr Bestes zu geben. Und wir sind bestrebt, dies täglich unter Beweis zu stellen.



Was wir tun

Unsere Lösungen ermöglichen eine bessere und effizientere Versorgung von Patienten an allen Standorten – vom Spital bis nach Hause:

1. Wundversorgung

Mit evidenzbasierten Wundversorgungslösungen (z.B. Verbände mit Safetac® Technologie)

2. Dekubitusprophylaxe

Wir reduzieren das Risiko von Dekubitus mit prophylaktischen Verbänden und Hilfsmitteln, die medizinischen Fachkräften die Umlagerung von Patienten erleichtern, sowie durch unterstützende Schulungs- und Beratungsservices.

3. Chirurgische Lösungen

Wir erhöhen die Sicherheit und Effizienz im und rund um den OP mit massgeschneiderten Trays, die auch chirurgische Instrumente beinhalten. Zudem schützen wir Personal und Patienten durch Abdecktücher, OP-Kleidung und OP-Handschuhe vor Infektionen und bieten entsprechende Fortbildungen und Fachberatung.



Die Gesundheitsversorgung verbessern

Weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, beschränken wir uns nicht darauf, Produkte zu verkaufen. Wir unterstützen medizinische Fachkräfte auch dabei, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Daran anknüpfend, nutzen wir unser umfassendes Fachwissen, um passende Lösungen zu entwickeln, die zu besseren Ergebnissen führen.




Innovation für die Zukunft

Angetrieben durch unser stetiges Streben nach Lösungen für unerfüllte Bedürfnisse in der Gesundheitsversorgung werden wir weiter Innovationen schaffen und hochwertige, angemessene Lösungen entwickeln, die neue Standards setzen. Wir werden auch weiterhin eng mit Branchenverbänden, Gesundheitsorganisationen und Regierungen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um an Gesundheitsvorschriften und Leitlinien mitzuwirken und die Therapiestandards zu erhöhen. Wir unterstützen alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen das beste Ergebnis zu erzielen.


Die Safetac® Technologie – der entscheidende Unterschied

Die sanfte Safetac® Technologie passt sich auch den kleinsten Strukturen der Haut an, während die Kleber anderer Verbände nur Kontakt mit den obersten Hautzellen haben. So werden Schmerzen beim Verbandwechsel minimiert, die Wundränder wirksam geschützt und Mazerationen vorgebeugt.

Herkömmlicher Kleber

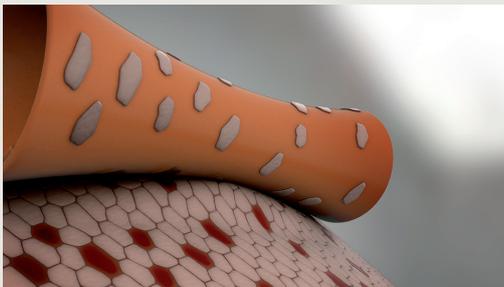

Abziehen der obersten Hautschicht bei herkömmlichem Klebstoff

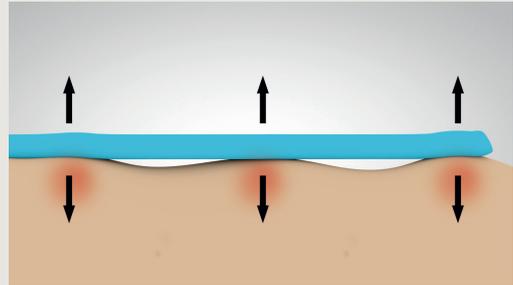


Herkömmliche Klebstoffe haften nur am oberen Rand der Hautporen und müssen deshalb eine stärkere Haftkraft aufweisen, damit der Verband sicher sitzt.

Verbände mit Safetac® Technologie



Kein Abziehen der obersten Hautschicht bei der Safetac® Technologie

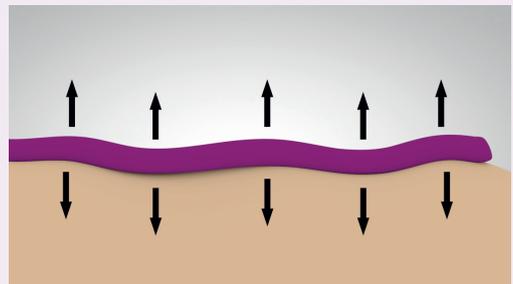

Safetac® passt sich an die Poren an und versiegelt so die Wundränder. Wundauflagen mit Safetac® haften sanft aber sicher.

Nachweislich die beste Wahl für ein optimales Ergebnis.

Die von Mölnlycke Health Care entwickelte Safetac®* Technologie bietet Vorteile, die weit über die üblichen Produktversprechen hinausgehen. Safetac® optimiert nachweislich den Wundheilungsprozess und kann Wunden sogar vorbeugen. Verbände mit Safetac® sind auf jeden Fall eine sichere Wahl für Patienten und Wegbereiter für einen neuen, hohen Standard im

Bereich der Wundversorgung. Uns liegen zahlreiche Belege dafür vor, die die klinischen und wirtschaftlichen Vorteile von Verbänden mit Safetac®, darunter Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® und Mepitac® untermauern. Bereits heute haben unsere Verbände das Leben von Millionen Patienten weltweit erleichtert¹⁻³.

*Eine Technologie, die ausschliesslich von Mölnlycke Health Care erhältlich ist.

Safetac®
TECHNOLOGY

Referenzen: 1. Davies, P., Rippon, M. Evidence review: the clinical benefits of Safetac technology in wound care. Journal of Wound Care 2008; Supplement:3-31. 2. Santamaria N, Gerdtz M, Liu W, Rakis S, Sage S, Ng AW, Tudor H, McCann J, Vassiliou T, Morrow F, Smith K, Knott J, Liew D. Clinical effectiveness of a silicone foam dressing for the prevention of heel pressure ulcers in critically ill patients: Border II Trial. Journal of Wound Care 2015; 24(8):340-345. 3. Santamaria N, Santamaria H. An estimate of the potential budget impact of using prophylactic dressings to prevent hospital-acquired PUs in Australia. Journal of Wound Care 2014; 23(11):583-589.



Schaumverbände

- Mepilex XT
- Mepilex / Mepilex Heel
- Mepilex Lite
- Mepilex Transfer

Mepilex® XT



Innovativer Schaumverband für alle Wundphasen

Mepilex XT ist ein hochgradig flexibler Polyurethanschaumstoff mit integrierten Exsudatkanälen für leicht bis mittelstark exsudierende Wunden.



Polyurethanschaum mit Exsudatkanälen

Safetac®
Beschichtung
Safetac
TECHNOLOGY

Polyurethanfolie

Vorteile

- Absorbiert niedrig- bis hochvisköses Exsudat in allen Wundheilungsphasen
- Reduzierung der Verbandwechsel
- Atraumatischer und schmerzloser Verbandwechsel
- Hält feuchtes Wundmilieu aufrecht
- Minimiert das Mazerationsrisiko

Anwendungsgebiete

- Leicht bis mittelstark exsudierende Wunden
- Akute und chronische Wunden
- Verbrennungen bis Grad 2a

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/Packung | Stück/Karton |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 21 10 15 | 5 x 5 cm | 35.05.03.01.1 | 5 | 40 |
| 21 11 00 | 10 x 10 cm | 35.05.03.03.1 | 5 | 70 |
| 21 12 00 | 10 x 20 cm | 35.05.03.04.1 | 5 | 45 |
| 21 13 00 | 15 x 15 cm | 35.05.03.04.1 | 5 | 25 |
| 21 14 00 | 20 x 20 cm | 35.05.03.06.1 | 5 | 20 |
| 21 15 00 | 20 x 50 cm | 35.05.03.08.1 | 2 | 12 |

Steril – einzeln verpackt



Ergänzungsprodukt zur Fixierung:

Tubifast®
WITH
2-WAY STRETCH®
TECHNOLOGY




Versorgung an schwierigen Körperstellen



Ulcus cruris arteriosum

Schaumverband

Mepilex ist ein weicher Polyurethanschaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht bis mittelstark exsudierender Wunden.

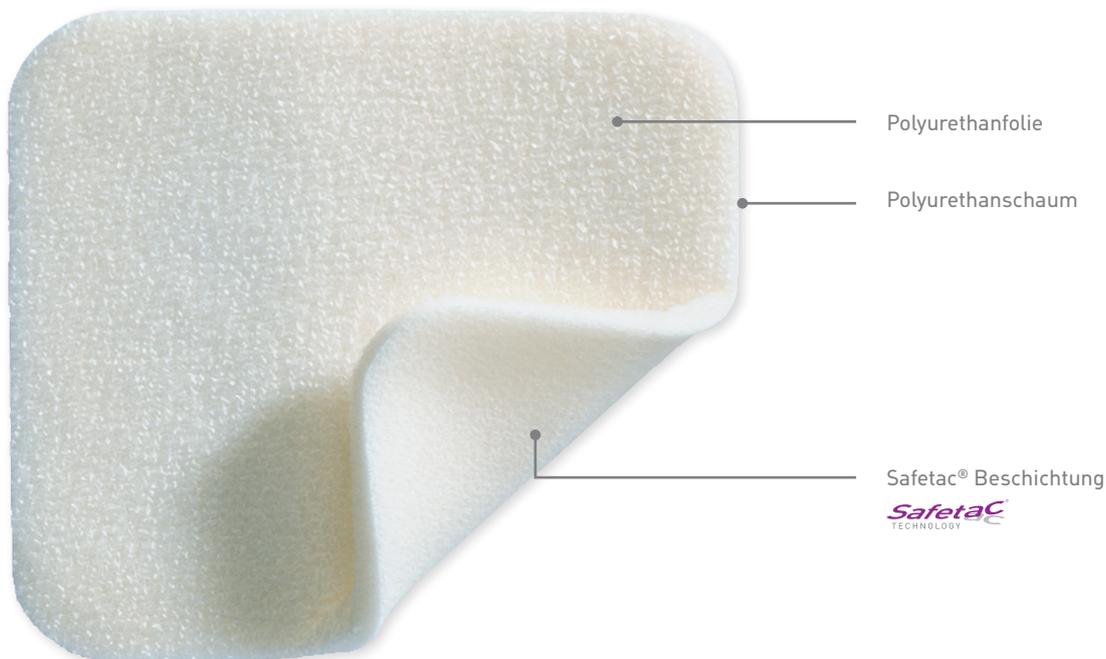

Vorteile

- Absorbiert Exsudat schnell und zuverlässig
- Extrem weich und anpassungsfähig
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Leicht bis mittelstark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom
- Verbrennungen bis Grad 2a

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/Packung | Stück/Karton |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 29 40 15 | 5 x 5 cm | 35.05.03.01.1 | 5 | 40 |
| 29 41 50 | 10 x 12 cm | 35.05.03.03.1 | 5 | 50 |
| 29 42 50 | 12 x 20 cm | 35.05.03.04.1 | 5 | 50 |
| 29 43 50 | 15 x 17 cm | 35.05.03.04.1 | 5 | 25 |
| 29 44 50 | 20 x 22 cm | 35.05.03.06.1 | 5 | 20 |

Mepilex Heel


| | | | | |
|----------|------------|---------------|---|----|
| 28 81 00 | 13 x 20 cm | 35.05.03.11.1 | 5 | 25 |
|----------|------------|---------------|---|----|

Steril – einzeln verpackt



Ergänzungsprodukt zur Fixierung:

Tubifast®
WITH
2-WAY STRETCH®
TECHNOLOGY

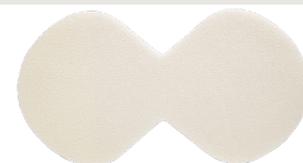

Mepilex Heel – speziell für die Ferse




Ulcus cruris mixtum

Mepilex[®] Lite



Dünnere Schaumverband

Mepilex Lite ist ein dünner Polyurethanschaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht exsudierender Wunden. Der Verband ist äusserst flexibel sowie anpassungsfähig und eignet sich auch zur Versorgung geschädigter und zum Schutz gefährdeter Haut.

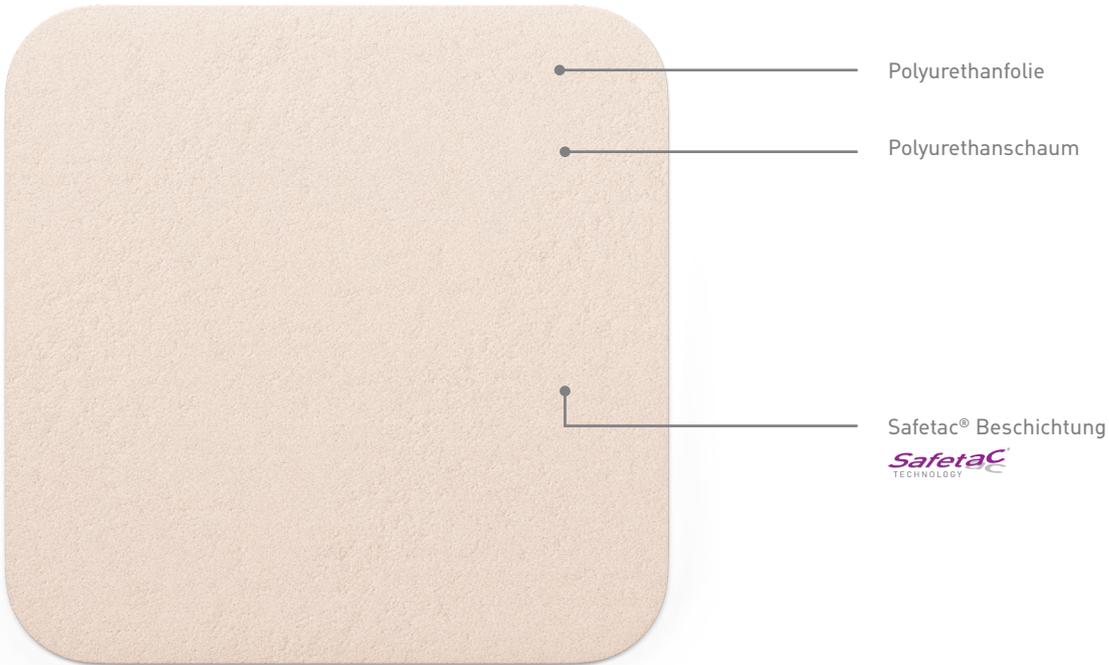

Vorteile

- Extrem weich und anpassungsfähig
- Tragen während der Strahlentherapie möglich
- Atraumatischer und schmerzloser Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Leicht exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z.B. diabetisches Fussyndrom
- Strahleninduzierte Hautschäden
- Hautschutz
- Schutz der Mamillen bei stillenden Müttern
- Epidermolysis Bullosa (EB)



Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/Packung | Stück/Karton |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 28 40 00 | 6 x 8,5 cm | 35.05.03.02.1 | 5 | 70 |
| 28 41 00 | 10 x 10 cm | 35.05.03.03.1 | 5 | 50 |
| 28 43 00 | 15 x 15 cm | 35.05.03.04.1 | 5 | 50 |
| 28 45 00 | 20 x 50 cm | 35.05.03.08.1 | 4 | 24 |

Steril – einzeln verpackt



Ergänzungsprodukt zur Fixierung:

Tubifast[®]
WITH
2-WAY STRETCH[®]
TECHNOLOGY



Diabetisches Fussyndrom




Mepilex Lite – zugeschnitten für die Zehen

Mepilex® Transfer



Drainagefähiger Schaumverband

Mepilex Transfer ist ein dünner, durchlässiger Polyurethanschaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht bis stark exsudierender Wunden. Der Verband leitet Exsudat zuverlässig in einen Sekundärverband weiter. Er dient insbesondere zum Abdecken grosser Haut- und Wunddefekte.

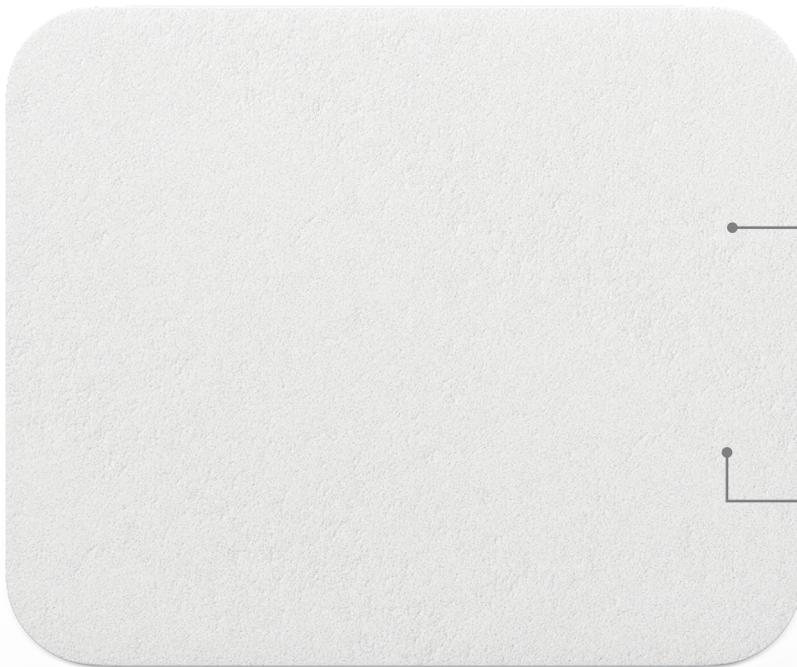

Durchlässiger, dünner Polyurethanschaum

Safetac® Beschichtung



Vorteile

- Hohe Wirtschaftlichkeit besonders bei stark exsudierenden Wunden
- Bei unterschiedlichen Exsudatmengen einsetzbar
- Äusserst flexibel und anpassungsfähig
- Atraumatischer und schmerzloser Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Leicht bis stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Gamaschenulcera
- Lymph- und Lipödeme
- Tumorwunden / exulzierende Tumore
- Strahleninduzierte Hautschäden
- Verbrennungen bis Grad 2a
- Epidermolysis Bullosa (EB)

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/Packung | Stück/Karton |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 29 47 00 | 10 x 12 cm | 35.05.03.03.1 | 5 | 50 |
| 29 48 00 | 15 x 20 cm | 35.05.03.05.1 | 5 | 40 |
| 29 45 02 | 20 x 50 cm | 35.05.03.08.1 | 4 | 24 |

Steril – einzeln verpackt



Ergänzungsprodukt zur Exsudataufnahme

Mextra® Superabsorbent



Ergänzungsprodukt zur Fixierung:

Tubifast®
WITH
2-WAY STRETCH®
TECHNOLOGY





Schaumverbände mit Haftrand


- Mepilex Border Flex
- Mepilex Border
- Mepilex Border Lite
- Mepilex Border Post-Op

Mepilex® Border Flex



Flexibler Schaumverband mit Hafrand für mehr Möglichkeiten und weniger Kosten.

Mepilex Border Flex haftet dank der Flex Technologie zuverlässiger als andere Verbände, auch bei stärkeren Bewegungen. Dies und die hohe Aufnahmekapazität – von normalen und zähflüssigem Exsudat, sorgen dafür, dass der Verband länger getragen werden kann. Gleichzeitig sorgt die besondere Konstruktion für eine effektive Reduzierung der Bakterienanzahl in der Wunde.

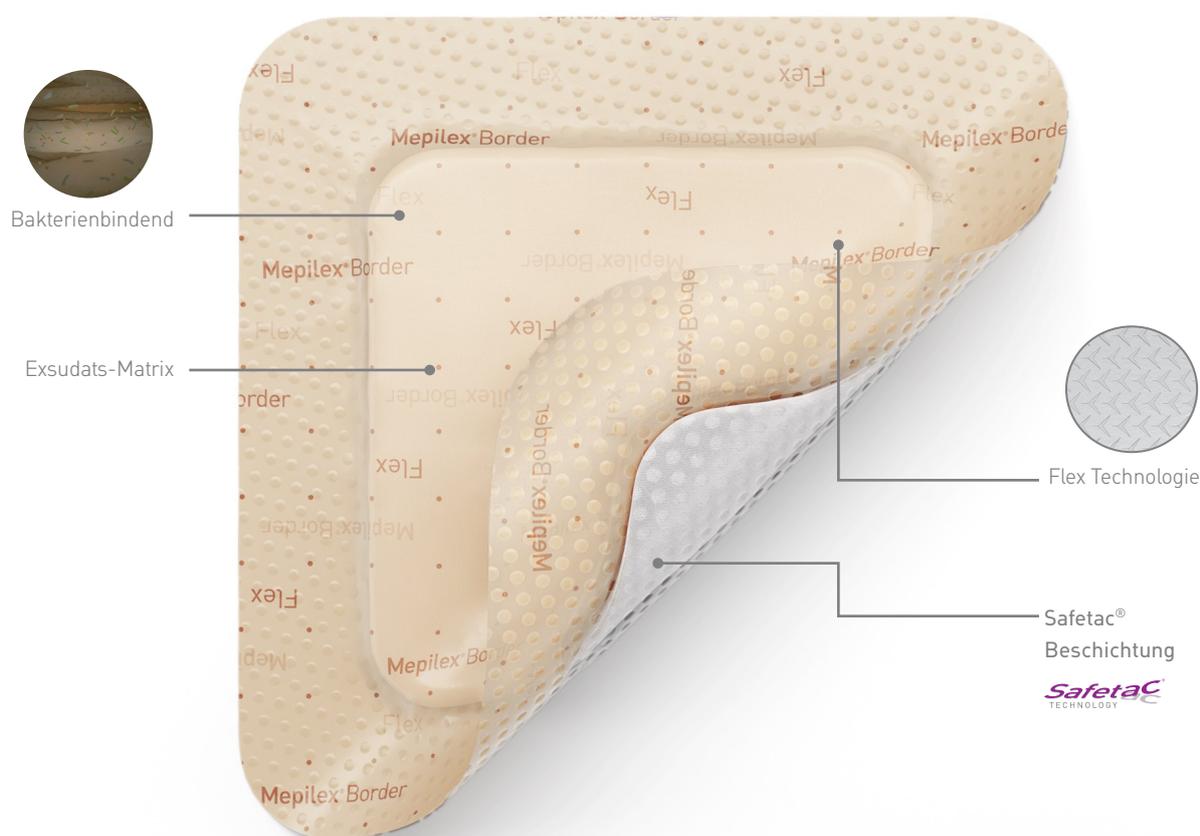


Vorteile

- Flexibilität sorgt für eine sichere und lange Haftung
- Schnelle und sichere Aufnahme aller Exsudatarten – auch visköses Exsudat
- Schnelle Aufnahme, Weiterleitung und sicherer Einschluss von Bakterien, für eine effektive Reduzierung der Bakterienlast in der Wunde. Ganz ohne Wirkstoffe.
- Optimale Anpassungsfähigkeit und verschiedene Formen für hohen Patientenkomfort

Anwendungsgebiete

- Mittelstark bis stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom
- Traumatische Wunden, z.B. Hautabliederungen (Skin Tears)
- Dekubitusprophylaxe

Beispiele für Anwendungsgebiete

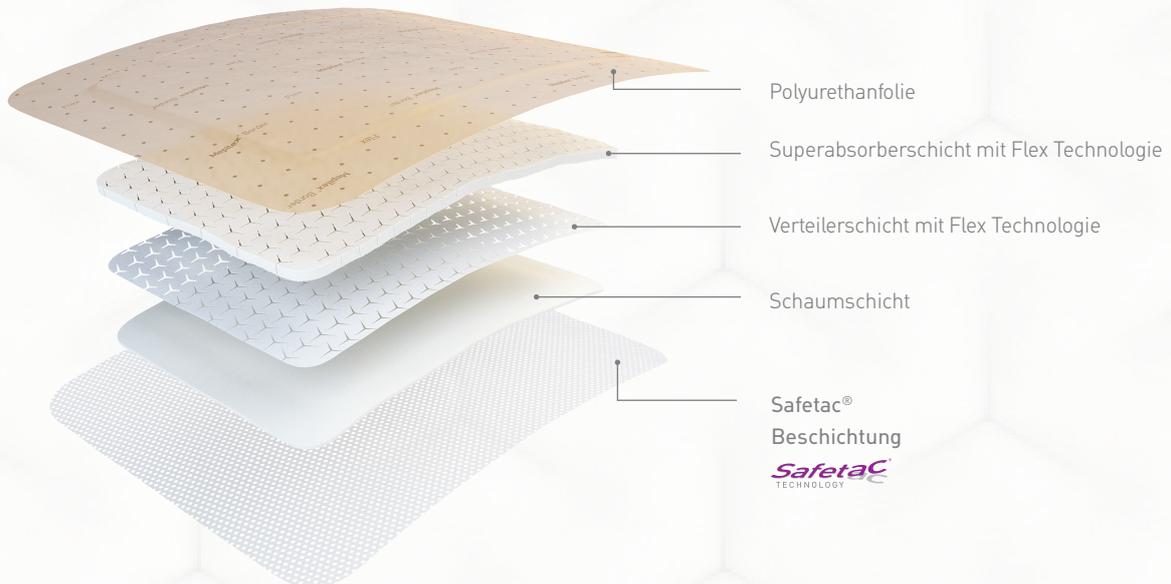

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | Grösse Wundkissen | MiGeL | Stück/Packung | Stück/Karton |
|----------|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 59 52 00 | 7,5 x 7,5 cm | 4,5 x 4,5 cm | 35.05.04.02.1 | 5 | 50 |
| 59 53 00 | 10 x 10 cm | 6,5 x 6,5 cm | 35.05.04.03.1 | 5 | 50 |
| 59 50 00 | 12,5 x 12,5 cm | 8,5 x 8,5 cm | 35.05.04.03.1 | 5 | 50 |
| 59 54 00 | 15 x 15 cm | 11 x 11 cm | 35.05.04.04.1 | 5 | 50 |
| 59 56 00 | 15 x 20 cm | 11 x 16 cm | 35.05.04.05.1 | 5 | 50 |
| 58 35 00 | 7,8 x 10 cm | 3,5 x 5,5 cm | 35.05.03.02.1 | 5 | 50 |
| 58 33 00 | 13 x 16 cm | 9 x 12 cm | 35.05.03.04.1 | 5 | 35 |
| 58 34 00 | 15 x 19 cm | 11,2 x 15,2 cm | 35.05.03.05.1 | 5 | 45 |


Steril – einzeln verpackt

Mepilex® Border



Selbsthaftender, hochabsorbierender Schaumverband

Mepilex Border ist ein selbsthaftender, hochabsorbierender Polyurethanschaumverband zur Versorgung mittel bis stark exsudierender Wunden. Der integrierte Superabsorber verhindert, auch unter Kompression, ein Auslaufen und eine Rücknässung des Verbandes. Der Hafttrand mit Safetac Technologie sorgt für die schonende und dennoch sichere Fixierung, ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel und schützt das wundumgebende Gewebe vor Schädigung und Mazeration.

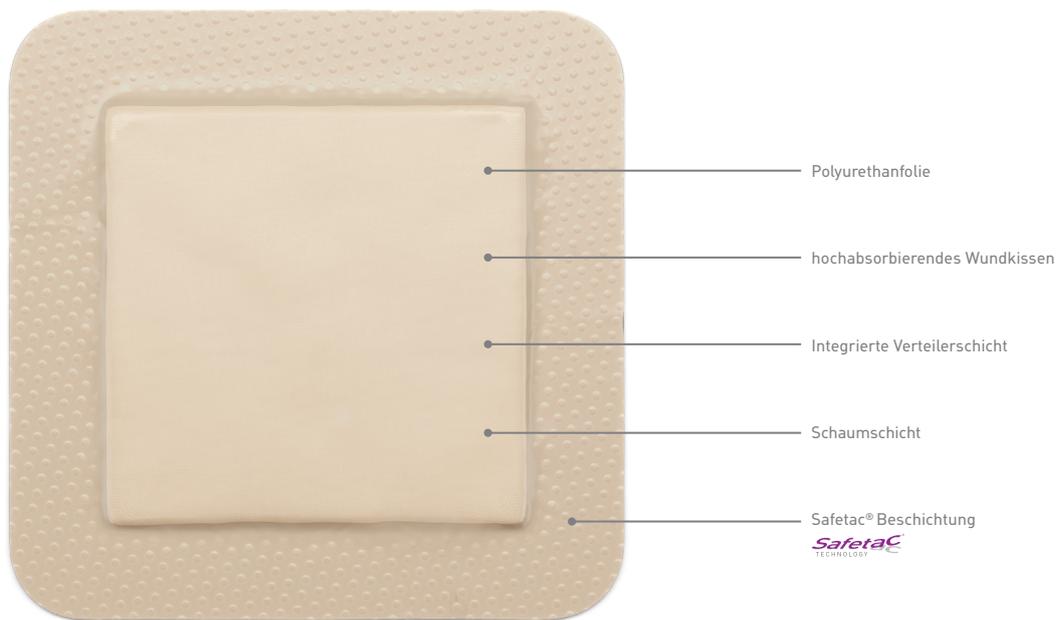

Vorteile

- Sehr hohes Absorptionsvermögen durch Superabsorber für längere Verbandwechselintervalle und Kosteneffizienz
- Hält Exsudat sicher im Verband – auch unter Kompression
- Atraumatischer und schmerzloser Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Mittelstark bis stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom
- Traumatische Wunden
- Dekubitusprophylaxe



Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | Grösse Wundkissen | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|--------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 29 52 00 | 7,5 x 7,5 cm | 4,5 x 4,5 cm | 35.05.03.02.1 | 5 | 70 |
| 29 53 00 | 10 x 10 cm | 6,5 x 6,5 cm | 35.05.03.03.1 | 5 | 50 |
| 29 54 00 | 15 x 15 cm | 11 x 11 cm | 35.05.03.04.1 | 5 | 50 |
| 29 56 00 | 15 x 20 cm | 11 x 16 cm | 35.05.03.05.1 | 5 | 45 |
| 29 58 00 | 10 x 20 cm | 6 x 16 cm | 35.05.03.04.1 | 5 | 35 |

Steril - einzeln verpackt




Als optimierte Variante bieten wir das Mepilex Border Flex an (Seite 14)

Mepilex[®] Border Lite



Dünnere, selbsthaftender Schaumverband

Mepilex Border Lite ist ein dünner, selbsthaftender Polyurethanschaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht exsudierender Wunden. Der Hafrand mit Safetac Technologie sorgt für die schonende und dennoch sichere Fixierung, ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel und schützt das wundumgebende Gewebe vor Schädigung und Mazeration.

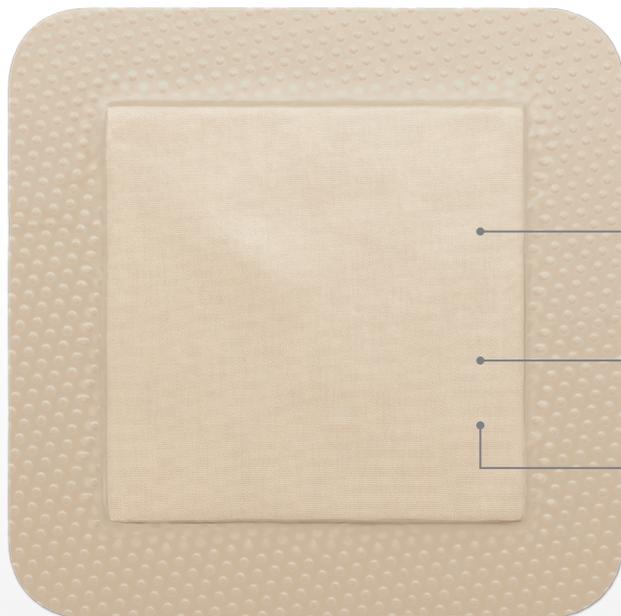

- Polyurethanfolie
- Absorbierendes Wundkissen
- Safetac[®] Beschichtung



Vorteile

- Flexibler Einsatz durch umfangreiches Grössensortiment
- Gute Haftung für eine sichere Anwendung
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Leicht exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. diabetisches Fussyndrom
- Traumatische Wunden, z.B. Schnitt- und Schürfwunden
- Epithelisierende Wunden

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | Grösse Wundkissen | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|--------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 28 10 00 | 4 x 5 cm | 2 x 3 cm | 35.05.03.01.1 | 10 | 70 |
| 28 11 00 | 5 x 12,5 cm | 2,5 x 8,5 cm | 35.05.03.02.1 | 5 | 65 |
| 28 12 00 | 7,5 x 7,5 cm | 4,5 x 4,5 cm | 35.05.03.02.1 | 5 | 70 |
| 28 13 00 | 10 x 10 cm | 6,5 x 6,5 cm | 35.05.03.03.1 | 5 | 50 |
| 28 15 00 | 15 x 15 cm | 11 x 11 cm | 35.05.03.04.1 | 5 | 50 |

Steril – einzeln verpackt



Schürfwunde

Epithelisierende Wunden


Mepilex Border Lite als Fingerverband



Mepilex® Border Post-Op

Selbsthaftender, flexibler Komplettverband für chirurgische Wunden

Mepilex Border Post-Op ist ein Komplettverband für chirurgische Wunden, der Exsudat sehr effektiv absorbiert und zurückhält. Der Verband minimiert die Bildung von Spannungsblasen und verhindert Schmerzen und Trauma beim Verbandwechsel.

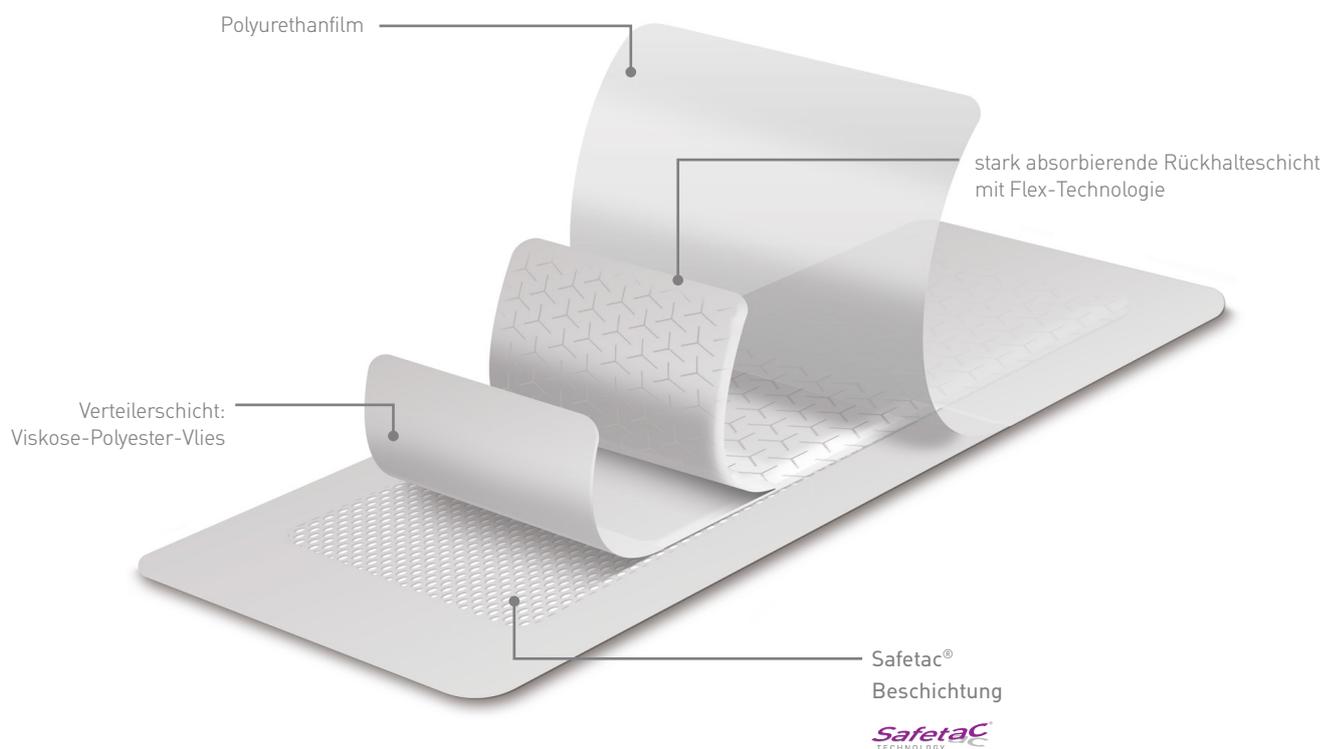

Vorteile

- Überlegenes Exsudatmanagement dank Superabsorber-Fasern für längere Tragezeiten und weniger Verbandwechsel
- Einzigartiges flexibles Flex-Cut Wundkissen, in alle Richtungen dehnbar
- Duschfeste und atmungsaktive Aussenfolie
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel
- Reduziert Spannungsblasen und Folgekosten deutlich

Anwendungsgebiete

- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Chirurgische Wunden, wie z.B. Hüft- und Knie-Operationen

Beispiele für Anwendungsgebiete



Mepilex® Border Post-Op am Knie



chirurgische Wunde

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | Grösse Wundkissen | Absorbtion | MIGeL | Stück/Packung | Stück/Karton |
|----------|------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 49 61 00 | 6 x 8 cm | 3 x 5 cm | Mittel-hoch | 35.05.03.02.1 | 10 | 80 |
| 49 62 00 | 9 x 10 cm | 4,5 x 6 cm | Mittel-hoch | 35.05.03.03.1 | 10 | 70 |
| 49 63 00 | 10 x 15 cm | 4,5 x 10 cm | Mittel-hoch | 35.05.03.03.1 | 10 | 100 |
| 49 64 00 | 10 x 20 cm | 4,5 x 14,5 cm | Hoch | 35.05.03.04.1 | 10 | 120 |
| 49 64 50 | 10 x 25 cm | 4,5 x 19,5 cm | Hoch | 35.05.03.04.1 | 10 | 60 |
| 49 66 00 | 10 x 30 cm | 4,5 x 24 cm | Hoch | 35.05.03.05.1 | 10 | 40 |
| 49 66 50 | 10 x 35 cm | 4,5 x 29 cm | Hoch | 35.05.03.05.1 | 5 | 50 |

Steril – einzeln verpackt

Zwei randomisierte Studien Eine prospektive Studie Eine Beobachtungsstudie Ein Konsensdokument

Vier unabhängige Studien kamen zu dem Ergebnis, dass Patienten, die mit Mepilex Border Post-Op behandelt wurden, **keine Anzeichen von Blasenbildung oder Hautschäden zeigten.**



Ergebnisse einer internationalen Tagung von Chirurgen
Acht angesehene Chirurgen aus verschiedenen Fakultäten diskutierten über Empfehlungen für die Versorgung von Operationswunden. Bestellen Sie das kostenlose Konsensdokument per E-Mail via info.ch@molnlycke.com oder bei Ihrem Mölnlycke Ansprechpartner.



Antimikrobielle Wundauflagen

- Mepilex Ag
- Mepilex Border Ag
- Mepilex Transfer Ag

(verordnungspflichtig)

Wundklassifikation nach Bakteriologie

Kontamination

Bakterielles Gleichgewicht, Kontrolle auf Wirtseite, Nachweis einzelner nicht proliferierender Keime

Kolonisation

Bakterielles Gleichgewicht, Kontrolle auf Wirtseite, Nachweis einer Keimvermehrung

Kritische Kolonisation

Bakterielles Ungleichgewicht, zunehmende Kontrolle durch Keime, steigende Keimbelastung ohne typische Entzündungszeichen

Infektion

Bakterielles Ungleichgewicht, Kontrolle auf Keimseite

Wundinfektion

Eine Lokalinfektion liegt vor, wenn Bakterien in tiefere Gewebeschichten eindringen

Klinische Zeichen einer kritischen Kolonisation

- Stagnation der Wundheilung
- seröses Wundexsudat
- kein oder minderwertiges Granulationsgewebe
- mögliche Verfärbung der Wunde im Vergleich zu vorhergehenden Untersuchungen



Der Nachweis von Keimen durch einen oberflächlichen Abstrich ist nicht automatisch mit einer Infektion gleichzusetzen.


Zur Therapie kritisch kolonisierter Wunden sollen topische Behandlungsformen angewendet werden, welche die bakterielle Belastung reduzieren, Exsudat aufnehmen, halten und die Qualität des Granulationsgewebes verbessern.
(Hess&Kirsner 2003)

Mikrobielles Kontinuum von Phil Bowler



Antimikrobieller Schaumverband mit Silber

Mepilex Ag ist ein antimikrobieller Polyurethanschaumverband mit Silbersulfat, zur Versorgung kritisch kolonisierter und infizierter, oberflächlicher Wunden. Sobald der Verband mit dem Exsudat in Berührung kommt, werden Silberionen freigesetzt, die wundspezifische Erreger innerhalb von 30 Minuten bis zu 7 Tage effektiv inaktivieren.

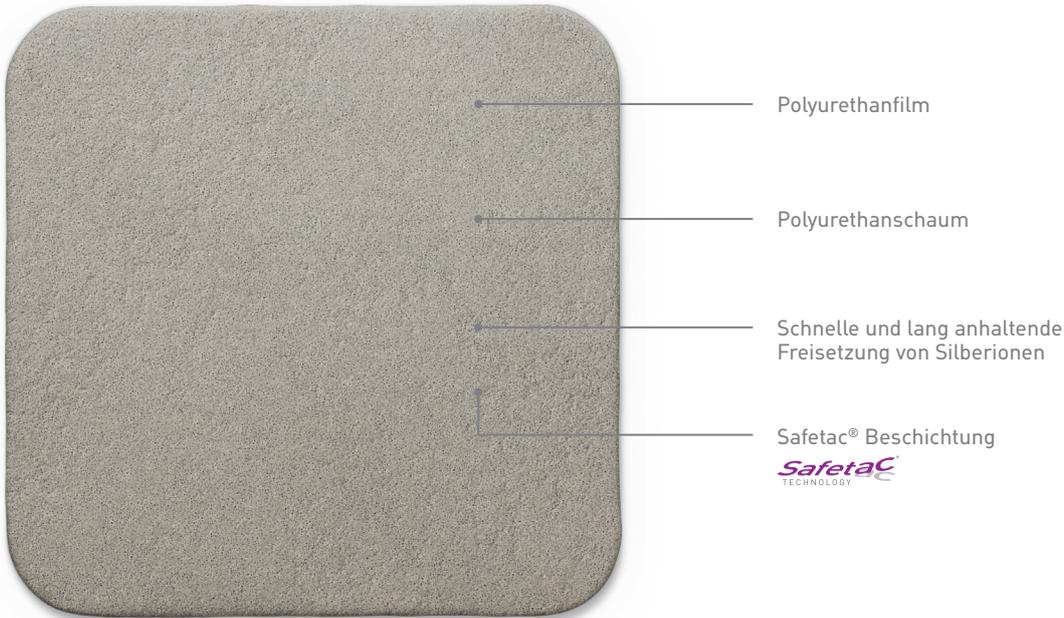

Vorteile

- Verträgliche Silberverbindungen (Silbersulfat)
- Schnelle (30 Min.) und lang anhaltende (bis 7 Tage) antimikrobielle Wirkung
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Mittelstark exsudierende Wunden
- Infizierte Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko, z.B. Tumorwunden
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom
- Akute Wunden, z.B. Verbrennungen bis Grad 2a

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | Stück/Packung | Stück/Karton |
|----------|------------|---------------|--------------|
| 28 70 21 | 6 x 8,5 cm | 5 | 55 |
| 28 71 10 | 10 x 10 cm | 5 | 70 |
| 28 72 10 | 10 x 20 cm | 5 | 45 |
| 28 73 10 | 15 x 15 cm | 5 | 25 |
| 28 74 10 | 20 x 20 cm | 5 | 20 |
| 28 75 10 | 20 x 50 cm | 2 | 12 |


Steril – einzeln verpackt

Mepilex® Border Ag



Selbstaftender, hochabsorbierender, antimikrobieller Schaumverband

Mepilex Border Ag ist ein selbstaftender, hochabsorbierender Komplettverband mit Silbersulfat zur Versorgung kritisch kolonisierter und infizierter oberflächlicher Wunden. Mepilex Border Ag inaktiviert wundspezifische Erreger innerhalb von 30 Minuten und bis zu 7 Tage. Durch die Reduzierung der Mikroorganismen reduziert Mepilex Border Ag automatisch den Geruch. Der integrierte Superabsorber verhindert auch unter Kompression ein Auslaufen und eine Rücknässung des Verbandes.

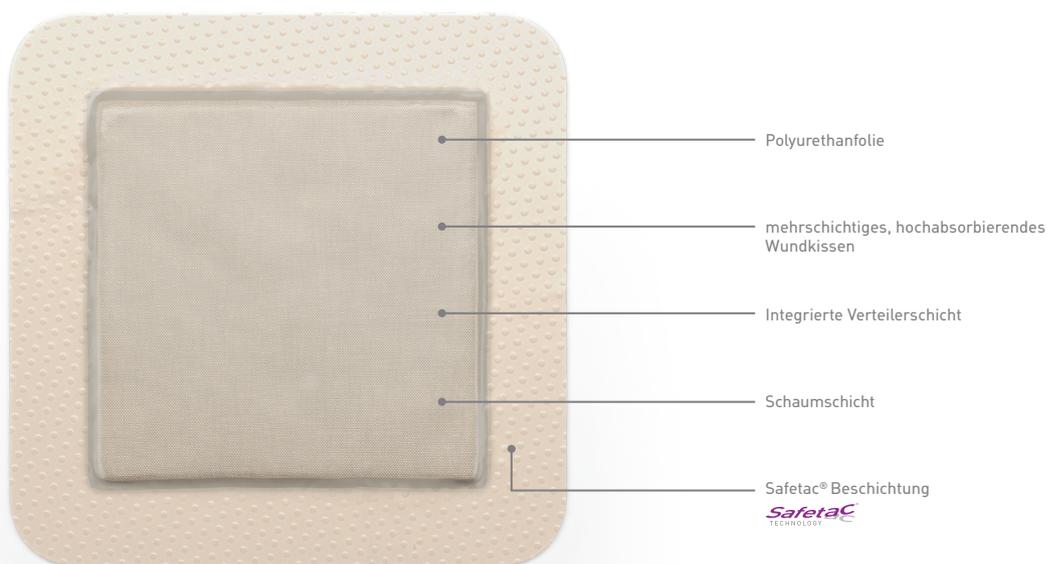

Vorteile

- Verträgliche Silberverbindungen (Silbersulfat)
- Schnelle (30 Min.) und lang anhaltende (bis 7 Tage) antimikrobielle Wirkung
- Sehr hohes Absorptionsvermögen durch integrierten Superabsorber für längere Verbandwechselintervalle und Kosteneffizienz
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Infizierte Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko
- Akute Wunden, z.B. Verbrennungen bis Grad 2a
- Chronische Wunden, z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | Grösse Wundkissen | Stück/Packung | Stück/Karton |
|----------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| 39 52 00 | 7,5 x 7,5 cm | 4,5 x 4,5 cm | 5 | 70 |
| 39 53 00 | 10 x 10 cm | 6,5 x 6,5 cm | 5 | 50 |
| 39 54 00 | 15 x 15 cm | 11 x 11 cm | 5 | 50 |

Mepilex Border Sacrum Ag

| | | | | |
|----------|------------|---------------------|---|----|
| 38 20 00 | 18 x 18 cm | 120 cm ² | 5 | 40 |
|----------|------------|---------------------|---|----|


Steril – einzeln verpackt



Mepilex® Border Sacrum Ag
Spezialform für den Sakralbereich

Drainagefähiger, antimikrobieller Schaumverband mit Silber

Versorgung von kritisch kolonisierten und infizierten Wunden, die leicht bis stark exsudieren. Sobald der Verband mit Exsudat in Kontakt kommt, werden Silberionen freigesetzt, die wundspezifische Erreger innerhalb von 30 Minuten für bis zu 7 Tage effektiv inaktivieren. Das Exsudat wird in den Sekundärverband weitergeleitet.

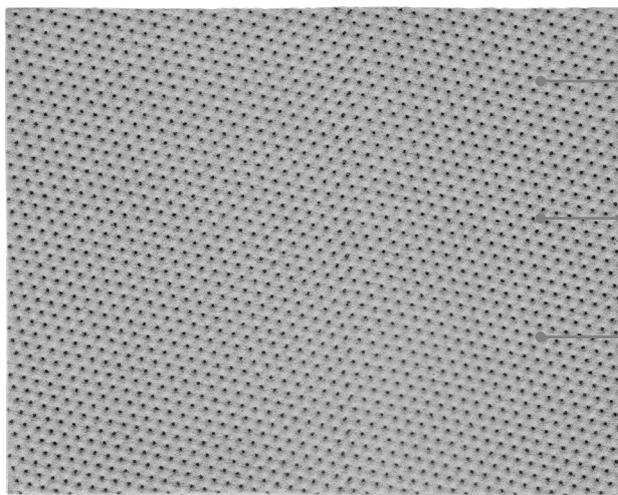

Durchlässiger Schaum zur Absorption und Transfer von Exsudat in einen Sekundärverband

Schnelle und langanhaltende Freisetzung von Silberionen

Safetac® Beschichtung



Vorteile

- Verträgliche Silberverbindungen (Silbersulfat)
- Schnelle (30 Min.) und lang anhaltende (bis 7 Tage) antimikrobielle Wirkung
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Leicht bis stark exsudierende Wunden
- Infizierte Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko
- Akute Wunden, z.B. Verbrennungen bis Grad 2a
- Chronische Wunden, z.B. diabetisches Fussyndrom, Ulcus cruris, Dekubitus
- Hautentnahmestellen
- Exulzierende Tumorwunden
- Epidermolysis Bullosa (EB)

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | Stück/Packung | Stück/Karton |
|----------|--------------|---------------|--------------|
| 39 40 00 | 7,5 x 8,5 cm | 10 | 70 |
| 39 41 00 | 10 x 12,5 cm | 5 | 50 |
| 39 48 00 | 15 x 20 cm | 10 | 50 |
| 39 45 00 | 20 x 50 cm | 2 | 12 |

Steril – einzeln verpackt



Ergänzungsprodukt zur Exsudataufnahme

Mextra® Superabsorbent



Ergänzungsprodukt zur Fixierung:

Tubifast®
WITH
2-WAY STRETCH®
TECHNOLOGY





Wunddistanzgitter & Folienverband


- Mepitel One und Mepitel One bei Hautrissen (Skin Tears)
- Mepitel
- Mepitel Film

Mepitel® One



Einseitig haftende Wundkontaktauflage

Die innovative Weiterentwicklung von Mepitel - das einseitig haftende Mepitel One gewährleistet eine sehr hohe Transparenz und eine besonders einfache Handhabung.

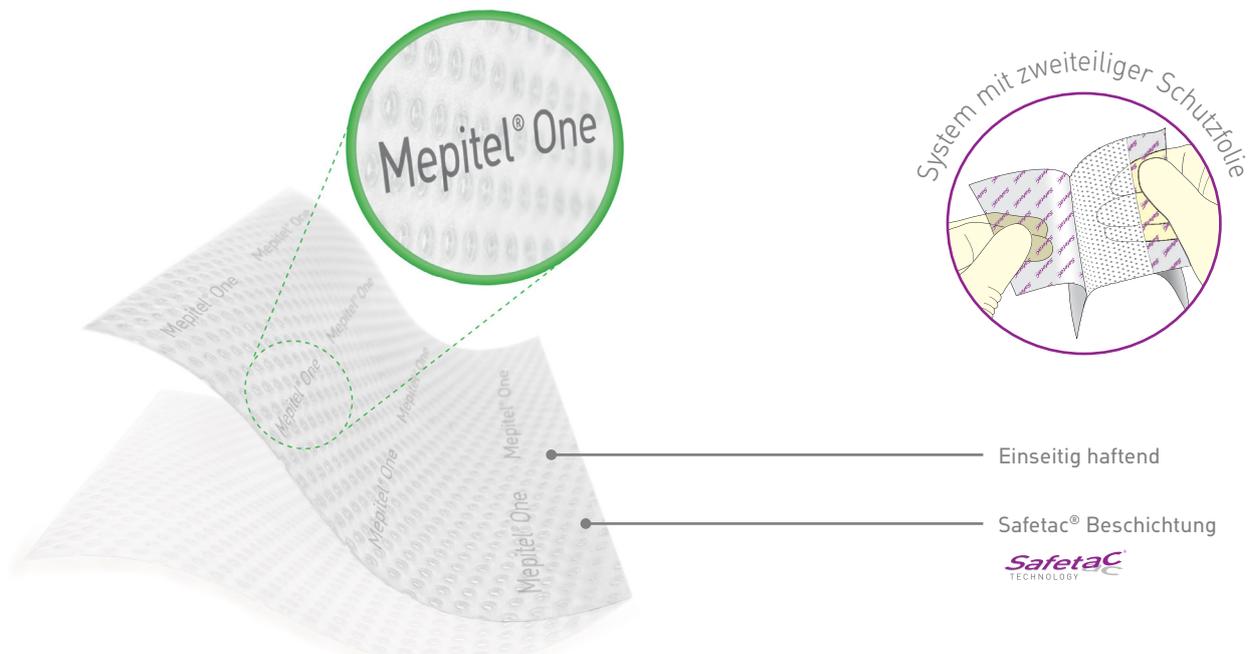

Bis zu **14 Tage** ungestörte Wundheilung und weniger Schmerzen beim Verbandwechsel

Vorteile

- Hohe Wirtschaftlichkeit dank Liegedauer von bis zu 14 Tagen
- Einfache Anwendung dank einseitiger Beschichtung
- Allein oder in Kombination mit einem Sekundärverband
- Dünn und transparent, sehr gute Wundbeurteilung möglich
- Sichere Weiterleitung aller Exsudatarten in einen Sekundärverband

Anwendungsgebiete

- Nicht bis stark exsudierende Wunden
- Oberflächliche Wunden, z.B. Hautabliederungen (Skin Tears)
- Tiefe Wunden zum Schutz empfindlicher Strukturen (Knochen, Sehnen, Gefässe)
- Hautrisse, Schürfwunden, RQW
- Postoperative Wunden
- Akute und chronische Wunden



Mepitel One auf Verbrennungen



Sehr guter Exsudattransfer möglich dank offener Netzstruktur



Wundbegutachtung ohne Verbandwechsel möglich

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|------------|---------------|-------------------|------------------|
| 28 90 00 | 5 x 7 cm | 35.05.08.01.1 | 5 | 70 |
| 28 92 00 | 8 x 10 cm | 35.05.08.02.1 | 5 | 50 |
| 28 94 00 | 12 x 15 cm | 35.05.08.03.1 | 5 | 50 |
| 28 97 00 | 17 x 25 cm | 35.05.08.05.1 | 5 | 40 |

Steril – einzeln verpackt

Die Anwendung von Mepitel® One bei Hautrissen (Skin Tears)



1. Blutung kontrollieren und bei Bedarf debridieren.



2. Richten Sie den Hautlappen so gut wie möglich wieder aus.



3. Nach der Neuausrichtung des Hautlappens Mepitel One auftragen (auf allen Seiten einen Abstand von 2-3 cm einhalten).



4. Tragen Sie das sekundäre Absorbtionskissen auf, z.B. Mesoft, Mesorb oder Mextra.



5. Tragen Sie Mepitel Film auf, um das Saugkissen zu befestigen und eine Barriere gegen Verunreinigungen und Flüssigkeiten zu bilden.

Bestellinformationen Skin Tears

| | Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|------------|----------|------------|---------------|-------------------|------------------|
| Skin Tears | 28 91 70 | 6 x 7 cm | 35.05.08.01.1 | 5 | 70 |
| | 28 92 70 | 9 x 10 cm | 35.05.08.02.1 | 5 | 50 |
| | 28 94 70 | 13 x 15 cm | 35.05.08.03.1 | 5 | 50 |

Steril – einzeln verpackt



Typ 1

Kein Hautverlust

Mepitel® One



Typ 2

Partieller Hautverlust

Mepitel® One

Mepilex® Border Flex



Typ 3

Totaler Hautverlust


Mepilex® Border Flex





Beidseitig haftende Wundkontaktauflage

Mepitel mit Safetac Technologie ist das weltweit erste moderne Wunddistanzgitter seiner Art. Dank Safetac steht Mepitel für ungestörte Wundruhe und kosteneffiziente Versorgung.

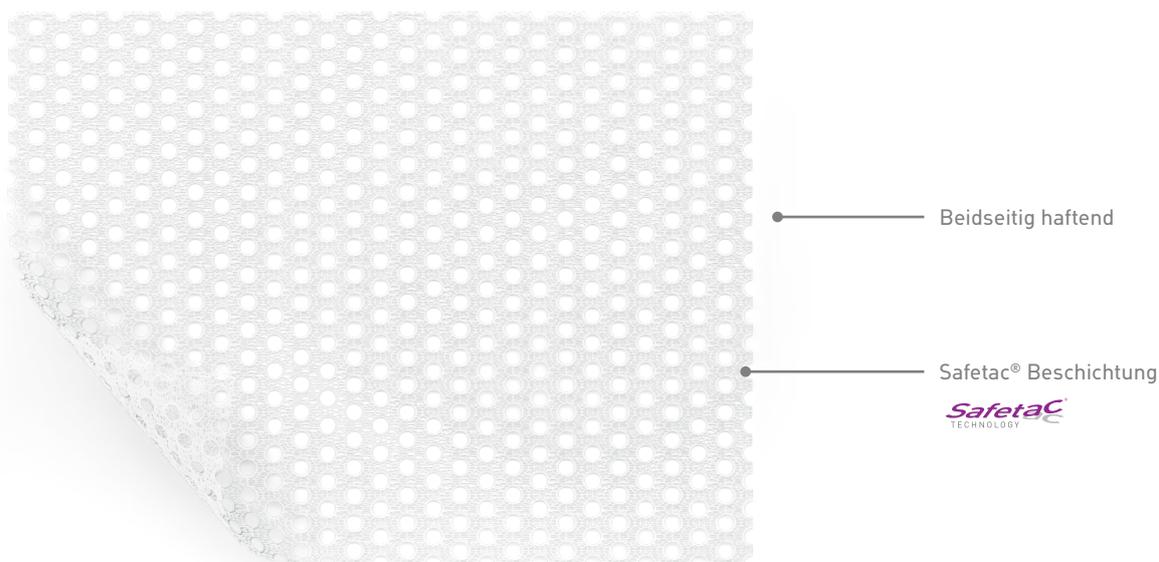

Bis zu **14 Tage** ungestörte Wundheilung und weniger Schmerzen beim Verbandwechsel

Vorteile

- Hohe Wirtschaftlichkeit dank Liegedauer von bis zu 14 Tagen
- Sichere Weiterleitung aller Exsudatarten in einen Sekundärverband
- Kein Verrutschen von Primär- oder Sekundärverbänden
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Nicht bis stark exsudierende Wunden
- Oberflächliche Wunden, z.B. Hautabderungen (Skin Tears)
- Tiefe Wunden zum Schutz empfindlicher Strukturen (Knochen, Sehnen, Gefässe)
- Hautrisse, Schürfwunden, RQW
- Postoperative Wunden
- Akute und chronische Wunden

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Pharmacode | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|------------|---------------|------------|-------------------|------------------|
| 29 05 00 | 5 x 7 cm | 35.05.08.01.1 | 6855837 | 5 | 25 |
| 29 07 00 | 8 x 10 cm | 35.05.08.02.1 | 6863280 | 5 | 50 |
| 29 10 00 | 12 x 15 cm | 35.05.08.03.1 | 3628294 | 5 | 60 |
| 29 20 30 | 20 x 32 cm | 35.05.08.05.1 | 3628302 | 5 | 30 |

Steril – einzeln verpackt

**Klinische
Evidenz –
für mehr
Sicherheit!**



Mepitel® Film



Hautschützender Folienverband

Mepitel Film ist ein sanfter, transparenter, atmungsaktiver Folienverband mit Safetac Technologie. Er kann als sanfter Hautschutz im Bereich von gefährdeten Körperstellen oder für die Versorgung oberflächlicher Wunden angewendet werden.



Vorteile

- Sichere und einfache Anwendung dank des Applikationsrahmens
- Rückstandsloses Entfernen
- Hautähnliches Gefühl
- Atraumatischer und schmerzloser Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Nicht exsudierende Wunden
- Hautschutz bei empfindlicher Haut, z.B. Pergament-Haut
- Im Bereich von reibungs-, scherkraft- und mazerationsgefährdeten Körperstellen
- „Lande-Zone“ für Fixierung von medizinischen Produkten
- Prävention von strahleninduzierten Hautschäden
- Zur Fixation von Primärverbänden

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/Packung | Stück/Karton |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 29 61 70 | 6 × 7 cm | 35.05.10.20.1 | 10 | 50 |
| 29 62 70 | 10 × 12 cm | 35.05.10.22.1 | 10 | 70 |
| 29 64 70 | 10 × 25 cm | 35.05.10.23.1 | 10 | 50 |
| 29 66 70 | 15 × 20 cm | 35.05.10.24.1 | 10 | 70 |

Steril – einzeln verpackt

Beispiele für Anwendungsgebiete



„Lande-Zone“ zum Schutz von gesunder Haut unter Zu- und Ableitungen



Pergament-Haut



Mepitel Film zur Fixierung von Primärverbänden



Hämoglobin Spray & Wundspüllösung

- Granulox
- Granudacyn Wundspüllösung
- Granudacyn Wundgel

Granulox®

Topisches Hämoglobin Spray

Granulox ist ein topisches Hämoglobin Spray für die Behandlung chronischer Wunden. Der aktive Wirkstoff Hämoglobin versorgt das Wundbett durch den Prozess der erleichterten Diffusion mit Sauerstoff aus der Umgebungsluft.



Vorteile

- Heilungsdauer bei diabetischem Fussyndrom kürzer als beim Behandlungsstandard^{1*}
- Doppelt so viele Wunden nach 8–16 Wochen geheilt im Vergleich zum Behandlungsstandard^{1,2,3}
- Durchschnittliche Schmerz-Scores nach vier Wochen geringer im Vergleich zum Behandlungsstandard für chronische Wunden³
- Weniger Schorf bei chronischen Wunden nach vier Wochen im Vergleich zum Behandlungsstandard⁴
- Behandlungskosten bei diabetischem Fussyndrom geringer als beim Behandlungsstandard⁵

* Quellenangaben siehe Seite 78

Anwendungsgebiete

- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris arteriosum, Ulcus cruris venosum, gemischter Ulcus cruris mixtum, diabetisches Fussyndrom, Dekubitus und sekundär heilende Operationswunden^{6,7}
- Kann auch auf exsudierende und infizierte Wunden aufgetragen werden
- Sollte bei jedem Verbandwechsel aufgetragen werden, mindestens alle 3 Tage

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|--------|-------------------|------------------|
| 36 00 01 | 12 ml | 1 | 6 |

Steril – einzeln verpackt

Arteriellcs Ulcus cruris⁶



Behandlungsende nach 169 Tagen und 50 Verbandwechseln (Granulox® bei jedem Verbandwechsel angewendet)

Granudacyn®

Spüllösung und Gel zur Wundreinigung

Granudacyn ist eine Wundspüllösung zur Reinigung, Befeuchtung und Spülung von akuten, chronischen und kontaminierten Wunden sowie bei Verbrennungen ersten und zweiten Grades.



Um eine sichere Anwendung nach dem Öffnen zu gewährleisten, enthält Granudacyn ein Konservierungsmittel, das natürlich im Körper vorkommt: hypochlorige Säure.

Die hypochlorige Säure verhindert auch die Vermehrung von gram+ und gram- Bakterien einschliesslich MRSA, ORSA, VRSA, VRE, Viren, Pilzen und Sporen in der Lösung (=Keimfreiheit).

Vorteile Wundspüllösung

- Reinigt die Wunde mechanisch
- Nicht zytotoxisch und nicht reizend
- Kann auf ZNS-Gewebe, Knorpel und Knochen angewendet werden, ist keimfrei und pH-neutral
- Gut geeignet für Hohlräume und Fisteln
- Reduziert den Wundgeruch
- Kann mehrmals erwärmt werden

Vorteile Wundgel

- Rehydriert Nekrosen und Fibrinbeläge
- Unterstützt das autolytische Débridement
- Sorgt für ein physiologisches Wundmilieu
- Weicht Beläge auf
- 2 - 5 mm dick auf die gereinigte Wunde geben
- Wirkt 2-3 Tage
- Spray besonders gut bei zerklüfteten Wunden

Anwendungsgebiete

- Spüllösung, Reinigung und Befeuchtung (beim Wundgel für trockene und schwach exsudierende Wunden)
- Chronische Wunden jeglicher Tiefe, wie z.B. diabetisches Fussyndrom, Dekubitus, Ulcus cruris, etc.
- Akute Wunden, wie z.B. Schnittwunden, Bisswunden, Risswunden, Platzwunden, Abschürfungen
- Wunden mit freiliegenden Knorpel, Sehnen, Bändern oder Knochen
- Operationswunden (intraoperativ und postoperativ)
- Verbrennungen bis Grad 2a, Strahlenulzera
- Körperhöhlen wie Ohr, Nase, Mund, Hals und Rachen

Bestellinformationen Wundspülung

| Art.-Nr. | Grösse | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|--------------|-------------------|------------------|
| 36 01 50 | 50 ml | 1 | 20 |
| 36 01 00 | 250 ml | 1 | 15 |
| 36 01 01 | 500 ml | 1 | 12 |
| 36 01 02 | 1000 ml | 1 | 6 |
| 36 01 03 | 500 ml NPWT | 1 | 12 |
| 36 01 04 | 1000 ml NPWT | 1 | 6 |

Steril – einzeln verpackt

Bestellinformationen Wundgel


| Art.-Nr. | Grösse | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|--------|-------------------|------------------|
| 36 01 07 | 50 g | 1 | 12 |
| 36 01 08 | 100 g | 1 | 12 |
| 36 01 06 | 250 g | 1 | 15 |

Steril – einzeln verpackt


Verbandzuschnitte Poster

- Hand, Finger, Daumen, Ellbogen, Nacken, Fuss
- Safetac Zuschnitte für Schaumstoffe ohne Hafttrand

Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele

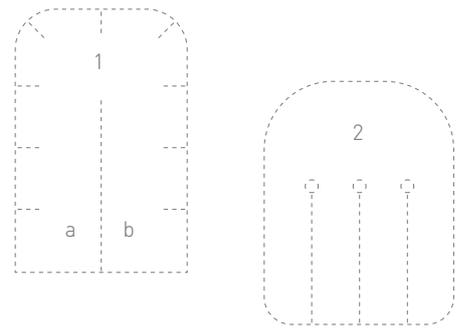


Handverband

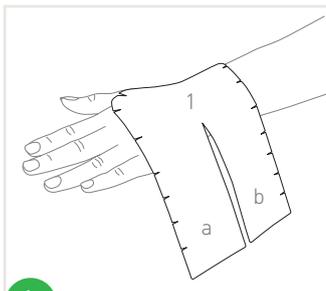


1.

Platzieren Sie Auflage 1 auf dem Handrücken. Die Laschen zeigen nach aussen.

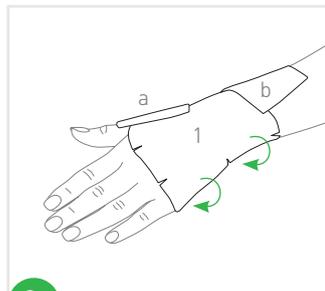


2.

Wickeln Sie die Laschen spiralförmig um das Handgelenk und passen Sie den gewünschten Winkel an.

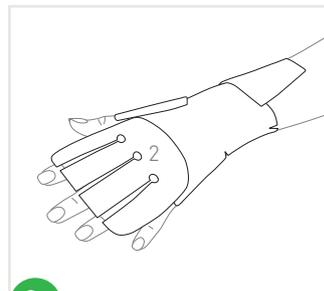

3.


Platzieren Sie Auflage 2 auf dem Handrücken.

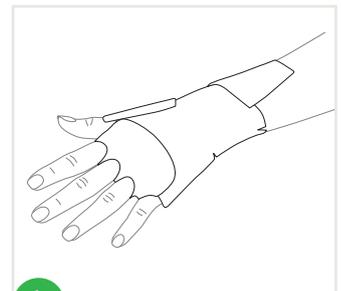

4.


Mit den einzelnen Schlaufen können Sie die Finger trennen, umwickeln oder die Fingerzwischenräume schützen.

Fingerverband

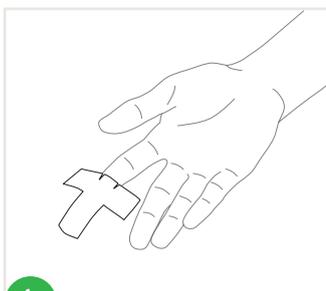


1.

Platzieren Sie die Auflage auf dem Finger.

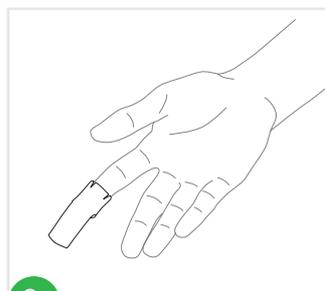


2.

Wickeln Sie die Flügel des Verbands um den Finger.

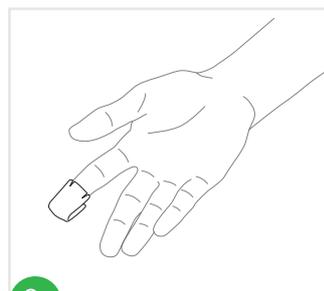

3.

Legen Sie die verbleibende Lasche über die Fingerspitze. Und fixieren Sie sie mit einem Klebestreifen.

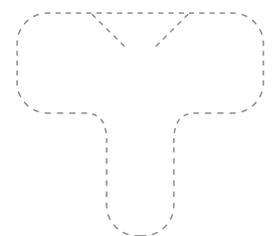

Mepilex® XT Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele

Ferse




Ellbogen



Zehenzwischenräume



Achsel

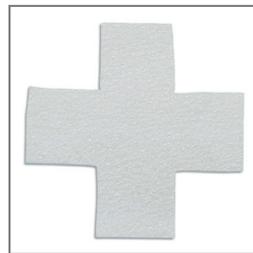

Zeh



Ohr




Finger oder Zeh



Anwendung bei Schläuchen



Handzwischenräume

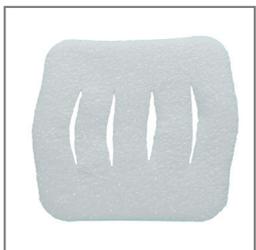

Safetac Übersicht Poster

- Verbände mit Safetac Technologie

Verbände mit Safetac® Technologie

Mepilex® XT



Ulcus cruris



Ulcus cruris



Verbrennungen bis Grad 2a

Mepilex® Lite



Diabetisches Fussyndrom



Verbrüfung



Strahlenfolgeaktion

Mepilex® Transfer



Ulcus cruris



Tumourwunde



Strahlenfolgeaktion

Mepilex® Border Flex



Ulcus cruris venosum



Ulcus cruris



Mepilex Border Heel

Mepilex® Border Lite



Schürfwunde



Diabetisches Fussyndrom



epithelisierende Wunde

Mepilex® Border Post-Op



Wunde am Sternum



Wunde an der Hüfte



Wunde am Unterschenkel

Mepilex® Ag



Ulcus cruris



Verbrennungen bis Grad 2a



Diabetisches Fussyndrom

Mepilex® Border Ag



Fersendekubitus



infiziertes Ulcus cruris



Ulcus cruris venosum


Mepitel®



Mepitel bei Epidermolysis Bullosa (EB)



Mepitel One bei Hautriss

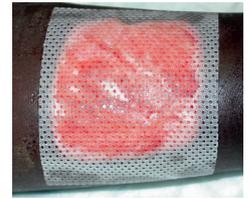

Mepitel auf Hautentnahmestelle

Mepitel® One

Mepitel® Film



Mepitel Film auf chirurgischer Wunde



Schutz von Pergamenthaut



Mepitel Film als „Lande-Zone“ zum Schutz der gesunden Haut



Mepilex® XT



S. 8



Mepilex® Lite



S. 10



Mepilex® Transfer



S. 11



Mepilex® Border Flex



S. 14



Mepilex® Border Lite



S. 17



Mepilex® Border Post-Op



S. 18



Mepilex® Ag



S. 23



Mepilex® Border Ag



S. 24



Mepitel® One Mepitel®



S. 28



Mepitel® Film




S. 31

Verbandzuschnitte Poster


- Safetac Zuschnitte für Schaumstoffe mit Hafttrand
- Hand, Finger, Daumen, Ellbogen, Nacken, Fuss

Mepilex® Border Lite Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele

Finger 5 x 12,5 cm

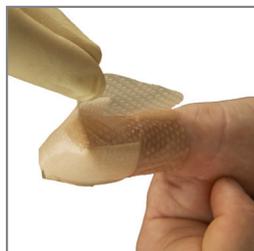

Zeh 5 x 12,5 cm

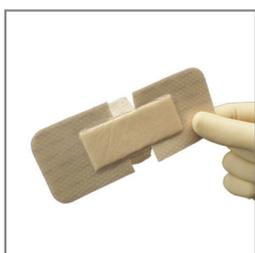


Ferse 10 x 10 cm



Ellbogen 10 x 10 cm




Ohr 4 x 5 cm

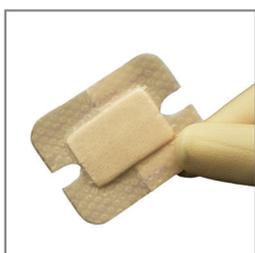

Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele

Fussverband

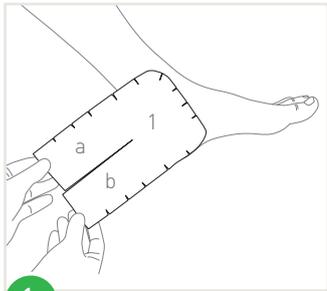


1.

Platzieren Sie Verband 1 auf der Innenseite des Fusses am Knöchel. Achten Sie dabei auf den richtigen Winkel.




2.

Wickeln Sie die Laschen des Verbands um das Sprunggelenk und applizieren Sie diese auf der Aussenseite des Fusses.


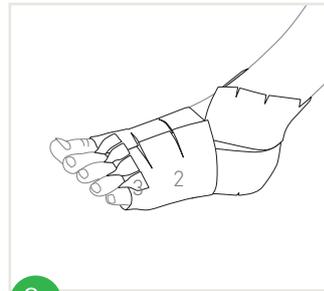


3.


Legen sie Verband 2 unter den Fuss, sodass die Silikonseite an der Haut haftet und nach oben zeigt. Legen Sie die Flügel nach oben hin an und achten Sie darauf, dass der Verband möglichst keine Falten wirft. Platzieren Sie die Verbände 3 zwischen den Zehen, um diese zu trennen. Dieser Schritt kann je nach Bedarf auch vor dem Anlegen von Verband 2 erfolgen. Wägen Sie bei jedem Zeh ab, ob ein Verband zur Trennung benötigt wird.

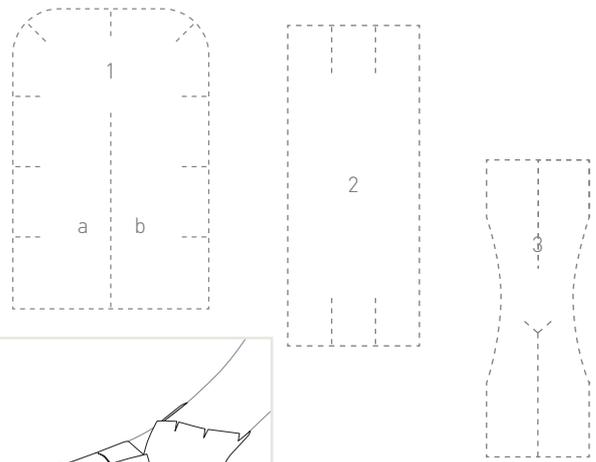



Nackenverband

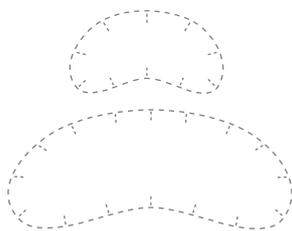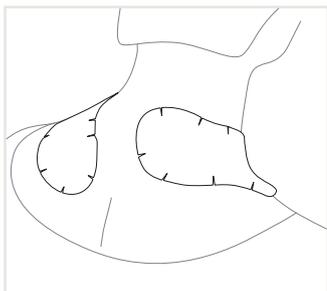

Ellbogenverband

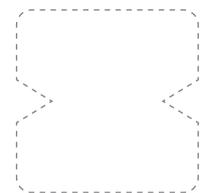

Daumenverband

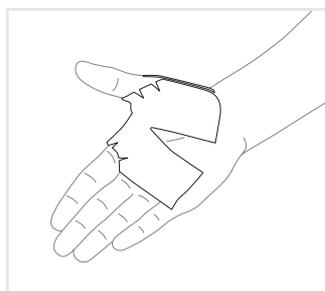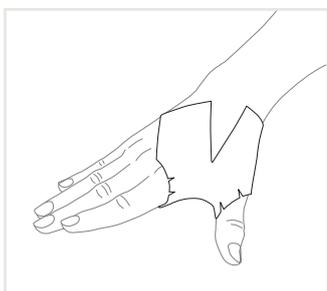





Fixierung & Narbenbehandlung


- Mepitac
- Mepiform

Mepitac®



Fixierverband

Mepitac ist die ideale und schonende Fixiermöglichkeit für Patienten mit empfindlicher und fragiler Haut.

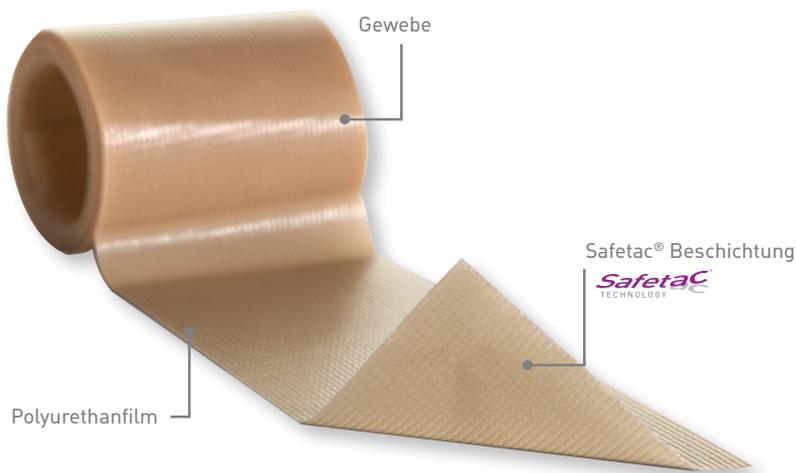

Vorteile

- Rückstandsfreies Entfernen
- Sehr geringes Allergiepotehtial
- Atraumatischer und schmerzarmen Verbandwechsel
- Sehr gute Anpassungsfähigkeit
- Duschfest und atmungsaktiv
- Kann angehoben und neu positioniert werden (wiederverwendbar)

Anwendungsgebiete

- Fixierung von medizinischen Produkten, z.B. Schläuchen, Verbänden, Sonden, Elektroden, IV Kanülen und Drainagen

Bestellinformationen


| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|------------|---------------|-------------------|------------------|
| 29 83 00 | 2 x 300 cm | 35.01.09.12.1 | 1 | 12 |
| 29 84 00 | 4 x 150 cm | 35.01.09.13.1 | 1 | 12 |

Unsteril – auf Rolle

Beispiele für Anwendungsgebiete



direkte Schlauchfixierung

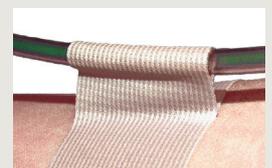


Schlauchfixierung „Lift“
– zur Reduzierung von möglichem Druck

Mepiform®



Selbsthaftender Verband zur Narbenbehandlung

Mepiform ist ein dünner und komfortabler Verband mit Safetac Technologie, der zur Behandlung von alten und frischen hypertrophen Narben und Keloiden geeignet ist.

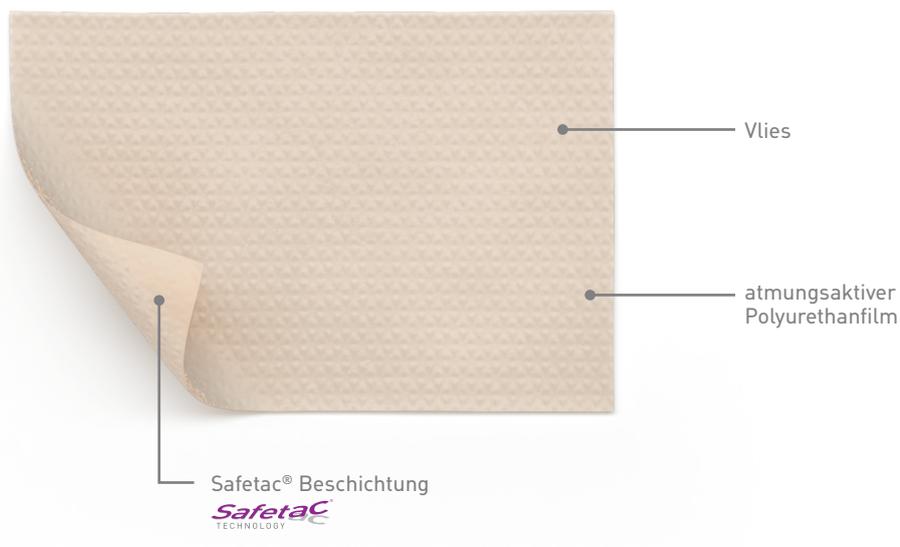

Vorteile

- Dünn und diskret, passt sich gut an Körperkonturen an
- Einfache Anwendung
- Nachgewiesene Wirksamkeit, klinisch getestet
- Für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet
- Atraumatischer und schmerzloser Verbandwechsel
- Duschfest und atmungsaktiv

Anwendungsgebiete

- Geschlossene, saubere Wunden nach Entfernung von Nahtmaterial
- Reduzierung von alten und frischen, hypertrophen Narben und Keloiden
- Zur Narbenvorbeugung
- Muss fortwährend und kontinuierlich getragen werden
- Tragedauer zwischen 2-6 Monaten/24 Stunden (ausser beim Duschen und Baden)

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|------------|-------------------|------------------|
| 29 36 00 | 4 x 30 cm | 5 | 50 |
| 29 37 00 | 5 x 7,5 cm | 5 | 25 |
| 29 38 00 | 10 x 18 cm | 5 | 35 |

einzelverpackt

Beispiele für Anwendungsgebiete



vor der Behandlung



nach der Behandlung




Faserverbände & Alginate

- Exufiber
- Exufiber Ag+
- Melgisorb Plus
- Melgisorb Ag

Gelbildender Faserverband

Exufiber ist ein gelbildender Faserverband mit patentierter Hydrolock®-Technologie und besteht aus hoch absorbierenden Polyvinylalkohol-Fasern (PVA). Exufiber ist für eine Vielzahl oberflächlicher und tiefer exsudierender Wunden geeignet. Für Absorption und Retention von Exsudat, Blut und Bakterien.

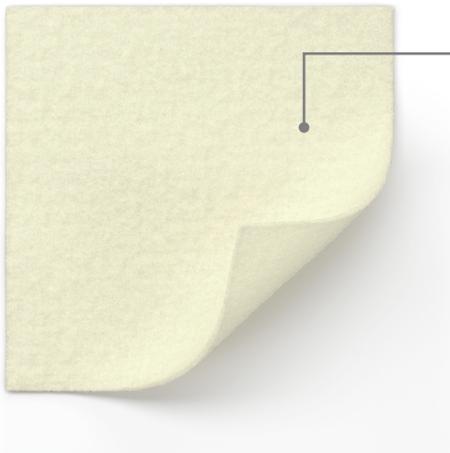

- PVA-Fasertechnologie
- Exzellente Nassreissfestigkeit
 - In Kontakt mit Exsudat gelbildend
 - Ausgezeichnete Retention

Beispiele für Anwendungsgebiete



Ergänzungsprodukte Exufiber und Exufiber Ag+

Vorteile

- Überlegenes Rückhaltevermögen
- Hohe Nassreissfestigkeit
- Hohe Absorption von Exsudat, Blut und Bakterien
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit
- Fördert das autolytische Débridement

Anwendungsgebiete

- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Oberflächliche Wunden und Wundhöhlen
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Dekubitus, diabetisches Fussyndrom
- Chirurgische Wunden
- Hautentnahmestellen
- Palliative Wunden
- Verbrennungen bis Grad 2a (nach der Akutphase)

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|----------|---------------|-------------------|------------------|
| 709900 | 5 x 5 | 35.05.07.01.1 | 10 | 40 |
| 709901 | 10 x 10 | 35.05.07.02.1 | 10 | 80 |
| 709903 | 15 x 15 | 35.05.07.04.1 | 10 | 60 |
| 709906 | 4.5 x 20 | 35.05.07.09.1 | 10 | 50 |
| 709909 | 2 x 45 | 35.05.07.09.1 | 5 | 25 |

Steril – einzeln verpackt



Ergänzungsprodukt zur Exsudataufnahme

Mepilex® XT Mepilex® Border Flex



Ergänzungsprodukt zur Fixierung

Tubifast®
WITH
2-WAY STRETCH®
TECHNOLOGY



Antimikrobieller, gelbildender Faserverband

Exufiber Ag+ ist ein antimikrobieller, gelbildender Faserverband mit patentierter Hydrolock®-Technologie und besteht aus hoch absorbierenden Polyvinylalkohol-Fasern (PVA) und Silberionen. Exufiber Ag+ ist zur Anwendung bei akuten und chronischen Wunden vorgesehen.



Exufiber Ag+

Tötet ein breites Spektrum von Krankheitserregern, einschliesslich Vancomycin-resistenter Enterokokken (VRE) und MRSA (in vitro).

Bei Kontakt mit Flüssigkeit werden Silberionen freigesetzt.

Vorteile

- Anhaltende antimikrobielle Wirkung
- Verhindert die Neubildung von Biofilm durch die Reduzierung von Mikroorganismen
- Überlegenes Rückhaltevermögen
- Hohe Nassreissfestigkeit
- Hohe Absorbtion von Exsudat, Blut und Bakterien
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit

Anwendungsgebiete

- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Infizierte Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko
- Oberflächliche Wunden und Wundhöhlen
- Tumorwunden, Ulcus cruris und diabetisches Fussyndrom
- Verbrennungen bis Grad 2a
- Palliative Wunden

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|----------|-------------------|------------------|
| 603401 | 5 x 5 | 10 | 40 |
| 603402 | 10 x 10 | 10 | 80 |
| 603403 | 15 x 15 | 10 | 60 |
| 603405 | 4,5 x 20 | 10 | 50 |
| 603400 | 2 x 45 | 5 | 25 |

Steril – einzeln verpackt




Melgisorb® Plus



Absorbierender Alginatverband

Hochabsorbierender Kalzium-Natrium-Alginatverband zur Versorgung von stark exsudierenden, oberflächlichen und tiefen Wunden.

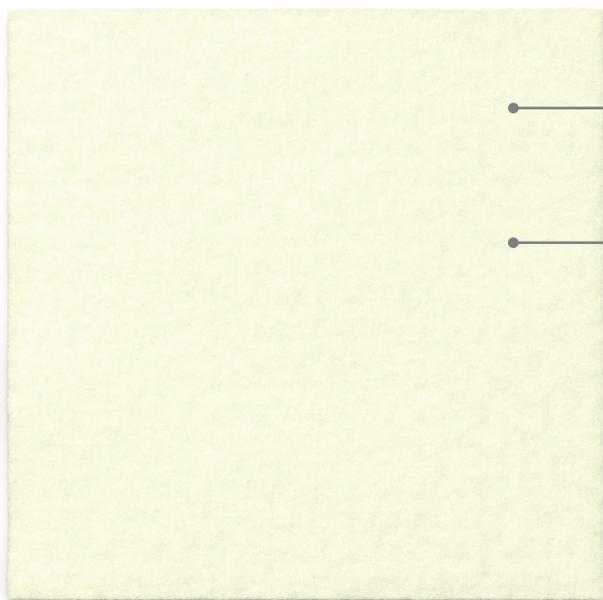

- exzellente Absorption - für stark exsudierende Wunden
- Hohe Faserfestigkeit im feuchten Zustand

Vorteile

- Bildet in Verbindung mit Exsudat ein feuchtes Gel
- Das Gel ist hydrophil und bindet grosse Mengen Flüssigkeit
- Verklebt durch Vergelen nicht mit dem feuchten Wundbett
- Gut an jede Wunde anpassbar (durch Zupfen)
- Freiwerdende Kalziumionen wirken leicht blutstillend

Anwendungsgebiete

- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Oberflächliche Wunden und Wundhöhlen
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Dekubitus, diabetisches Fussyndrom
- Hautentnahmestellen
- Traumatische Wunden

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|-------------------|------------|---------------|-------------------|------------------|
| Kompressen | | | | |
| 25 20 00 | 5 x 5 cm | 35.05.06.01.1 | 10 | 100 |
| 25 22 00 | 10 x 10 cm | 35.05.06.02.1 | 10 | 100 |
| 25 25 00 | 10 x 20 cm | 35.05.06.03.1 | 10 | 100 |
| Tamponade | | | | |
| 25 35 00 | 3 x 45 cm | 35.05.06.08.1 | 5 | 50 |

Steril – einzeln verpackt

Ergänzungsprodukte Melgisorb Plus und Melgisorb Ag



Ergänzungsprodukt
zur Exsudataufnahme

Mepilex® XT

Mepilex® Border Flex




Ergänzungsprodukt
zur Fixierung

Tubifast®
WITH
2-WAY STRETCH®
TECHNOLOGY



Antimikrobieller Alginatverband

Melgisorb Ag ist ein hochabsorbierender, antimikrobieller Kalzium-Natrium-Alginatverband zur Versorgung von kritisch kolonisierten und infizierten oberflächlichen sowie tiefen Wunden. Die Strukturstabilität der Fasern ermöglicht die rückstandsarme Entfernung beim Verbandwechsel.

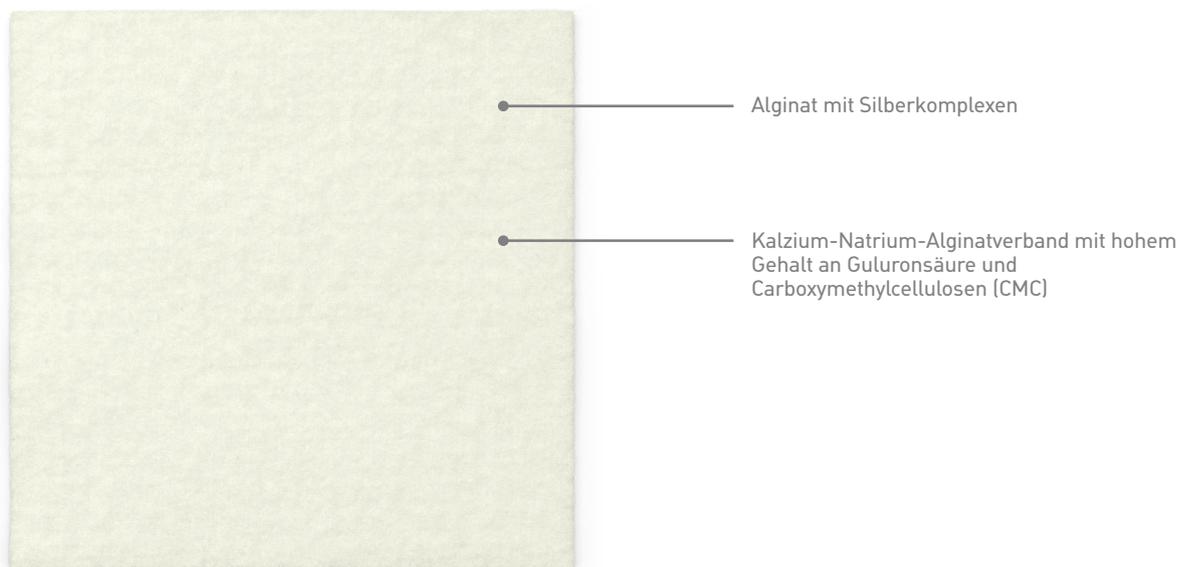

Vorteile

- Strukturstabilität: die hohe Strukturstabilität der Fasern ermöglicht die rückstandsarme Entfernung in einem Stück
- Kann unter Kompression angewendet werden
- Schnelle und anhaltende antimikrobielle Wirkung

Anwendungsgebiete

- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Oberflächliche Wunden und Wundhöhlen
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Dekubitus, Diabetisches Fussyndrom
- Hautentnahmestellen
- Traumatische Wunden
- Verbrennungen bis Grad 2a

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| Kompressen | | | |
| 25 60 55 | 5 x 5 cm | 10 | 100 |
| 25 61 05 | 10 x 10 cm | 10 | 100 |
| 25 61 55 | 15 x 15 cm | 10 | 100 |
| Tamponade | | | |
| 25 66 05 | 3 x 44 cm | 10 | 100 |

Steril – einzeln verpackt

Beispiele für Anwendungsgebiete





Absorber & Superabsorber

- Mextra Superabsorbent
- Mesorb

Mextra® Superabsorbent



Superabsorbierender Wundverband mit flüssigkeitsabweisendem Deckvlies

Mextra Superabsorbent ist ein superabsorbierender Verband, der Wundexsudat über die Wundkontaktschicht absorbiert und zuverlässig in seinem Kern festhält. Das flüssigkeitsabweisende Deckvlies fungiert als Exsudatbarriere und verhindert das Durchtreten von Exsudat nach oben.



Vorteile

- Hohes Rückhaltevermögen
- Erhöhte Absorbtionskapazität
- Weich und anpassungsfähig
- Atmungsaktiv
- Schützt den Wundumgebungsbereich

Anwendungsgebiete

- Stark bis sehr stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z.B. Ulcus cruris, Dekubitus
- Wunden in der Reinigungsphase
- Tumorwunden
- Wunden, verursacht durch lymphatische Stauungen

Ergänzungsprodukte als möglicher Primärverband

Wundkontaktauflagen, wie z.B.:



Mepilex® Transfer
Mepilex® Transfer Ag
Mepitel®
Mepitel® One


Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | Grösse Wundkissen | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|----------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 61 00 00 | 12,5 x 12,5 cm | 9,5 x 9,5 cm | 35.05.05.03.1 | 10 | 50 |
| 61 01 00 | 12,5 x 17,5 cm | 9,5 x 14,5 cm | 35.05.05.04.1 | 10 | 40 |
| 61 02 00 | 12,5 x 22,5 cm | 9,5 x 19,5 cm | 35.05.05.04.1 | 10 | 90 |
| 61 03 00 | 17,5 x 22,5 cm | 14,5 x 19,5 cm | 35.05.05.05.1 | 10 | 40 |
| 61 04 00 | 22,5 x 27,5 cm | 19,5 x 24,5 cm | 35.05.05.06.1 | 10 | 40 |
| 61 05 00 | 22,5 x 32,5 cm | 19,5 x 29,5 cm | 35.05.05.06.1 | 10 | 50 |
| 61 06 00 | 22,5 x 42,5 cm | 19,5 x 39,5 cm | 35.05.05.08.1 | 10 | 50 |

Steril – einzeln verpackt

Hochabsorbierender Saugverband mit flüssigkeitsundurchlässiger Exsudatbarriere

Mesorb ist ein weicher, hochabsorbierender Saugverband, welcher grosse Mengen von Exsudat aufnimmt. Die flüssigkeitsundurchlässige Exsudatbarriere verhindert die Verschmutzung von Bekleidung und Bettwäsche. Mesorb kann bis zu 7 Tage getragen werden, abhängig vom Zustand der Wunde und der Haut oder in Absprache mit medizinischem Fachpersonal.

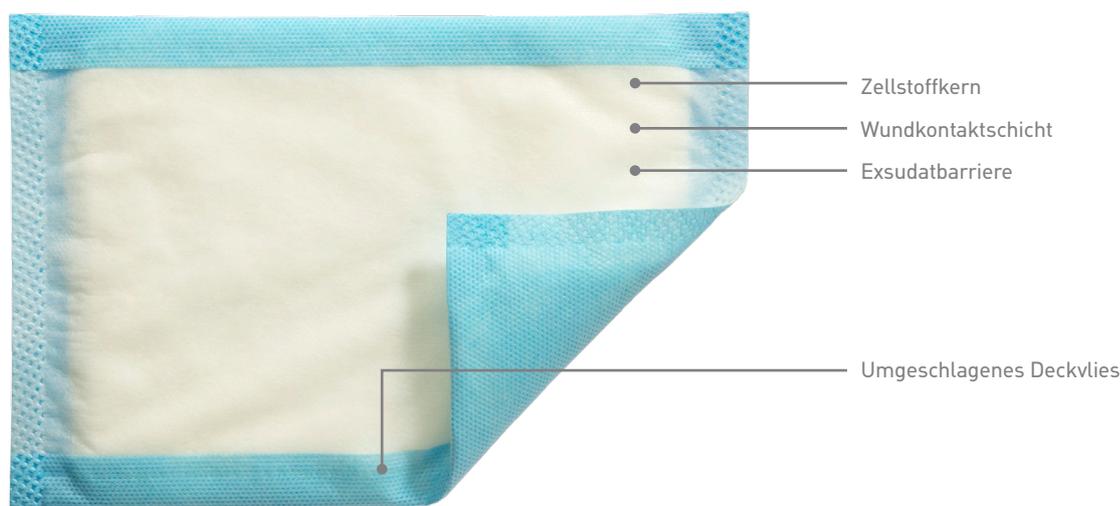

Vorteile

- Hochabsorbierend
- Gute Polsterwirkung
- Hoher Tragekomfort
- Kosteneffizient
- Atmungsaktiv

Anwendungsgebiete

- Stark exsudierende Wunden
- Kann als Primärverband verwendet werden
- Kann als Sekundärverband zusammen mit Mepitel, Mepitel One, Mepilex Transfer oder Mepilex Transfer Ag verwendet werden.

Ergänzungsprodukte als möglicher Primärverband

Wundkontaktauflagen, wie z.B.:



Mepilex® Transfer
Mepilex® Transfer Ag
Mepitel®
Mepitel® One

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|------------|---------------|-------------------|------------------|
| 67 70 01 | 10 x 13 cm | 35.01.04.01.1 | 50 | 400 |
| 67 72 01 | 13 x 15 cm | 35.01.04.02.1 | 50 | 300 |
| 67 74 01 | 10 x 23 cm | 35.01.04.02.1 | 50 | 300 |
| 67 76 01 | 15 x 23 cm | 35.01.04.03.1 | 50 | 300 |
| 67 77 01 | 23 x 25 cm | 35.01.04.04.1 | 30 | 120 |
| 67 78 01 | 30 x 23 cm | 35.01.04.05.1 | 30 | 120 |

Steril – einzeln verpackt



Dekubitus Behandlung & Prävention

- Mepilex Border Sacrum
- Mepilex Border Heel

Mepilex[®] Border Heel

Mepilex[®] Border Sacrum



Selbsthaftender Schaumverband zur Behandlung und Prävention

Mepilex Border Sacrum und Heel sind selbsthaftende, hochabsorbierende Polyurethanschaumverbände zur Behandlung mittel bis stark exsudierender Wunden und zur Prävention von Dekubitus. Der integrierte Superabsorber verhindert, auch unter Kompression, ein Auslaufen und eine Rücknässung des Verbandes.

Der Hafttrand mit Safetac Technologie sorgt für die schonende und dennoch sichere Fixierung.

Optimierte Haftung am **Gesäss** für noch besseren Schutz im stark belasteten Sakralbereich

Mepilex[®] Border Sacrum

Optimierte Verbandform zur **maximalen Abdeckung** besonders gefährdeter Bereiche


Gut erkennbare Griffflaschen zeigen dem Anwender, wo er den Verband greifen kann

Mepilex[®] Border Heel

Stabile **Haftländer** vereinfachen die Applikation und verbessert die Fixation


Abdeckung des Innen- und Aussen**knöchels** für maximalen Schutz

Mit dem unveränderten, besonders schützenden 5-schichtigen Aufbau

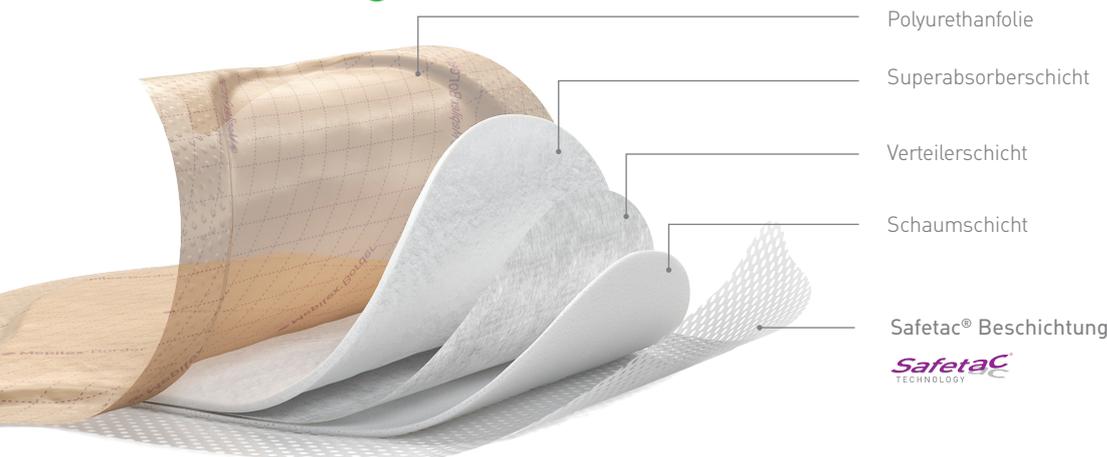

Safetac[®] TECHNOLOGY

Warum beugt Mepilex® Border Sacrum Dekubitus effektiv vor?

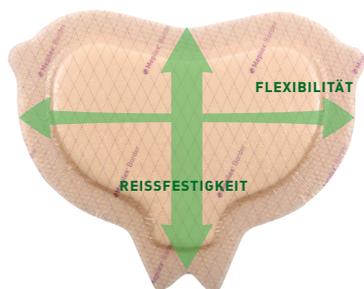

Deep Defense™ Technologie

Reissfestigkeit in der Gleit/Scherrichtung der Patientenbewegung und **Flexibilität** in horizontaler Richtung schützen vor dem kombinierten Effekt der von aussen einwirkenden Kräfte, die zu Dekubitus führen. Ausserdem wird die strukturelle Integrität des Verbandes aufrecht erhalten, auch nach Aufnahme von Schweiß.

Anwendung von Mepilex Border Sacrum



Anwendung von Mepilex Border Heel



Unsere Applikationsleitfaden für Mepilex Border Sacrum & Heel finden Sie als PDF zum Download auf unserer Website:
www.molnlycke.ch/produkte-losungen/mepilex-border-sacrum/
www.molnlycke.ch/produkte-losungen/mepilex-border-heel/

Vorteile

- Sehr hohes Absorptionsvermögen durch Superabsorber für längere Verbandwechselintervalle und Kosteneffizienz
- Hält Exsudat sicher im Verband – auch unter Druck
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel
- Griffflaschen zur Hautkontrolle bei Prävention

Anwendungsgebiete

- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom
- Traumatische Wunden
- Dekubitusprophylaxe

Bestellinformationen

Mepilex Border Sacrum

| Art.-Nr. | Grösse | Grösse Wundkissen | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| 28 20 50 | 16 x 20 cm | 120 cm ² | 35.05.03.10.1 | 5 | 40 |
| 28 24 50 | 22 x 25 cm | 240 cm ² | 35.05.03.10.1 | 5 | 30 |

Mepilex Border Heel

| Art.-Nr. | Grösse | Grösse Wundkissen | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| 28 27 50 | 22 x 23 cm | 189 cm ² | 35.05.03.11.1 | 6 | 30 |

Steril - einzeln verpackt

Entwickelt zum Schutz vor den 4 Hauptursachen eines Dekubitus



Druck



Scherkräfte



Reibung



Mikro-Klima



Schlauchbandagen

- Tubifast 2-Way-Stretch
- Tubifast Garments

Tubifast® & Tubifast® Garments



Elastischer Schlauchverband

Tubifast 2-Way Stretch ist ein elastischer längs- und querdehnbarer Schlauchverband, der sich für die Sicherung von Verbänden, wie z.B. Mepilex XT, Mepilex Lite, Mextra Superabsorbent oder anderen medizinischen Produkten eignet.

Vorteile

- Längs- und Querdehnbarkeit für sichere Fixierung
- Gute Elastizität für ausreichende Bewegungsfreiheit
- Wiederverwendbar
- Nicht sensibilisierend oder irritierend
- Gute Luftzirkulation
- Rollt an den Enden nicht auf

Anwendungsgebiete

- Sicherung von Wundauflagen und anderen medizinischen Produkten
- Zur Abdeckung der Haut, Unterzug-Stockinette



Fasergehalt:
Viskose, Elastan, Polyamid


Erstattungsfähig. Die 1 m-Längen Tubifast sind auch einzeln verordnungs- und abgabefähig.

Bestellinformationen Tubifast

| Art.-Nr. | Breite | Umfang Gliedmasse | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 10 m Länge | | | | | |
| 24 34 | Rot (3,5 cm) | 9 - 18 cm | 34.30.01.03.1 | 1 | 20 |
| 24 36 | Grün (5 cm) | 14 - 24 cm | 34.30.01.03.1 | 1 | 24 |
| 24 38 | Blau (7,5 cm) | 24 - 40 cm | 34.30.01.05.1 | 1 | 30 |
| 24 40 | Gelb (10,75 cm) | 35 - 64 cm | 34.30.01.06.1 | 1 | 12 |
| 24 44 | Violett (20 cm) | 64 - 130 cm | 34.30.01.07.1 | 1 | 15 |

Unsteril – 10 m-Produkte auf Rolle

Größen- und
Anwendungsübersicht

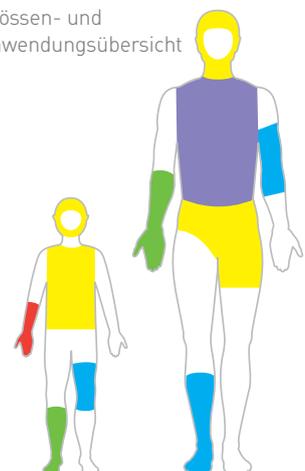

Flyer mit Anwendungsbeispielen und Schnittmustern können via info.ch@molnlycke.com bestellt werden.

Beispiele für Anwendungsgebiete



Gelber Streifen

Anwendung am Kopf



Violetter Streifen

Anwendung am Oberkörper



Grüner Streifen

Anwendung an der Hand



Gelber Streifen

Anwendung an der Hüfte



Blauer Streifen

Anwendung am Bein

Tubifast® Garments



Bestellinformationen Tubifast Garments

| Art.-Nr. | Produkt/ Grösse | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|--|-------------------|------------------|
| 99 20 07 | Unterhemd 6-24 Monate | 6 | 30 |
| 99 20 08 | Unterhemd 2-5 Jahre | 6 | 30 |
| 99 20 09 | Unterhemd 5-8 Jahre | 6 | 30 |
| 99 20 10 | Unterhemd 8-11 Jahre | 6 | 30 |
| 99 20 11 | Unterhemd 11-14 Jahre | 6 | 30 |
| 99 20 12 | Strumpfhose 6-24 Monate | 6 | 30 |
| 99 20 13 | Strümpfe 2-5 Jahre | 6 | 30 |
| 99 20 14 | Strümpfe 5-8 Jahre | 6 | 30 |
| 99 20 15 | Strümpfe 8-11 Jahre | 6 | 30 |
| 99 20 16 | Strümpfe 11-14 Jahre | 6 | 30 |
| 99 20 17 | Socken 2-14 Jahre | 6 | 42 |
| 59 22 | Handschuhe, XS Kind | 6 | 42 |
| 59 23 | Handschuhe, S Kind | 6 | 42 |
| 59 21 | Handschuhe, M/L Kind - S/M Erwachsener | 6 | 42 |
| 59 20 | Handschuhe M/L Erwachsener | 6 | 42 |



Wichtige Information:

Bitte wählen Sie die Tubifast-Kleidung der Grösse und dem Alter des Kindes entsprechend. Im Zweifel über die richtige Grösse sollte ein Kleidungsstück der nächsthöheren Grösse gewählt werden. Trägt das Kind Windeln unter Tubifast Garments, muss dies bei der Wahl der richtigen Grösse berücksichtigt werden.

Unsere Tubifast Garments sind auch erhältlich bei Publicare.
www.publicare.ch • Tel: +41 56 484 15 00



Konventionelle Wundversorgung

- Mepore Film&Pad
- Mepore Pro
- Mepore und Mepore Rolle
- Mepore IV
- Mepore Film
- Mefix
- Gauze
- Mesoft

Mepore® Film & Pad



Transparenter, selbstklebender absorbierender Wundverband

Mepore Film & Pad ist für verschiedenste klein bis gering exsudierende Wunden wie chirurgische Wunden, Schnitte und Abschürfungen geeignet. Das Produkt kombiniert ein absorbierendes Wundkissen mit einer transparenten, umgebenden Folie – dadurch ist der Verband diskret zu tragen und die wundumgebende Haut kann problemlos beurteilt werden.



Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|
| 27 51 00 | 4 x 5 cm | 35.05.10.01.1 | 85 | 340 |
| 27 51 10 | 4 x 5 cm | 35.05.10.01.1 | 5 | 70 |
| 27 52 00 | 5 x 7 cm oval | 35.05.10.01.1 | 85 | 340 |
| 27 52 10 | 5 x 7 cm oval | 35.05.10.01.1 | 5 | 70 |
| 27 53 00 | 5 x 7 cm square | 35.05.10.01.1 | 85 | 340 |
| 27 53 10 | 5 x 7 cm square | 35.05.10.01.1 | 5 | 70 |
| 27 54 00 | 9 x 10 cm | 35.05.10.02.1 | 30 | 180 |
| 27 54 10 | 9 x 10 cm | 35.05.10.02.1 | 5 | 50 |
| 27 55 00 | 9 x 15 cm | 35.05.10.03.1 | 30 | 240 |
| 27 55 10 | 9 x 15 cm | 35.05.10.03.1 | 5 | 50 |
| 27 56 00 | 9 x 20 cm | 35.05.10.04.1 | 30 | 240 |
| 27 56 10 | 9 x 20 cm | 35.05.10.04.1 | 5 | 40 |
| 27 57 00 | 9 x 25 cm | 35.05.10.04.1 | 30 | 150 |
| 27 58 00 | 9 x 30 cm | 35.05.10.05.1 | 25 | 125 |
| 27 59 00 | 9 x 35 cm | 35.05.10.06.1 | 25 | 100 |

Steril – einzeln verpackt

Mepore® Pro



Wasserfester, selbstklebender Wundverband

Mepore Pro ist ausserdem ein atmungsaktiver Verband, der Blut und Exsudat absorbiert. Dank einer Schutzfolie schützt der Verband auch unter der Dusche die Wunde vor Wasser und Kontamination. Haftet dank einem hautfreundlichen Kleber sanft und sicher auf der Haut.



Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|-----------|---------------|-------------------|------------------|
| 67 08 20 | 6 x 7 cm | 34.42.02.01.1 | 60 | 480 |
| 67 09 20 | 10 x 9 cm | 34.42.02.03.1 | 40 | 320 |
| 68 09 40 | 10 x 9 cm | 34.42.02.03.1 | 10 | 200 |
| 67 10 20 | 15 x 9 cm | 34.42.02.04.1 | 40 | 320 |
| 68 10 40 | 15 x 9 cm | 34.42.02.04.1 | 10 | 140 |
| 67 11 20 | 20 x 9 cm | 34.42.02.05.1 | 30 | 180 |
| 68 11 40 | 20 x 9 cm | 34.42.02.05.1 | 10 | 140 |
| 67 12 20 | 25 x 9 cm | 34.42.02.06.1 | 30 | 210 |
| 67 13 20 | 30 x 9 cm | 34.42.02.07.1 | 30 | 270 |

Steril – einzeln verpackt

Mepore®



Selbstklebender, absorbierender Wundverband

Mepore ist ein atmungsaktiver Wundverband für klein bis gering exsudierende Wunden wie chirurgische Wunden, Schnitte und Abschürfungen. Der Verband haftet dank dem hautfreundlichen Kleber auf Wasserbasis sanft und sicher auf der Haut. Ausserdem ist er luftdurchlässig, um eine Wundmazeration zu verhindern.



Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|-----------|---------------|-------------------|------------------|
| 67 08 00 | 6 x 7 cm | 34.42.02.01.1 | 60 | 480 |
| 67 08 70 | 6 x 7 cm | 34.42.02.01.1 | 10 | 140 |
| 67 09 00 | 10 x 9 cm | 34.42.02.03.1 | 50 | 400 |
| 67 09 70 | 10 x 9 cm | 34.42.02.03.1 | 5 | 100 |
| 67 10 00 | 15 x 9 cm | 34.42.02.04.1 | 50 | 400 |
| 67 10 70 | 15 x 9 cm | 34.42.02.04.1 | 5 | 70 |
| 67 11 00 | 20 x 9 cm | 34.42.02.05.1 | 30 | 180 |
| 67 11 70 | 20 x 9 cm | 34.42.02.05.1 | 5 | 70 |
| 67 12 00 | 25 x 9 cm | 34.42.02.06.1 | 30 | 210 |
| 67 13 00 | 30 x 9 cm | 34.42.02.07.1 | 30 | 270 |

Steril – einzeln verpackt

Rollen

| | | | | |
|----------|------------|---------------|---|----|
| 33 19 00 | 4 x 500 cm | 34.40.01.04.1 | 1 | 24 |
| 33 20 00 | 7 x 500 cm | 34.40.01.04.1 | 1 | 18 |

Unsteril

Mepore® IV



Transparenter, selbstklebender, atmungsaktiver Kanülenfixierverband

Mepore IV verstärkt für zusätzliche Festigkeit – damit Sie sich darauf verlassen können, dass intravenöse Systeme sicher fixiert sind. Dank des hautfreundlichen Klebers von Mepore IV ist der Verband auch sanft zur Haut. Da er transparent ist, können Sie die Einstichstelle problemlos prüfen. Die Anwendung erfolgt ganz unkompliziert.



Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|------------|---------------|-------------------|------------------|
| 27 40 00 | 5,5 x 5 cm | 35.05.10.01.1 | 100 | 600 |
| 27 42 00 | 8 x 9 cm | 35.05.10.02.1 | 70 | 210 |
| 27 44 00 | 10 x 11 cm | 35.05.10.03.1 | 70 | 210 |

Steril – einzeln verpackt

Mepore® Film



Atmungsaktiver, selbstklebender, transparenter Folienverband

Mepore Film ist ein Folienverband, der optimal als sekundärer Fixierverband zur Abdeckung von Hydrogel- oder Alginatverbänden verwendet werden kann. Sie können ihn auch bei einer Vielzahl sauberer Wunden in der Granulationsphase einsetzen. Mepore Film ist luftdurchlässig und verhindert so eine Mazeration der Wunde. Ausserdem lässt er sich leicht applizieren, sogar mit Handschuhen. Da er transparent ist, kann die Wundumgebung problemlos überprüft werden.

Bestellinformationen



| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|------------|---------------|-------------------|------------------|
| 27 06 00 | 6 x 7 cm | 35.05.10.01.1 | 100 | 600 |
| 27 06 70 | 6 x 7 cm | 35.05.10.01.1 | 10 | 50 |
| 27 15 00 | 10 x 12 cm | 35.05.10.03.1 | 70 | 210 |
| 27 15 70 | 10 x 12 cm | 35.05.10.03.1 | 10 | 70 |
| 27 25 00 | 10 x 25 cm | 35.05.10.04.1 | 20 | 100 |
| 27 25 70 | 10 x 25 cm | 35.05.10.04.1 | 10 | 50 |
| 27 30 00 | 15 x 21 cm | 35.05.10.05.1 | 10 | 50 |

Steril – einzeln verpackt



Atmungsaktives, selbstklebendes, wasserabweisendes Fixiervlies


Mefix ist ein Vlies zur sicheren Fixierung von Wundverbänden, Schläuchen sowie Kanülen und bietet Schutz vor Kontamination von aussen. Mefix ist sanft zur Haut, hautfreundlich und dank seiner Anpassungsfähigkeit bequem zu tragen.




Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| 31 02 50 | 2,5 cm x 10 m | 35.01.09.30.1 | 1 | 40 |
| 31 05 00 | 5 cm x 10 m | 35.01.09.31.1 | 1 | 40 |
| 31 10 00 | 10 cm x 10 m | 35.01.09.32.1 | 1 | 20 |
| 31 15 00 | 15 cm x 10 m | 35.01.09.33.1 | 1 | 15 |
| 31 20 00 | 20 cm x 10 m | 35.01.09.34.1 | 1 | 10 |
| 31 30 00 | 30 cm x 10 m | 35.01.09.35.1 | 1 | 10 |


Unsteril – auf Rolle

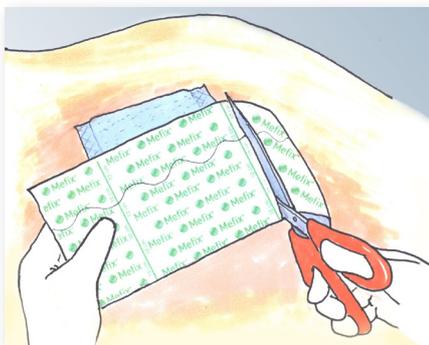

1. Schneiden Sie den Verband auf die gewünschte Grösse zu. Trennen Sie die beiden Streifen des Schutzpapiers indem Sie den Verband leicht quer dehnen.

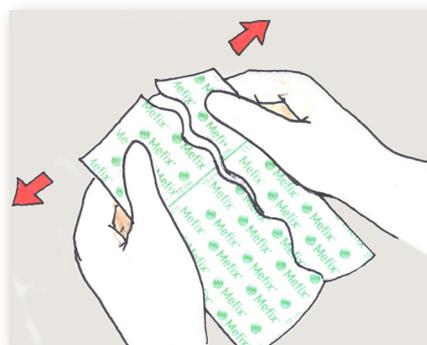

2. Entfernen Sie zuerst den schmalen Streifen der Schutzfolie.

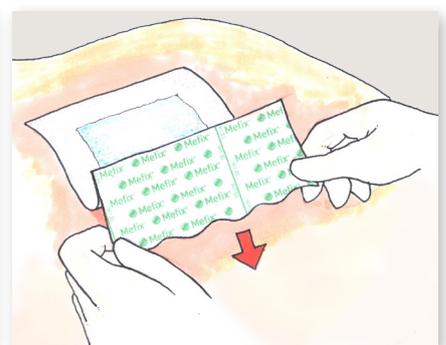

3. Applizieren Sie nun den Teil mit dem freigelegten Kleber auf die Haut. Entfernen Sie das restliche Schutzpapier.

Bitte beachten Sie Mefix während der Applikation nicht zu überdehnen, um Spannungsblasen zu vermeiden.

Baumwollkompressen und Rundtupfer

Die Tupfer und Kompressen bestehen zu 100% aus Baumwolle, sind ohne Chlor gebleicht, enthalten keine Bindemittel, sind nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Sie sind mit 17 Fäden pro cm² hergestellt und finden breite Anwendung im Bereich Wundreinigung, Hautreinigung vor chirurgischen Eingriffen, als Verband als solches und zur Absorption von Körperflüssigkeiten in Wunden.



Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|---|---------------|-------------------|------------------|
| 15 08 00 | Gaze-Rundtupfer Nr. 3, ø ca. 2,8 cm, unsteril | 35.01.01.20.1 | 250 | 3000 |
| 15 08 60 | Gaze-Rundtupfer Nr. 3, ø ca. 2,8 cm, steril, Beutel à 5 Stk. | 35.01.01.01.1 | 150 | 1500 |
| 15 13 00 | Gaze-Rundtupfer Nr. 4, ø ca. 6,8 cm, unsteril | 35.01.01.21.1 | 100 | 1500 |
| 15 13 60 | Gaze-Rundtupfer Nr. 4, ø ca. 6,8 cm, steril, Beutel à 5 Stück | n/a | 120 | 1200 |
| 15 17 00 | Gaze-Flachtupfer Nr. 3, 25x25 mm, unsteril | 35.01.01.20.1 | 500 | 10000 |
| 15 30 40 | Gaze-Kompressen 5x5cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 2 Stk. | 34.01.01.01.1 | 100 | 2000 |
| 15 30 65 | Gaze-Kompressen 5x5cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 5 Stk. | 34.01.01.01.1 | 120 | 2400 |
| 15 31 00 | Gaze-Kompressen 5x5cm, 8 Lagen, unsteril | 34.02.02.01.1 | 150 | 7650 |
| 15 33 00 | Gaze-Kompressen 7x7,5cm, 8 Lagen, unsteril | 34.02.02.02.1 | 150 | 3600 |
| 15 80 40 | Gaze-Kompressen 10x10cm, 8 Lagen, steril, Beutel à 2 Stk. | 34.01.01.03.1 | 150 | 1500 |
| 15 84 00 | Gaze-Kompressen 10x10cm, 12 Lagen, unsteril | 34.01.01.03.1 | 100 | 2000 |
| 15 84 40 | Gaze-Kompressen 10x10cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 2 Stk. | 34.01.01.03.1 | 100 | 1000 |
| 15 84 65 | Gaze-Kompressen 10x10cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 5 Stk. | 34.01.01.03.1 | 120 | 1200 |
| 15 85 00 | Gaze-Kompressen 10x20cm, 12 Lagen, unsteril | 34.01.01.04.1 | 50 | 1000 |
| 15 85 40 | Gaze-Kompressen 10x20cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 2 Stk. | 34.01.01.04.1 | 100 | 900 |
| 15 85 60 | Gaze-Kompressen 10x20cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 5 Stk. | 34.01.01.04.1 | 100 | 900 |

Vlieskompressen und Rundtupfer

Mesoft wurde für verschiedene Anwendungen entwickelt – einschliesslich Absorbtion, Schutz, Auffüllung und Desinfektion. Im Gegensatz zu Baumwollgaze fühlen sie sich weich an und sind formbeständig, auch im Nasszustand. Sie können Flüssigkeit oder Exsudat aufnehmen und setzen weniger Fasern in die Wunde frei als Gaze.



Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Grösse | MiGeL | Stück/ Packung | Stück/ Karton |
|----------|---|---------------|-------------------|------------------|
| 15 50 30 | Mesoft Vlies-Schlitzkomresse 10x10 cm, steril, Beutel à 1 Stk. | 34.02.01.03.1 | 130 | 1950 |
| 15 60 15 | Mesoft Vlies-Komresse 5x5cm, unsteril | 34.02.02.01.1 | 100 | 3200 |
| 15 60 40 | Mesoft Vlies-Komresse 5x5cm, steril, Beutel à 2 Stk. | 34.02.01.01.1 | 150 | 3000 |
| 15 60 65 | Mesoft Vlies-Komresse 5x5cm, steril, Beutel à 5 Stk. | 34.02.01.01.1 | 150 | 3000 |
| 15 61 15 | Mesoft Vlies-Komresse 7,5x7,5cm, unsteril | 34.02.02.02.1 | 100 | 2000 |
| 15 61 40 | Mesoft Vlies-Komresse 7,5x7,5cm, steril, Beutel à 2 Stk. | 34.02.01.02.1 | 150 | 4200 |
| 15 61 65 | Mesoft Vlies-Komresse 7,5x7,5cm, steril, Beutel à 5 Stk. | 34.02.01.02.1 | 150 | 4200 |
| 15 63 15 | Mesoft Vlies-Komresse 10x10cm, unsteril | 34.02.02.03.1 | 100 | 5600 |
| 15 63 40 | Mesoft Vlies-Komresse 10x10cm, steril, Beutel à 2 Stk. | 34.02.01.03.1 | 150 | 3450 |
| 15 63 65 | Mesoft Vlies-Komresse 10x10cm, steril, Beutel à 5 Stk. | 34.02.01.03.1 | 150 | 3450 |
| 15 64 15 | Mesoft Vlies-Komresse 10x20cm, unsteril | 34.02.02.04.1 | 100 | 2800 |
| 15 64 40 | Mesoft Vlies-Komresse 10x20cm, steril, Beutel à 2 Stk. | 34.02.01.04.1 | 120 | 1200 |
| 15 64 65 | Mesoft Vlies-Komresse 10x20cm, steril, Beutel à 5 Stk. | 34.02.01.04.1 | 120 | 1200 |
| 15 67 00 | Mesoft Vlies-Rundtupfer S, ø ca. 2,5cm, unsteril | 35.01.01.04.1 | 100 | 2200 |
| 15 67 60 | Mesoft Vlies-Rundtupfer S, ø ca. 2,5cm, steril Beutel à 5 Stk. | 35.01.01.20.1 | 100 | 2800 |
| 15 68 00 | Mesoft Vlies-Rundtupfer M, ø ca. 3,5cm, unsteril | 35.01.01.01.1 | 100 | 1300 |
| 15 68 60 | Mesoft Vlies-Rundtupfer M, ø ca. 3,5cm, steril Beutel à 5 Stk. | 35.01.01.20.1 | 100 | 1500 |
| 15 69 00 | Mesoft Vlies-Rundtupfer L, ø ca. 4,5cm, unsteril | 35.01.01.01.1 | 100 | 900 |
| 15 69 60 | Mesoft Vlies-Rundtupfer L, ø ca. 4,5 cm, steril Beutel à 5 Stk. | 35.01.01.20.1 | 70 | 1050 |

Notizen

Quellen:

1. Hunt, SD., Elg, F. Clinical effectiveness of hemoglobin spray (Granulox®) as adjunctive therapy in the treatment of chronic diabetic foot ulcers. November 2016.
2. Hunt, SD., Elg, F. Hemoglobin spray as adjunct therapy in complex wounds: Meta-analysis versus standard care alone in pooled data by wound type across three retrospective cohort controlled evaluations. *SAGE Open Medicine*, 2018; 6:1-9.
3. Hunt, SD., Elg, F. The clinical effectiveness of haemoglobin spray as adjunctive therapy in the treatment of chronic wounds. *Journal of Wound Care*, 2017; 26(9):558-568.
4. Hunt, S., Elg F., Percival S. Assessment of clinical effectiveness of haemoglobin spray as adjunctive therapy in the treatment of sloughy wounds. *Journal Wound Care*. 2018 Apr; 27(4): 210-219.
5. Brüggjenjürgen, B., Hunt, SD., Eberlein, T. Wound management in diabetic foot ulcer (DFU) – incremental cost-analysis of treating diabetic neuropathic foot lesions with adjunct hemoglobin contact spray in Germany. *Gesundh ökon Qual manag*, 2017; 22:1-8.
6. Mustafi, N. Let's see what happens: The therapeutic view beyond the horizon. Oral presentation at the the De Wu Deutscher Wundkongress, 2013, Bremen. Data on file.
7. Babadagi-Hardt, Z., Engels, P., Kanya, S. Wound management with compression therapy and topical hemoglobin solution in a patient with Budd-Chiari Syndrome. *Journal of Dermatological Case Reports*, 2014; 8(1):20-23.



Das aktualisierte Wundkonzept 2021 ist da!

Bestellen Sie unser kostenloses Wundkonzept per Mail an info.ch@molnlycke.com oder fragen Sie Ihren Mölnlycke-Ansprechpartner.

PROVING IT

EVERY DAY

Mölnlycke® liefert innovative Lösungen für das Wundmanagement, zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im OP und zur Vorbeugung von Dekubitus. Diese Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Alles, was wir tun, dient einem einzigen Zweck: Medizinische Fachkräfte in die Lage zu versetzen, ihr Bestes zu geben. Und wir sind bestrebt, dies täglich unter Beweis zu stellen.

Kundenservice:

Tel: 0800 / 563 195

Fax: 0800 / 563 197

E-Mail: csc.switzerland@molnlycke.com

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.ch oder folgen Sie uns auf LinkedIn

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz. Tel: +41 44 744 54 00, info.ch@molnlycke.com.

Die Namen Mölnlycke und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.

©2021 Mölnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten.

