



## Wundversorgung

Sortimentsübersicht  
Schweiz 2019/2020

  
Mölnlycke®

# Wichtige **Tipps und Tricks** für die Wundversorgung

- Nehmen Sie die Schmerzen des Patienten immer ernst
  - Klären Sie die Ursache für die Wunde
  - Jede Berührung der Wunde kann Schmerzen verursachen
  - Schonendes Ablösen der Wundauflage, ggf. durch Anfeuchten der Wundauflage
  - Unnötige Reize wie z.B. Zugluft oder Anstossen/Stechen der Wunde vermeiden
  - Dokumentieren Sie jeden Verbandwechsel und die Situation der Wunde
  - Beachten Sie die Richtlinien zur Infektionskontrolle
  - Verwenden Sie nur sterile Instrumente z.B. zum Zuschneiden der Materialien
  - Materialien, die Wundkontakt haben, müssen steril sein; einmal angebrochene Materialien finden beim nächsten Verbandwechsel keine Verwendung mehr; siehe ☒ auf der Verpackung
  - Reinigen Sie die Wunde stadiengerecht
  - Wundspüllösungen vor Gebrauch ggf. anwärmen
  - Entfernen Sie die Schutzfolie erst nach dem Zuschneiden
  - Wählen Sie einen Verband, der beim Verbandwechsel keine Schmerzen oder eine Traumatisierung der Wunde verursacht oder die Wundumgebungshaut verletzt
  - Folienverbände bei der Entfernung parallel zur Haut überdehnen
  - Wundfüller z.B. Alginat nicht stopfen
  - Verband spannungsfrei applizieren und darauf achten, dass es keine Einschnürungen durch zu festes Anlegen von fixierenden Binden gibt
  - Bedenken Sie die Fließrichtung des Exsudats beim Positionieren des Verbands
  - Keine einschnürende Kleidung tragen, z.B. Socken mit engen Bündchen, Miederhosen, Korsetts, da diese die Durchblutung stören
- Bitte beachten Sie immer die Packungsbeilage des jeweiligen Produktes.

# Inhalt

## SCHAUMVERBÄNDE

Mepilex XT .....	8
Mepilex / Heel .....	9
Mepilex Lite .....	10
Mepilex Transfer .....	11

## SCHAUMVERBÄNDE MIT HAFTRAND

Mepilex Border Flex .....	14
Mepilex Border .....	16
Mepilex Border Lite .....	17
Mepilex Border Post-Op .....	18

## ANTIMIKROBIELLE WUNDAUFLAGEN

Mepilex Ag .....	23
Mepilex Border Ag .....	24
Mepilex Transfer Ag .....	25

## WUNDDISTANZGITTER

Mepitel .....	28
Mepitel Film .....	29
Mepitel One .....	30

## FIXIERUNG & NARBENBEHANDLUNG

Mepitac .....	34
Mefix .....	34
Mepiform .....	35

## ALGINATE & FASERVERBÄNDE

Exufiber .....	38
Exufiber Ag+ .....	39
Melgisorb Plus .....	40
Melgisorb Ag .....	41

## ABSORBER & SUPERABSORBER

Mextra Superabsorbent .....	44
Mesorb .....	45

## DEKUBITUS BEHANDLUNG & PRÄVENTION

Mepilex Border Sacrum .....	48
Mepilex Border Heel .....	48

## SCHLAUCHBANDAGEN

Tubifast & Tubifast Garments .....	52
------------------------------------	----

## KONVENTIONELLE WUNDVERSORGUNG

Mepore Film&Pad .....	56
Mepore Pro .....	56
Mepore .....	57
Mepore IV .....	57
Mepore Film .....	58
Mepore FilmRoll .....	58
Steripod .....	59
Gauze .....	60
Mesoft .....	61

## ZUSCHNITTMUSTER

Produkte ohne Haftrand .....	62
Produkte mit Haftrand .....	63

### Legende:



### Hinweis:

Dies sind allgemeine Ratschläge zur Wundversorgung und haben keinerlei Anrecht auf Vollständigkeit.

Bitte beachten Sie ggf. Ihre lokalen Behandlungsrichtlinien!

Bitte beachten Sie die jeweiligen Gebrauchsanweisungen der Verbände!





## Proving it every day

Mölnlycke liefert innovative Produkte für das Wundmanagement, Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im OP und zur Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren. Diese Produkte und Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Alles was wir tun, dient einem einzigen Zweck: Medizinische Fachkräfte zu unterstützen, ihr Bestes zu geben, um somit eine bestmögliche Versorgung Ihrer Patienten zu gewährleisten. Und wir sind bestrebt, dies täglich unter Beweis zu stellen.



## Was wir tun

Unsere Lösungen ermöglichen eine bessere und effizientere Versorgung von Patienten an allen Standorten – vom Spital bis nach Hause:

### 1. Wundversorgung

Mit evidenzbasierten Wundversorgungslösungen (z.B. Verbände mit Safetac® Technologie)

### 2. Dekubitusprophylaxe

Wir reduzieren das Risiko von Dekubitalulzera mit prophylaktischen Verbänden und Hilfsmitteln, die medizinischen Fachkräften die Umlagerung von Patienten erleichtern, sowie durch unterstützende Schulungs- und Beratungsservices.

### 3. Chirurgische Lösungen

Wir erhöhen die Sicherheit und Effizienz im und rund um den OP mit massgeschneiderten Trays, die auch chirurgische Instrumente beinhalten. Zudem schützen wir Personal und Patienten durch Abdecktücher, OP-Kleidung, Antiseptika und OP-Handschuhe vor Infektionen und bieten entsprechende Fortbildungen und Fachberatung.



## Die Gesundheitsversorgung verbessern

Weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, beschränken wir uns nicht darauf, Produkte zu verkaufen. Wir unterstützen medizinische Fachkräfte auch dabei, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Daran anknüpfend, nutzen wir unser umfassendes Fachwissen, um passende Lösungen zu entwickeln, die zu besseren Ergebnissen führen.



## Innovation für die Zukunft

Angetrieben durch unser stetiges Streben nach Lösungen für unerfüllte Bedürfnisse in der Gesundheitsversorgung werden wir weiter Innovationen schaffen und hochwertige, kostengünstige Lösungen entwickeln, die neue Standards setzen. Wir werden auch weiterhin eng mit Branchenverbänden, Gesundheitsorganisationen und Regierungen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um an Gesundheitsvorschriften und Leitlinien mitzuwirken und die Therapiestandards zu erhöhen. Wir unterstützen alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen, von Pflegekräften und Ärzten über Krankenhausmanager und häusliche Pflegedienste bis hin zu Einkäufern dabei, die besten Ergebnisse zu erzielen.


## Die Safetac® Technologie – der entscheidende Unterschied

Die sanfte Safetac® Technologie passt sich auch den kleinsten Strukturen der Haut an, während die Kleber anderer Verbände nur Kontakt mit den obersten Hautzellen haben. So werden Schmerzen beim Verbandwechsel minimiert, die Wundränder wirksam geschützt und Mazerationen vorgebeugt.

### Herkömmlicher Kleber



Abziehen der obersten Hautschicht bei herkömmlichem Klebstoff

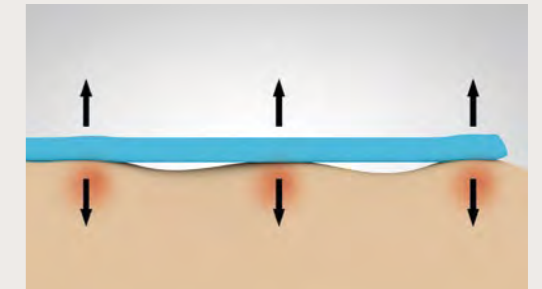


Herkömmliche Klebstoffe haften nur am oberen Rand der Hautporen und müssen deshalb eine stärkere Haftkraft aufweisen, damit der Verband sicher sitzt.

### Verbände mit Safetac® Technologie



Kein Abziehen der obersten Hautschicht bei der Safetac® Technologie

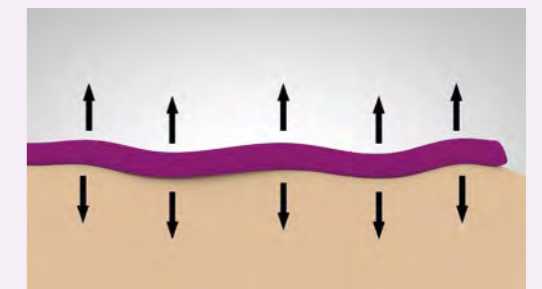

Safetac® passt sich an die Poren an und versiegelt so die Wundränder. Wundauflagen mit Safetac® haften sanft aber sicher.

## Nachweislich die beste Wahl für ein optimales Ergebnis.

Die von Mölnlycke Health Care entwickelte Safetac® Technologie bietet Vorteile, die weit über die üblichen Produktversprechen hinausgehen. Safetac optimiert nachweislich den Wundheilungsprozess und kann Wunden sogar vorbeugen. Verbände mit Safetac sind auf jeden Fall eine sichere Wahl für Patienten und Wegbereiter für einen neuen, hohen Standard im

Bereich der Wundversorgung. Uns liegen zahlreiche Belege dafür vor, die die klinischen und wirtschaftlichen Vorteile von Verbänden mit Safetac, darunter Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® und Mepitac® untermauern. Bereits heute haben unsere Verbände das Leben von Millionen Patienten weltweit erleichtert<sup>1-3</sup>.

\* Eine Technologie, die ausschließlich von Mölnlycke Health Care erhältlich ist.

**Safetac**  
TECHNOLOGY

Referenzen: 1. Davies, P., Rippon, M. Evidence review: the clinical benefits of Safetac technology in wound care. Journal of Wound Care 2008; Supplement:3-31. 2. Santamaria N, Gertz M, Liu W, Rakis S, Sage S, Ng AW, Tudor H, McCann J, Vassiliou T, Morrow F, Smith K, Knott J, Liew D. Clinical effectiveness of a silicone foam dressing for the prevention of heel pressure ulcers in critically ill patients: Border II Trial. Journal of Wound Care 2015; 24(8):340-345. 3. Santamaria N, Santamaria H. An estimate of the potential budget impact of using prophylactic dressings to prevent hospital-acquired PUs in Australia. Journal of Wound Care 2014; 23(11):583-589.





# Schaumverbände

---

- Mepilex XT
- Mepilex / Mepilex Heel
- Mepilex Lite
- Mepilex Transfer




# Mepilex® XT



## Innovativer Schaumverband für alle Wundphasen

Mepilex XT ist ein weicher Polyurethanschaum, der für leicht bis mittelstark exsudierende und chronische Wunden in allen Heilungsstadien vorgesehen ist.

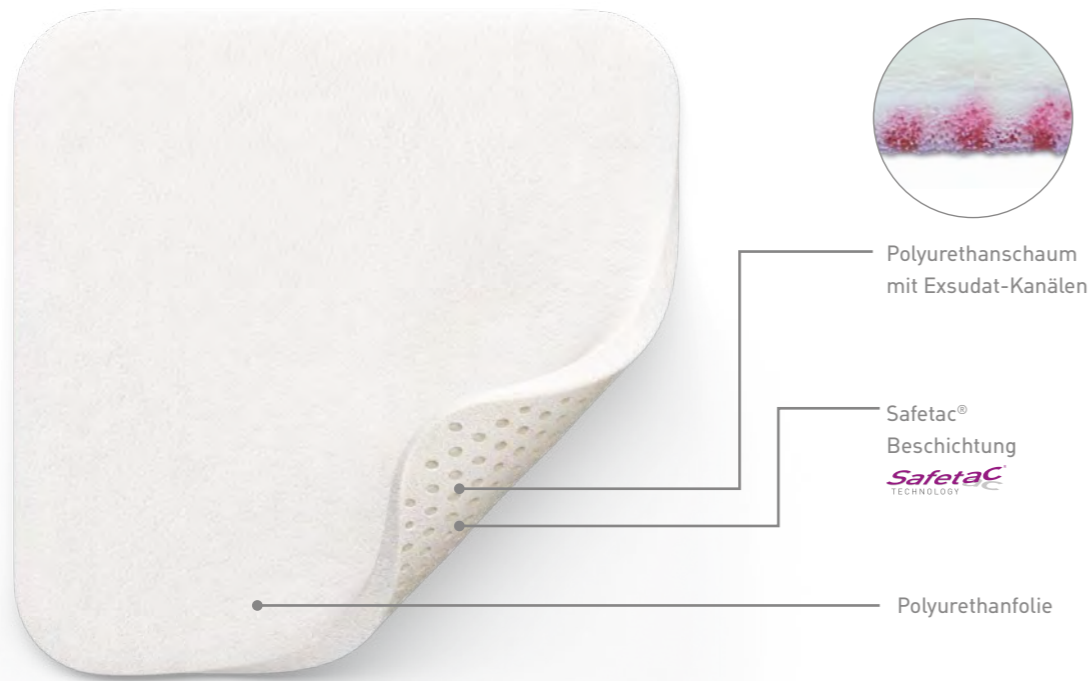

### Vorteile

- Absorbiert alle Arten von Exsudat, auch visköses Exsudat
- Effektiver Einsatz in allen Phasen der Wundheilung
- Reduzierung der Verbandwechsel
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- Leicht bis mittelstark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom, Dekubitus
- Verbrennungen bis Grad 2a

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
21 10 15	5 x 5 cm	35.05.03.01.1	6550380	5	40
21 11 00	10 x 10 cm	35.05.03.03.1	6202785	5	70
21 12 00	10 x 20 cm	35.05.03.04.1	6202791	5	45
21 13 00	15 x 15 cm	35.05.03.04.1	6863245	5	25
21 14 00	20 x 20 cm	35.05.03.06.1	6202822	5	20
21 15 00	20 x 50 cm	35.05.03.08.1	7186083	2	12

Steril – einzeln verpackt



Ergänzungsprodukt zur Fixierung:




Versorgung an schwierigen Körperstellen




Ulcus cruris arteriosum

# Mepilex®

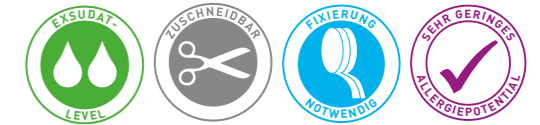

## Schaumverband

Mepilex ist ein weicher Polyurethanschaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht bis mittelstark exsudierender Wunden.

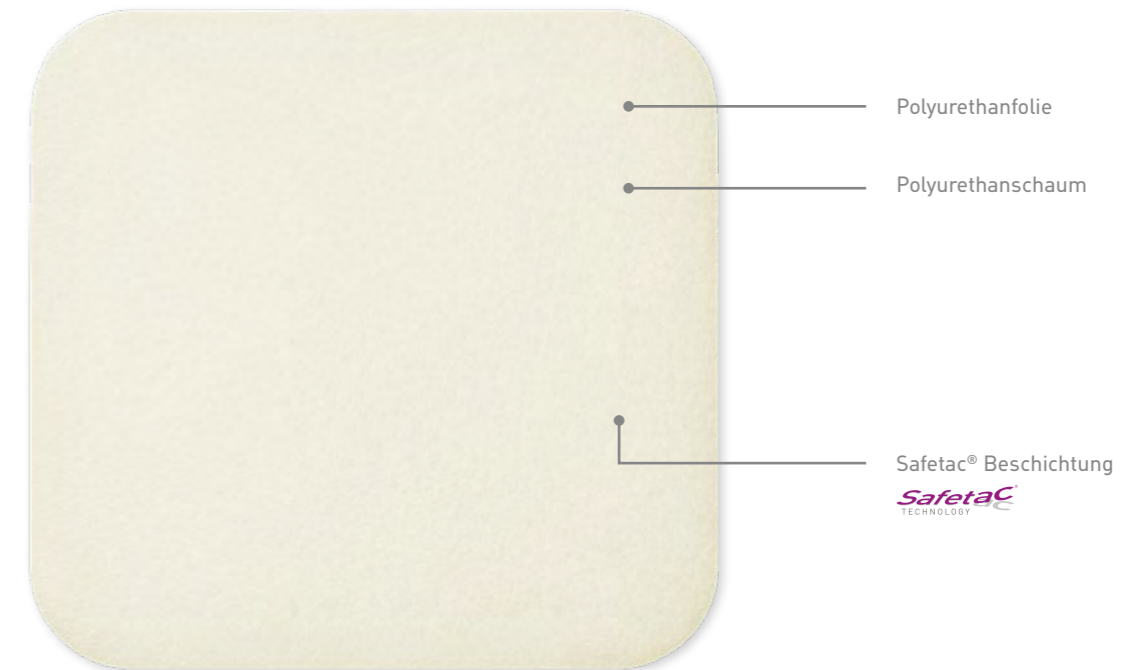

### Vorteile

- Absorbiert Exsudat schnell und zuverlässig
- Extrem weich und anpassungsfähig
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- Leicht bis mittelstark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom
- Verbrennungen bis Grad 2a

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
29 40 15	5 x 5 cm	35.05.03.01.1	5247047	5	40
29 41 50	10 x 12 cm	35.05.03.03.1	3466041	5	50
29 42 50	12 x 20 cm	35.05.03.04.1	3466058	5	50
29 43 50	15 x 17 cm	35.05.03.04.1	3466064	5	25
29 44 50	20 x 22 cm	35.05.03.06.1	3466087	5	20

### Mepilex Heel

28 81 00	13 x 20 cm	35.05.03.11.1	3296596	5	25
----------	------------	---------------	---------	---	----

Steril – einzeln verpackt



Ergänzungsprodukt zur Fixierung:



Mepilex Heel – speziell für die Ferse




Ulcus cruris mixtum

# Mepilex® Lite



## Dünnere Schaumverband

Mepilex Lite ist ein dünner Polyurethanschaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht exsudierender Wunden. Der Verband ist äusserst flexibel sowie anpassungsfähig und eignet sich auch zur Versorgung geschädigter und zum Schutz gefährdeter Haut.

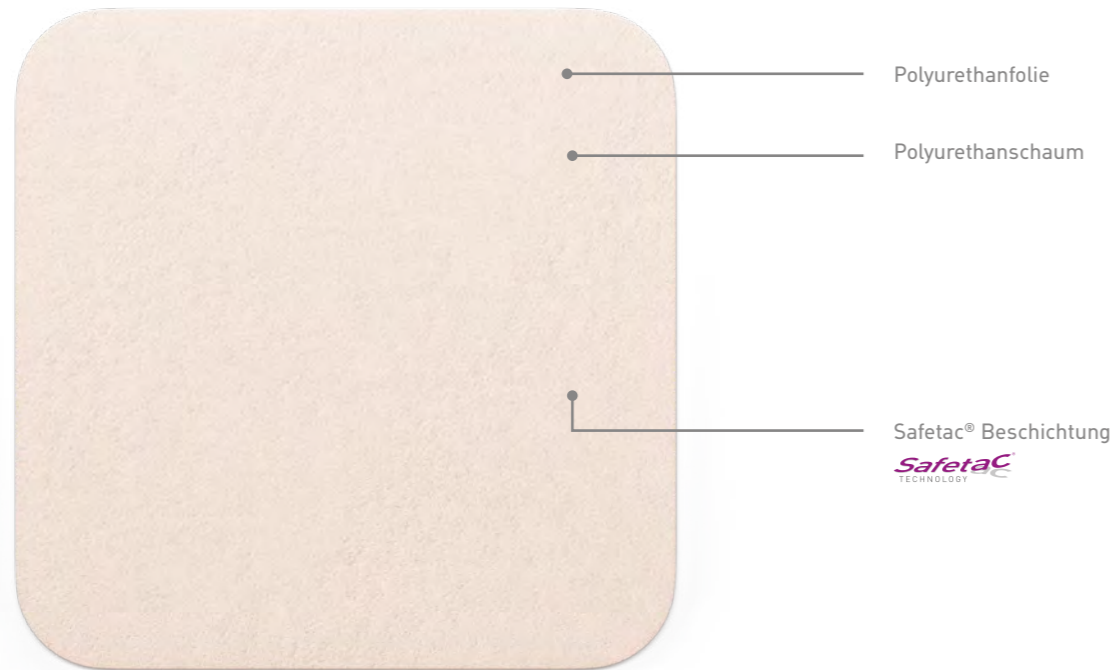

### Vorteile

- Extrem weich und anpassungsfähig
- Tragen während der Strahlentherapie möglich
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- Leicht exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z.B. diabetisches Fussyndrom
- Strahleninduzierte Hautschäden
- Hautschutz

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
28 40 00	6 x 8,5 cm	35.05.03.02.1	2754714	5	70
28 41 00	10 x 10 cm	35.05.03.03.1	2754720	5	50
28 43 00	15 x 15 cm	35.05.03.04.1	2754737	5	50
28 45 00	20 x 50 cm	35.05.03.08.1	5548122	4	24


Steril – einzeln verpackt

# Mepilex® Transfer



## Drainagefähiger Schaumverband

Mepilex Transfer ist ein dünner, durchlässiger Polyurethanschaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht bis sehr stark exsudierender Wunden. Der Verband leitet Exsudat zuverlässig in einen Sekundärverband weiter. Er dient insbesondere zum Abdecken grosser Haut- und Wunddefekte.

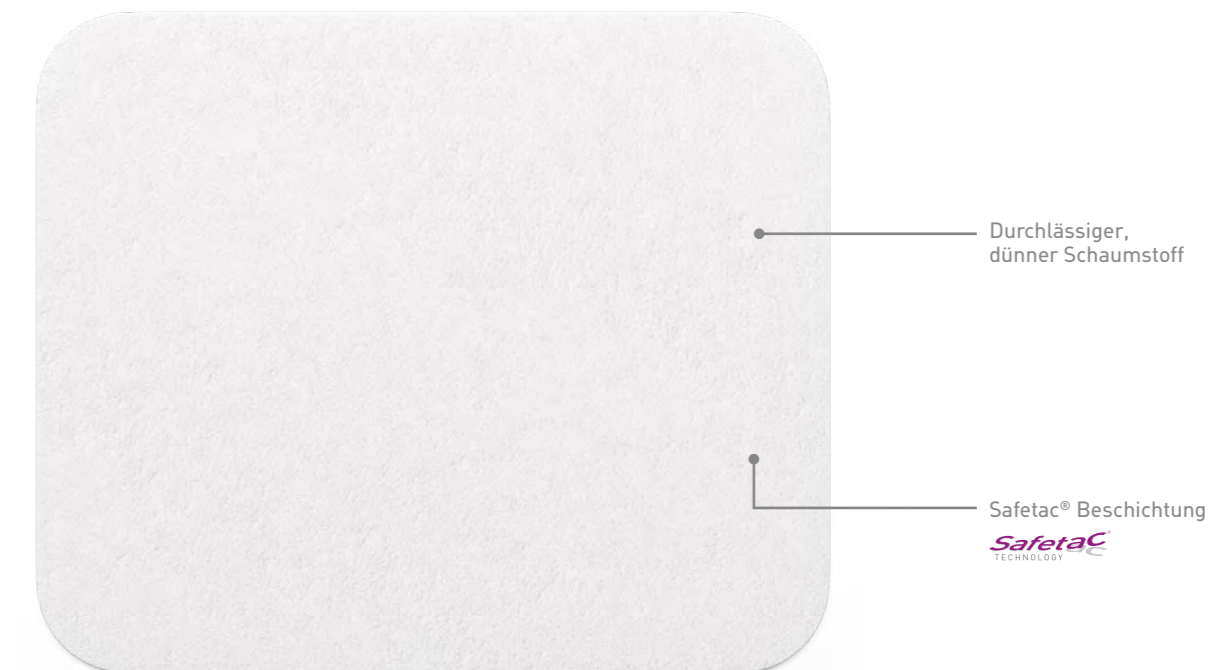

### Vorteile

- Hohe Wirtschaftlichkeit besonders bei stark exsudierenden Wunden
- Bei unterschiedlichen Exsudatmengen einsetzbar
- Äusserst flexibel und anpassungsfähig
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- Leicht bis sehr stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Gamaschenulcera
- Tumorwunden / exulzierende Tumore
- Strahleninduzierte Hautschäden
- Verbrennungen bis Grad 2a
- Epidermolysis Bullosa

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
29 47 00	10 x 12 cm	35.05.03.03.1	3516827	5	50
29 48 00	15 x 20 cm	35.05.03.05.1	2619301	5	40
29 45 02	20 x 50 cm	35.05.03.08.1	5539778	4	24

Steril – einzeln verpackt

**+**

Ergänzungsprodukt zur Fixierung:

**Tubifast®**  
WITH  
**2-WAY STRETCH®**  
TECHNOLOGY




Diabetisches Fussgeschwür



Mepilex Lite – zugeschnitten für die Zehen

**+**

Ergänzungsprodukt zur Fixierung:

**Tubifast®**  
WITH  
**2-WAY STRETCH®**  
TECHNOLOGY



**+**

Ergänzungsprodukt zur Exsudataufnahme

**Mextra®**  
Superabsorbent







# Schaumverbände mit Haftrand

---

- Mepilex Border Flex
- Mepilex Border
- Mepilex Border Lite
- Mepilex Border Post-Op




# Mepilex® Border Flex



## Flexibler Schaumverband mit Hafrand für mehr Möglichkeiten und weniger Kosten.

Mepilex Border Flex haftet dank der Flex Technologie zuverlässiger als andere Verbände, auch bei stärkeren Bewegungen. Dies und die hohe Aufnahmekapazität – von normalen und zähflüssigem Exsudat, sorgen dafür, dass der Verband länger getragen werden kann. Gleichzeitig sorgt die besondere Konstruktion für eine effektive Reduzierung der Bakterienanzahl in der Wunde.

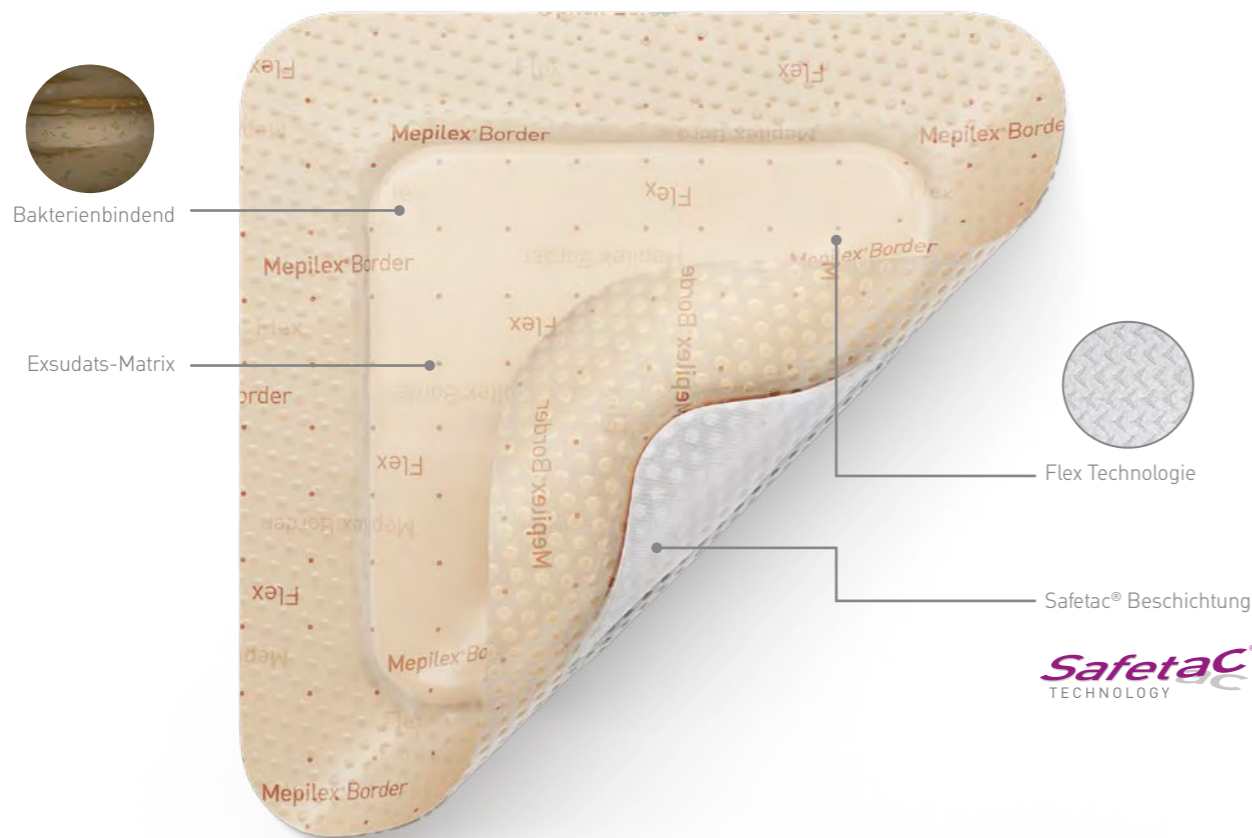

### Vorteile

- Flexibilität sorgt für eine sichere und lange Haftung
- Schnelle und sichere Aufnahme aller Exsudatarten – auch visköses Exsudat
- Schnelle Aufnahme, Weiterleitung und sicherer Einschluss von Bakterien, für eine effektive Reduzierung der Bakterienlast in der Wunde. Ganz ohne Wirkstoffe.
- Optimale Anpassungsfähigkeit und verschiedene Formen für hohen Patientenkomfort

### Anwendungsgebiete

- Mittelstark bis sehr stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom, Ablederungen
- Traumatische Wunden

## Beispiele für Anwendungsgebiete



Blutschwamm am Übergang von Oberschenkel zum Po

Optimale Anpassung und Haftung von Mepilex Border Flex

Oberschenkelamputation

Versorgung mit Mepilex Border Flex

Mepilex Border Flex Oval für besonders schwierige Körperteilen



### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Grösse Wundkissen	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
59 52 00	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	35.05.04.02.1	7238561	5	50
59 53 00	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	35.05.04.03.1	7238578	5	50
59 50 00	12,5 x 12,5 cm	8,5 x 8,5 cm	35.05.04.03.1	7316798	5	50
59 54 00	15 x 15 cm	11 x 11 cm	35.05.04.04.1	7238584	5	50
59 56 00	15 x 20 cm	11 x 16 cm	35.05.04.05.1	7238590	5	50
28 35 70	7,8 x 10 cm	3,5 x 5,5 cm	35.05.03.02.1	6404081	5	50
28 33 00	13 x 16 cm	9 x 12 cm	35.05.03.04.1	6863274	5	35
28 34 00	15 x 19 cm	11,2 x 15,2 cm	35.05.03.05.1	6006512	5	45

oval

Steril – einzeln verpackt




# Mepilex® Border



## Selbsthaftender, hochabsorbierender Schaumverband

Mepilex Border ist ein selbsthaftender, hochabsorbierender Polyurethanschaumverband zur Versorgung mittel bis sehr stark exsudierender Wunden. Der integrierte Superabsorber verhindert, auch unter Kompression, ein Auslaufen und eine Rücknässung des Verbandes. Der Hafttrand mit Safetac Technologie sorgt für die schonende und dennoch sichere Fixierung, ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel und schützt das wundumgebende Gewebe vor Schädigung und Mazeration.

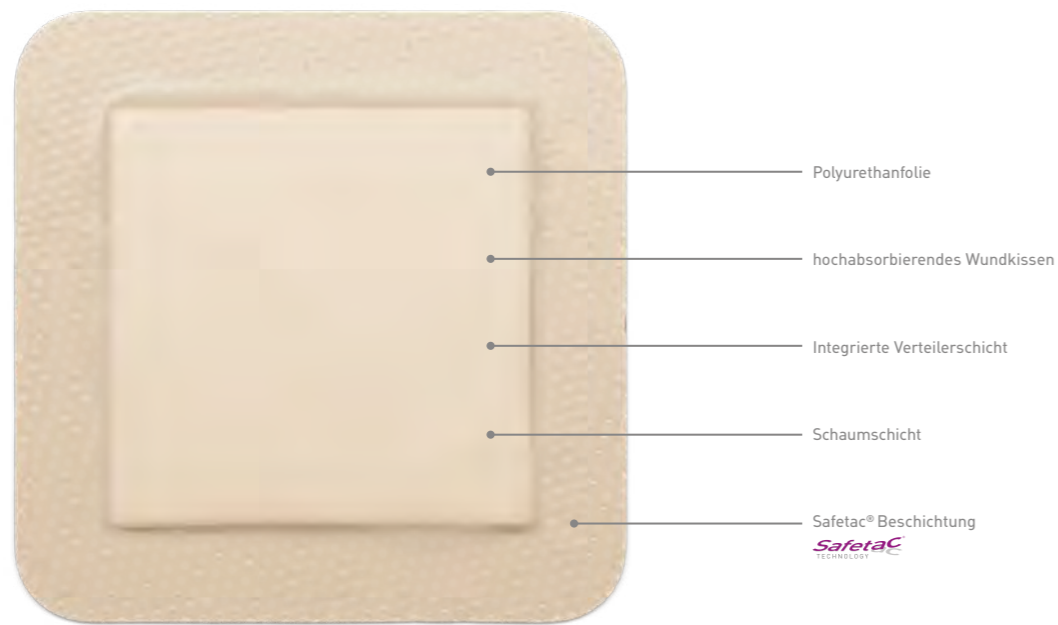

### Vorteile

- Sehr hohes Absorptionsvermögen durch Superabsorber für längere Verbandwechselintervalle und Kosteneffizienz
- Hält Exsudat sicher im Verband – auch unter Druck
- Atraumatischer und schmerzloser Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- Mittelstark bis sehr stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom
- Traumatische Wunden
- Dekubitusprophylaxe

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Grösse Wundkissen	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
29 52 00	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	35.05.03.02.1	2341484	5	70
29 53 00	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	35.05.03.03.1	2341490	5	50
29 54 00	15 x 15 cm	11 x 11 cm	35.05.03.04.1	2341509	5	50
29 56 00	15 x 20 cm	11 x 16 cm	35.05.03.05.1	2341538	5	45
29 58 00	10 x 20 cm	6 x 16 cm	35.05.03.04.1	6863297	5	35

Steril - einzeln verpackt




**!**  
Mepilex Border ist ab Ende 2019 nicht mehr erhältlich.  
Ersatz:  
Mepilex Border Flex (Seite 14)

# Mepilex® Border Lite



## Dünnere, selbsthaftender Schaumverband

Mepilex Border Lite ist ein dünner, selbsthaftender Polyurethanschaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht exsudierender Wunden. Der Hafttrand mit Safetac Technologie sorgt für die schonende und dennoch sichere Fixierung, ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel und schützt das wundumgebende Gewebe vor Schädigung und Mazeration.

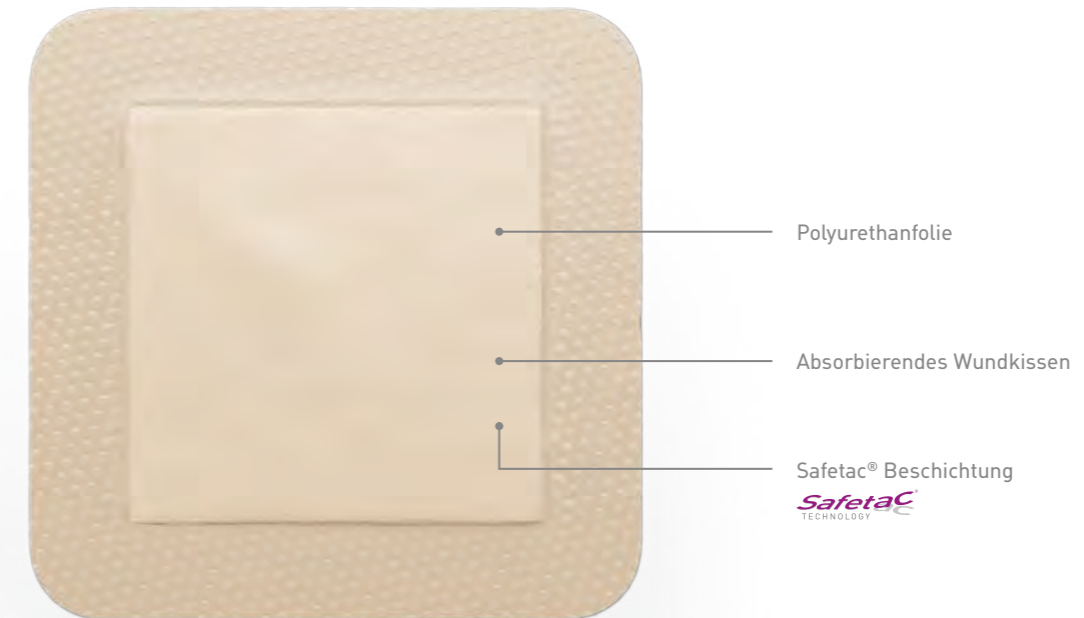

### Vorteile

- flexibler Einsatz durch umfangreiches Grössensortiment
- gute Haftung für eine sichere Anwendung
- atraumatischer und schmerzloser Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- nicht bis leicht exsudierende Wunden
- chronische Wunden, z.B. diabetisches Fussyndrom
- traumatische Wunden, z.B. Schnitt- und Schürfwunden
- epithelisierende Wunden

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Grösse Wundkissen	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
28 10 00	4 x 5 cm	2 x 3 cm	35.05.03.01.1	3034436	10	70
28 11 00	5 x 12,5 cm	2,5 x 8,5 cm	35.05.03.02.1	3034442	5	65
28 12 00	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	35.05.03.02.1	3034459	5	70
28 13 00	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	35.05.03.03.1	3034465	5	50
28 15 00	15 x 15 cm	11 x 11 cm	35.05.03.04.1	3034471	5	50


Steril - einzeln verpackt



# Mepilex® Border Post-Op

## Selbstaftender, flexibler Komplettverband für chirurgische Wunden

Mepilex Border Post-Op ist ein Komplettverband für chirurgische Wunden, der Exsudat sehr effektiv absorbiert und zurückhält. Der Verband minimiert die Bildung von Spannungsblasen und verhindert Schmerzen und Trauma beim Verbandwechsel.

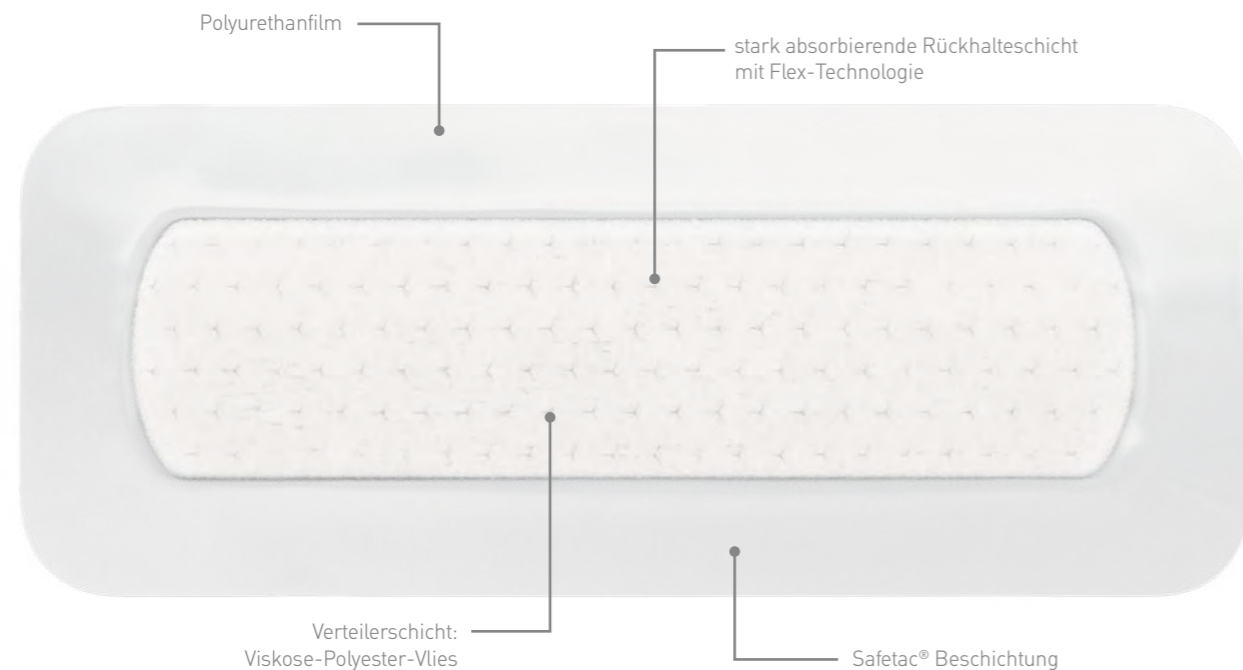

### Vorteile

- Überlegenes Exsudatmanagement dank Superabsorber-Fasern für längere Tragezeiten und weniger Verbandwechsel
- Einzigartiges flexibles Flex-Cut Wundkissen, in alle Richtungen dehnbar
- Duschfeste und atmungsaktive Aussenfolie
- Atraumatischer und schmerzloser Verbandwechsel
- Reduziert Spannungsblasen und Folgekosten deutlich

### Anwendungsgebiete

- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Chirurgische Wunden, wie z.B. Hüft- und Knie-Operationen

## Beispiele für Anwendungsgebiete



Mepilex® Border Post-Op am Knie



chirurgische Wunde

## Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Grösse Wundkissen	Absorption	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
49 61 00	6 x 8 cm	3 x 5 cm	Mittel-hoch	35.05.03.02.1	7073203	10	80
49 62 00	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm	Mittel-hoch	35.05.03.03.1	7073226	10	70
49 63 00	10 x 15 cm	4,5 x 10 cm	Mittel-hoch	35.05.03.03.1	7073232	10	100
49 64 00	10 x 20 cm	4,5 x 14,5 cm	Hoch	35.05.03.04.1	7073249	10	120
49 64 50	10 x 25 cm	4,5 x 19,5 cm	Hoch	35.05.03.04.1	7073255	10	60
49 66 00	10 x 30 cm	4,5 x 24 cm	Hoch	35.05.03.05.1	7073261	10	40
49 66 50	10 x 35 cm	4,5 x 29 cm	Hoch	35.05.03.05.1	7073278	5	55

Steril – einzeln verpackt

## Zwei randomisierte Studien Eine prospektive Studie Eine Beobachtungsstudie

Vier unabhängige Studien kamen zu dem Ergebnis, dass Patienten, die mit Mepilex Border Post-Op behandelt wurden, **keine Anzeichen von Blasenbildung oder Hautschäden zeigten.**



**Lassen Sie sich von unseren Schweizer Referenzen vom Mepilex Border Post-Op überzeugen.**

Bestellen Sie die kostenlosen Referenzbrochure per Mail via [info.ch@molnlycke.com](mailto:info.ch@molnlycke.com) oder bei Ihrem Mölnlycke Ansprechpartner.





# Antimikrobielle Wundauflagen

---

- Mepilex Ag
- Mepilex Border Ag
- Mepilex Transfer Ag



# Wundklassifikation nach Bakteriologie

## Kontamination

Bakterielles Gleichgewicht, Kontrolle auf Wirtseite, Nachweis einzelner nicht proliferierender Keime.

## Kolonisation

Bakterielles Gleichgewicht, Kontrolle auf Wirtseite, Nachweis einer Keimvermehrung

## Kritische Kolonisation

Bakterielles Ungleichgewicht, zunehmende Kontrolle durch Keime, steigende Keimbelastung ohne typische Entzündungszeichen

## Infektion

Bakterielles Ungleichgewicht, Kontrolle auf Keimseite

## Wundinfektion

Eine Lokalfektion liegt vor, wenn Bakterien in tiefere Gewebeschichten eingedrungen


## Klinische Zeichen einer kritischen Kolonisation

- Stagnation der Wundheilung
- seröses Wundexsudat
- kein oder minderwertiges Granulationsgewebe
- mögliche Verfärbung der Wunde im Vergleich zu vorhergehenden Untersuchungen.

Zur Therapie kritisch kolonisierter Wunden sollen topische Behandlungsformen angewendet werden, welche die bakterielle Belastung reduzieren, Exsudat aufnehmen, halten und die Qualität des Granulationsgewebes verbessern. (Hess&Kirsner 2003)

**!** Der Nachweis von Keimen durch einen oberflächlichen Abstrich ist nicht automatisch mit einer Infektion gleichzusetzen.

## Microbielles Kontinuum von Phil Bowler

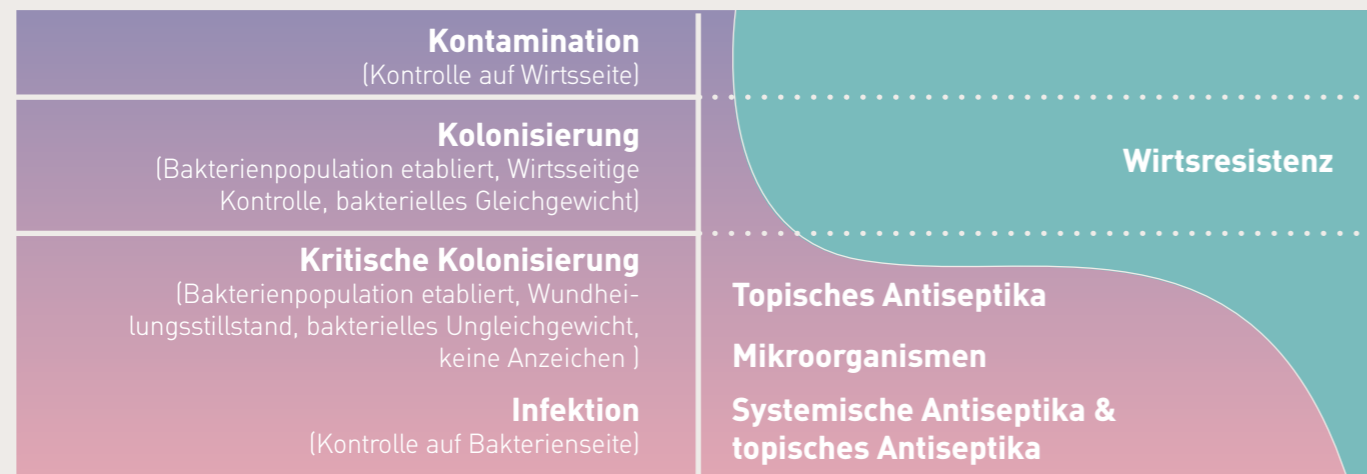

# Mepilex® Ag



## Antimikrobieller Schaumverband mit Silber

Mepilex Ag ist ein antimikrobieller Polyurethanschaumverband mit Silbersulfat, zur Versorgung kritisch kolonisierter und infizierter, oberflächlicher Wunden. Sobald der Verband mit dem Exsudat in Berührung kommt, werden Silberionen freigesetzt, die wundspezifische Erreger innerhalb von 30 Minuten bis zu 7 Tage effektiv inaktivieren.



## Vorteile

- Verträgliche und verordnungsfähige Silberverbindungen (Silbersulfat)
- Schnelle (30 Min.) und lang anhaltende (bis 7 Tage) antimikrobielle Wirkung
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

## Anwendungsgebiete

- Mittelstark exsudierende Wunden
- Infizierte Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom
- Verbrennungen bis Grad 2a

## Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
28 70 21	6 x 8,5 cm	3686564	5	35
28 71 10	10 x 10 cm	3516750	5	70
28 72 10	10 x 20 cm	3516767	5	45
28 73 10	15 x 15 cm	6863251	5	35
28 74 10	20 x 20 cm	3516796	5	25
28 75 10	20 x 50 cm	3984066	2	12

Steril – einzeln verpackt





# Mepilex® Border Ag



## Selbsthaftender, hochabsorbierender, antimikrobieller Schaumverband

Mepilex Border Ag ist ein selbsthaftender, hochabsorbierender Kompletverband mit Silbersulfat zur Versorgung kritisch kolonisierter und infizierter oberflächlicher Wunden. Mepilex Border Ag inaktiviert wundspezifische Erreger innerhalb von 30 Minuten und bis zu 7 Tage. Durch die Reduzierung der Mikroorganismen reduziert Mepilex Border Ag automatisch den Geruch. Der integrierte Superabsorber verhindert auch unter Kompression ein Auslaufen und eine Rücknässung des Verbandes.



### Vorteile

- Verträgliche und verordnungsfähige Silberverbindungen (Silbersulfat)
- Schnelle (30 Min.) und lang anhaltende (bis 7 Tage) antimikrobielle Wirkung
- Sehr hohes Absorptionsvermögen durch integrierten Superabsorber für längere Verbandwechselintervalle und Kosteneffizienz
- Atraumatischer und schmerzloser Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Infizierte Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko
- Verbrennungen bis Grad 2a
- Chronische Wunden, wie z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Grösse Wundkissen	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
39 52 00	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	4677277	5	70
39 53 00	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	4677283	5	50
39 54 00	15 x 15 cm	11 x 11 cm	4677231	5	50

### Mepilex Border Sacrum Ag


38 20 00	18 x 18 cm	120 cm <sup>2</sup>	4677225	5	40
----------	------------	---------------------	---------	---	----

Steril – einzeln verpackt




Mepilex® Border Sacrum Ag  
Spezialform für den Sakralbereich

# Mepilex® Transfer Ag

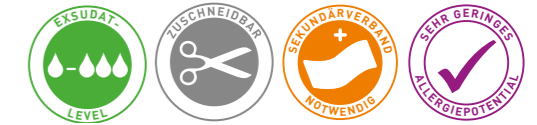

## Drainagefähiger, antimikrobieller Schaumverband mit Silber

Versorgung von kritisch kolonisierten und infizierten Wunden, die leicht bis stark exsudieren. Sobald der Verband mit Exsudat in Kontakt kommt, werden Silberionen freigesetzt, die wundspezifische Erreger innerhalb von 30 Minuten effektiv inaktivieren. Das Exsudat wird in den Sekundärverband weitergeleitet.

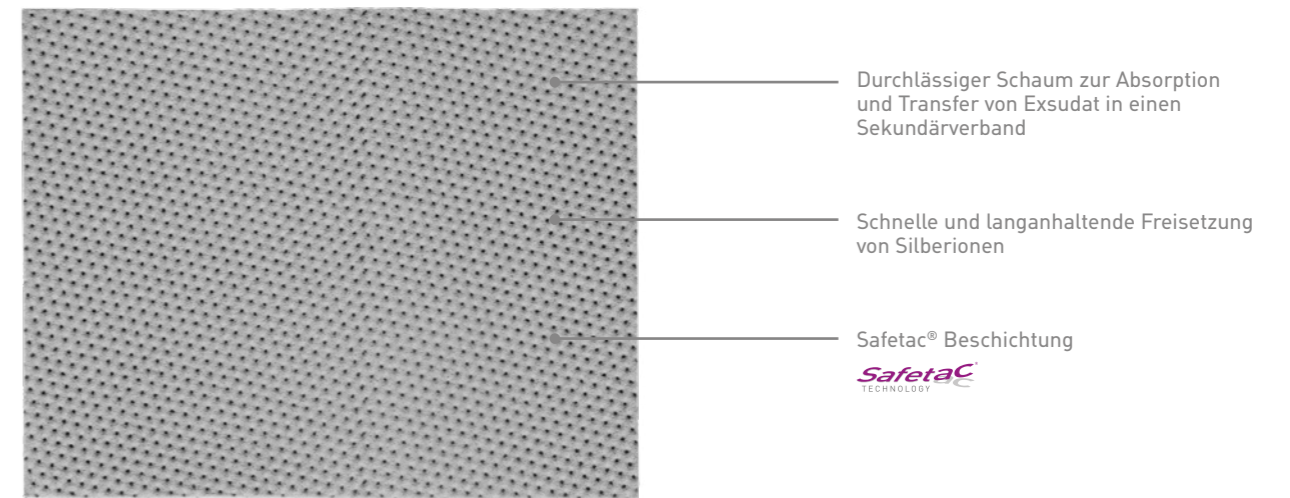

### Vorteile

- Verträgliche und verordnungsfähige Silberverbindungen (Silbersulfat)
- Schnelle (30 Min.) und lang anhaltende (bis 14 Tage) antimikrobielle Wirkung
- Atraumatischer und schmerzloser Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- Leicht bis sehr stark exsudierende Wunden
- Infizierte Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko
- Verbrennungen bis Grad 2a
- Chronische Wunden, wie z.B. diabetisches Fussyndrom, Ulcus cruris, Dekubitus
- Hautentnahmestellen
- Exulzierende Tumorwunden

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
39 40 00	7,5 x 8,5 cm	5602382	10	70
39 41 00	10 x 12,5 cm	5602399	5	50
39 48 00	15 x 20 cm	5602413	10	50
39 45 00	20 x 50 cm	5602407	2	12

Steril – einzeln verpackt



Ergänzungsprodukt zur Fixierung:

**Tubifast®**  
WITH  
**2-WAY STRETCH®**  
TECHNOLOGY



Ergänzungsprodukt zur  
Exsudataufnahme

**Mextra® Superabsorbent**







# Wunddistanzgitter & Folienverbände

---


- Mepitel
- Mepitel Film
- Mepitel One





## Beidseitig haftende Wundkontaktauflage

Mepitel mit Safetac Technologie ist das weltweit erste moderne Wunddistanzgitter seiner Art. Dank Safetac steht Mepitel für ungestörte Wundruhe und kosteneffiziente Versorgung.

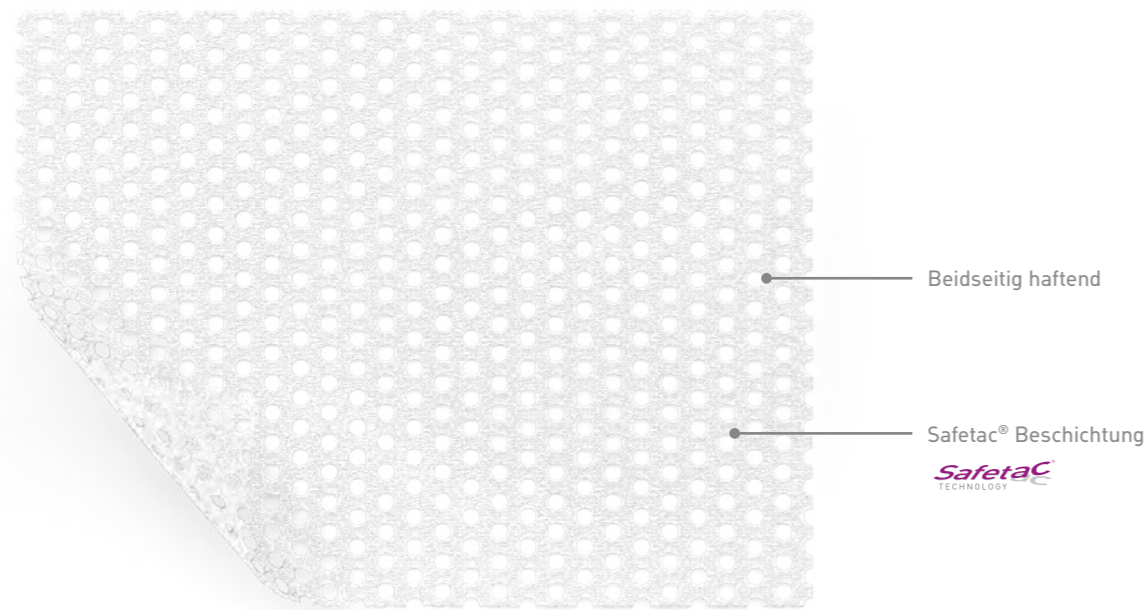

Beidseitig haftend

Safetac® Beschichtung  
Safetac TECHNOLOGY

## Bis zu 14 Tage ungestörte Wundheilung und weniger Schmerzen beim Verbandwechsel

### Vorteile von Mepitel

- Für nicht bis stark exsudierende Wunden
- Auf freiliegenden Strukturen (Sehnen, Knochen, Muskeln) anwendbar
- Kein Verrutschen von Primär- und Deckverband

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
29 05 00	5 x 7 cm	35.05.08.01.1	6855837	5	25
29 07 00	8 x 10 cm	35.05.08.02.1	6863280	5	50
29 10 00	12 x 15 cm	35.05.08.03.1	3628294	5	60
29 20 30	20 x 32 cm	35.05.08.05.1	3628302	5	30

Steril – einzeln verpackt

## Klinische Evidenz – für mehr Sicherheit!



## Hautschützender Folienverband

Mepitel Film ist ein sanfter, transparenter, atmungsaktiver Folienverband mit Safetac Technologie. Er kann als sanfter Hautschutz im Bereich von reibungs-, scherkraft- und mazerationsgefährdeten Körperstellen oder für die Versorgung oberflächlicher Wunden angewendet werden.



Applikationsrahmen für einfache Anwendung

Transparenter, duschfester, elastischer Polyurethan-Film, MVTR: 904gr/qm/24h

Safetac® Beschichtung  
Safetac TECHNOLOGY

### Vorteile von Mepitel Film

- Sichere und einfache Anwendung dank des Applikationsrahmens
- Rückstandsloses Entfernen
- Hautähnliches Gefühl
- Atraumatischer und schmerzloser Verbandwechsel
- 

### Anwendungsgebiete

- Nicht exsudierende Wunden
- Dekubitus Kategorie 1 & 2
- Hautschutz bei empfindlicher Haut und im Bereich von reibungs-, scherkraft- und mazerationsgefährdeten Körperstellen
- „Lande-Zone“ für Fixierung von medizinischen Produkten
- Prävention von strahleninduzierten Hautschäden

### Bestellinformationen


Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
29 61 70	6 x 7 cm	35.05.10.20.1	5153636	10	50
29 62 70	10 x 12 cm	35.05.10.22.1	5153642	10	70
29 64 70	10 x 25 cm	35.05.10.23.1	5153659	10	50
29 66 70	15 x 20 cm	35.05.10.24.1	5153665	10	70

Steril – einzeln verpackt

### Beispiele für Anwendungsgebiete



Mepitel Film auf chirurgischer Wunde

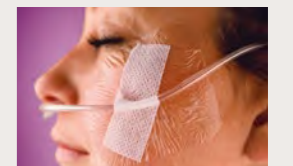

„Lande-Zone“ zum Schutz von gesunder Haut unter Zu- und Ableitungen



Pergament-Haut



Mepitel Film zur Fixierung von Primärverbänden



# Mepitel® One



## Einseitig haftende Wundkontaktauflage

Die innovative Weiterentwicklung von Mepitel - das einseitig haftende Mepitel One gewährleistet eine sehr hohe Transparenz und eine besonders einfache Handhabung.



## Bis zu 14 Tage ungestörte Wundheilung und weniger Schmerzen beim Verbandwechsel

### Vorteile von Mepitel One

- Für nicht bis stark exsudierende Wunden
- Allein oder in Kombination mit einem Deckverband
- Besonders einfache Applikation



Mepitel One auf Verbrennungen



Sehr guter Exsudattransfer möglich dank offener Netzstruktur



Wundbegutachtung ohne Verbandwechsel möglich

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Größe	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
28 90 00	5 x 7 cm	35.05.08.01.1	4379485	5	70
28 92 00	8 x 10 cm	35.05.08.02.1	4379491	5	50
28 94 00	12 x 15 cm	35.05.08.03.1	4379516	5	50
28 96 50	18 x 27,5 cm	35.05.08.04.1	4379522	5	40

Steril – einzeln verpackt

# Die Anwendung von Mepitel® One bei Hautrissen



1. Blutung kontrollieren und bei Bedarf debridieren.



2. Richten Sie die Hautklappe so gut wie möglich wieder aus.



3. Nach der Neuausrichtung der Hautklappe Mepitel One auftragen (auf allen Seiten einen Abstand von 2-3 cm einhalten).



4. Tragen Sie das sekundäre Absorptionskissen auf, z.B. einen Vlies-Tupfer.



5. Tragen Sie Mepitel Film auf, um das Saugkissen zu befestigen und eine Barriere gegen Verunreinigungen und Flüssigkeiten zu bilden.



Ihre Nummer Eins für ungestörte Heilung





# Fixierung & Narbenbehandlung


- Mepitac
- Mefix
- Mepiform



# Mepitac®

## Fixierverband

Mepitac ist die ideale und schonende Fixiermöglichkeit für Patienten mit empfindlicher und fragiler Haut.

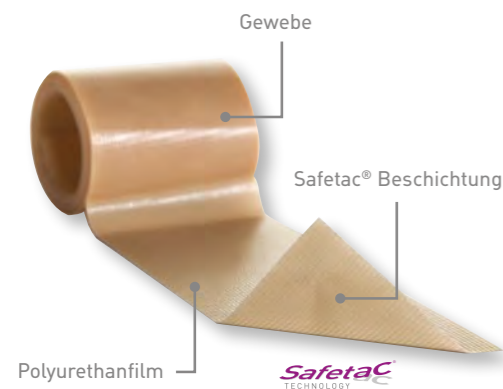

### Beispiele für Anwendungsgebiete



### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
29 83 00	2 x 300 cm	34.40.02.01.1	2910982	1	12
29 84 00	4 x 150 cm	34.40.02.01.1	2911007	1	12

Unsteril – auf Rolle

### Anwendungsgebiete

- Fixierung von z.B. Schläuchen, Verbänden, Sonden, Elektroden, IV Kanülen

### Vorteile

- Rückstandsfreies Entfernen
- Sehr geringes Allergiepotehtial, atmungsaktiv und wasserabweisend
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

# Mefix®

## Fixiervlies

Luftdurchlässiges und querdehnbares Vlies zur Fixierung von Verbänden und /oder medizinischen Produkten. Der Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis gewährleistet eine schonende Anwendung.



### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
31 02 50	2,5 cm x 10 m	34.40.04.01.1	7419469	1	39
31 05 00	5 cm x 10 m	34.40.04.02.1		1	20
31 10 00	10 cm x 10 m	34.40.04.03.1		1	20
31 15 00	15 cm x 10 m	34.40.04.04.1		1	20
31 20 00	20 cm x 10 m	34.40.04.05.1		1	10
31 30 00	30 cm x 10 m	34.40.04.06.1		1	10

Unsteril – auf Rolle

### Anwendungsgebiete

- Fixierung von Verbänden, Kompressen, Kathetern und Kanülen
- Ideal für den Nacken, Ellenbogen und Kniebereich

### Vorteile

- Schonende Anwendung dank hautfreundlichem Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis

# Mepiform®

## Selbstaftender Verband zur Narbenbehandlung

Mepiform ist ein dünner und komfortabler Verband mit Safetac Technologie, der zur Behandlung von alten und frischen hypertrophen Narben und Keloiden geeignet ist.



### Vorteile

- Dünn und diskret
- Einfache Anwendung
- Nachgewiesene Wirksamkeit, klinisch getestet
- Für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- Geschlossene, saubere Wunden nach Entfernung von Nahtmaterial
- Reduzierung von alten und frischen, hypertrophen Narben und Keloiden
- Zur Narbenvorbeugung
- Muss fortwährend und kontinuierlich getragen werden
- UV-Schutz Faktork 5

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
29 36 00	4 x 30 cm	3780079	5	50
29 37 00	5 x 7,5 cm	6982151	5	25
29 38 00	10 x 18 cm	7050685	5	35

einzelverpackt

### Beispiele für Anwendungsgebiete







# Faserverbände & Alginate

---

- Exufiber
- Exufiber Ag+
- Melgisorb Plus
- Melgisorb Ag




# Exufiber® & Exufiber® Ag+



## Gelbildender Faserverband

Exufiber ist ein gelbildender Faserverband mit patentierter Hydrolock®-Technologie und besteht aus hoch absorbierenden Polyvinylalkohol-Fasern (PVA). Exufiber ist für eine Vielzahl oberflächlicher und tiefer exsudierender Wunden geeignet. Für Absorption und Retention von Exsudat, Blut und Bakterien.

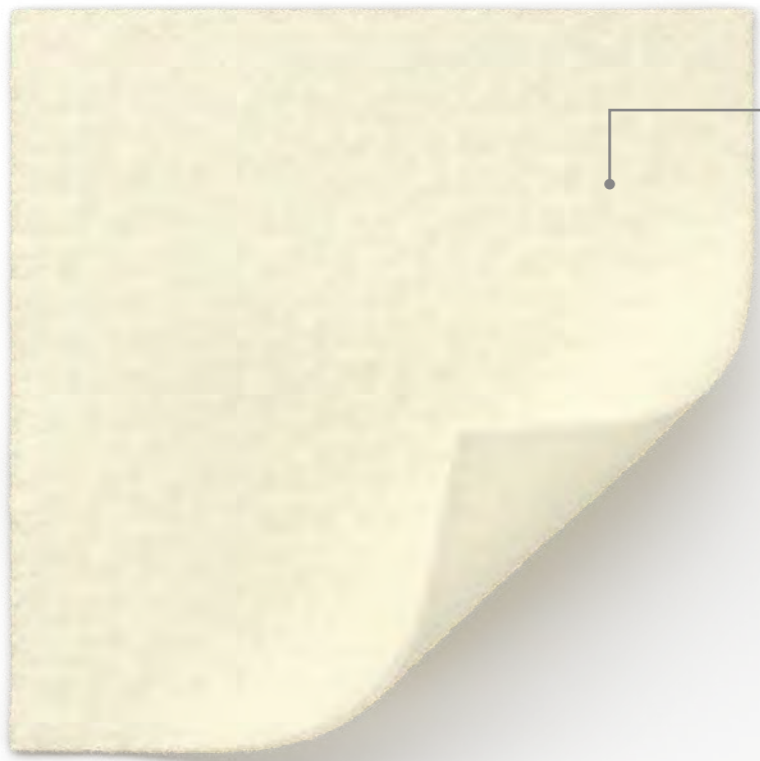

- PVA-Fasertechnologie
- Exzellente Nass-Reissfestigkeit
  - In Kontakt mit Exsudat gelbildend
  - Ausgezeichnete Retention

### Vorteile

- Überlegenes Rückhaltevermögen
- Hohe Nassreissfestigkeit
- Hohe Absorption von Exsudat, Blut und Bakterien
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit

### Anwendungsgebiete

- Stark exsudierende Wunden
- Oberflächliche Wunden und Wundhöhlen
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Dekubitus, diabetisches Fussyndrom
- Chirurgische Wunden
- Hautentnahmestellen
- Palliative Wunden



**NEU**

**Exufiber ist jetzt noch weicher und passt sich damit noch besser an alle Wundtypen an.**

## Beispiele für Anwendungsgebiete



Dekubitus



Dekubitus mit Exufiber®



Ulcus cruris venosum

### Exufiber Ag+

Tötet ein breites Spektrum von Krankheitserregern, einschliesslich Vancomycin-resistenter Enterokokken (VRE) und MRSA (in vitro)

### Die patentierte Hydrolock® Technologie

Exufiber® besteht aus PVA-Vliesmaterial mit vielen mikroskopisch kleinen, superabsorbierenden Gelierfasern, die bei Kontakt mit Flüssigkeit aufquellen. Die hohe Dichte und enge Verflechtung der Hydrolock®-Fasern verhindern ein Fließen des Exsudats im Verband weitgehend. Dies ermöglicht eine aussergewöhnlich hohe Retention und minimiert das Risiko des Auslaufens und der Mazeration.

Durch die sichere Retention kann Exufiber® auch unter

Kompression angewendet werden. Die im Exudat enthaltenen Bakterien werden gebunden und gelangen nicht in das Wundbett zurück. Der Verband kann dadurch bis zu sieben Tage auf der Wunde und bis zu 14 Tagen auf Hautentnahmestellen verbleiben. Die ungestörte Heilung wird dadurch gefördert.

Die Struktur und Anordnung der Fasern verleihen Exufiber® eine exzellente Reissfestigkeit. Der Verband bleibt beim Entfernen intakt und hinterlässt keine Rückstände im Wundbett.

### Bestellinformationen

#### Exufiber®

Art.-Nr.	Grösse	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
709900	5 x 5	7689097	10	40
709901	10 x 10	7689105	10	80
709903	15 x 15	7689111	10	60
709906	4.5 x 20	7741863	10	50
709909	2 x 45	7689128	5	25

Steril – einzeln verpackt

#### Exufiber® Ag+

Art.-Nr.	Grösse	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
603401	5 x 5	7689134	10	40
603402	10 x 10	7689140	10	80
603403	15 x 15	7689157	10	60
603405	4.5 x 20	7741864	10	50
603400	2 x 45	7689163	5	25

Steril – einzeln verpackt




# Melgisorb® Plus



## Absorbierender Alginatverband

Hochabsorbierender Kalzium-Natrium-Alginatverband zur Versorgung von exsudierenden, oberflächlichen und tiefen Wunden.

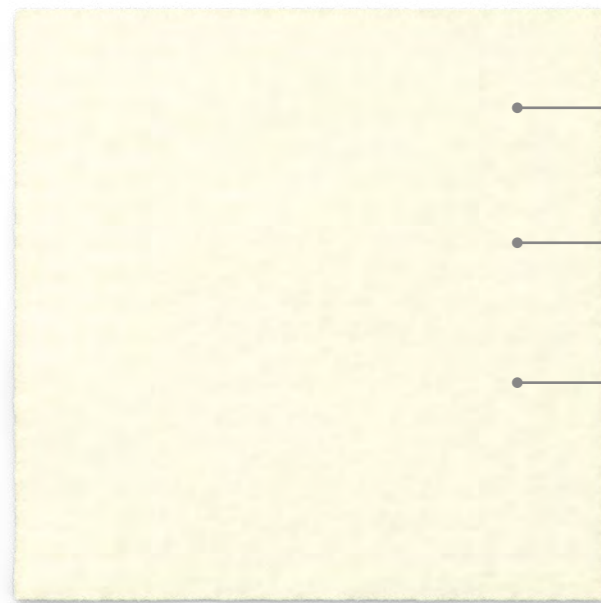

- exzellente Absorption - für stark exsudierende Wunden
- Hohe Faserfestigkeit im feuchten Zustand - in einem Stück zu entfernen
- Hohe Retention - zur Minimierung von Mazerationen

### Vorteile

- Hoch absorbierend
- Bildet ein Gel in Kontakt mit Wundflüssigkeit oder NaCl-haltigen Lösungen
- Verklebt durch Vergellen nicht mit dem feuchten Wundbett

### Anwendungsgebiete

- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Oberflächliche Wunden und Wundhöhlen
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Dekubitus, diabetisches Fussyndrom
- Hautentnahmestellen
- Traumatische Wunden

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Kompressen</b>					
25 20 00	5 x 5 cm	35.05.06.01.1	5967184	10	100
25 22 00	10 x 10 cm	35.05.06.02.1	5967190	10	100
25 25 00	10 x 20 cm	35.05.06.03.1	5967209	10	100
<b>Tamponade</b>					
25 35 00	3 x 45 cm	35.05.06.08.1	5967215	5	50

Steril – einzeln verpackt

# Melgisorb® Ag



## Antimikrobieller Alginatverband

Melgisorb Ag ist ein hochabsorbierender, antimikrobieller Kalzium-Alginatverband zur Versorgung von kritisch kolonisierten und infizierten oberflächlichen sowie tiefen Wunden. Die Strukturstabilität der Fasern ermöglicht die rückstandsarme Entfernung beim Verbandwechsel.



- Alginat mit Silberkomplexen
- Kalzium-Alginatverband mit hohem Gehalt an Gularonsäure und Carboymethylzellulose [CMC]

### Vorteile

- Absorbiert mehr als 45%\* andere silberhaltige Verbände
- Strukturstabilität: die hohe Strukturstabilität der Fasern ermöglicht die rückstandsarme Entfernung in einem Stück
- Schnelle und anhaltende antimikrobielle Wirkung

\* Im Vergleich zu silberhaltigen Hydrofaserverbänden - data on file

### Anwendungsgebiete


- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Oberflächliche Wunden und Wundhöhlen
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Dekubitus, Diabetisches Fussyndrom
- Hautentnahmestellen
- Traumatische Wunden
- Verbrennungen bis Grad 2a

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
<b>Kompressen</b>				
25 60 55	5 x 5 cm	7082662	10	100
25 61 05	10 x 10 cm	7082679	10	100
25 61 55	15 x 15 cm	7082685	10	100
<b>Tamponade</b>				
25 66 05	3 x 44 cm	7082691	10	100

Steril – einzeln verpackt

### Beispiele für Anwendungsgebiete

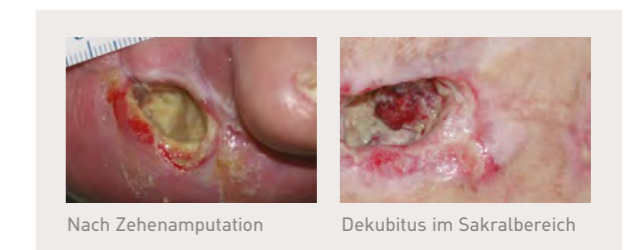

Nach Zehenamputation

Dekubitus im Sakralbereich





# Absorber & Superabsorber

---

- Mextra Superabsorbent
- Mesorb




# Mextra® Superabsorbent



## Superabsorbierender Wundverband mit flüssigkeitsabweisendem Deckvlies

Mextra Superabsorbent ist ein superabsorbierender Verband, der Wundexsudat über die Wundkontaktschicht absorbiert und zuverlässig in seinem Kern festhält. Das flüssigkeitsabweisende Deckvlies fungiert als Exsudatbarriere und verhindert das Durchtreten von Exsudat nach oben.

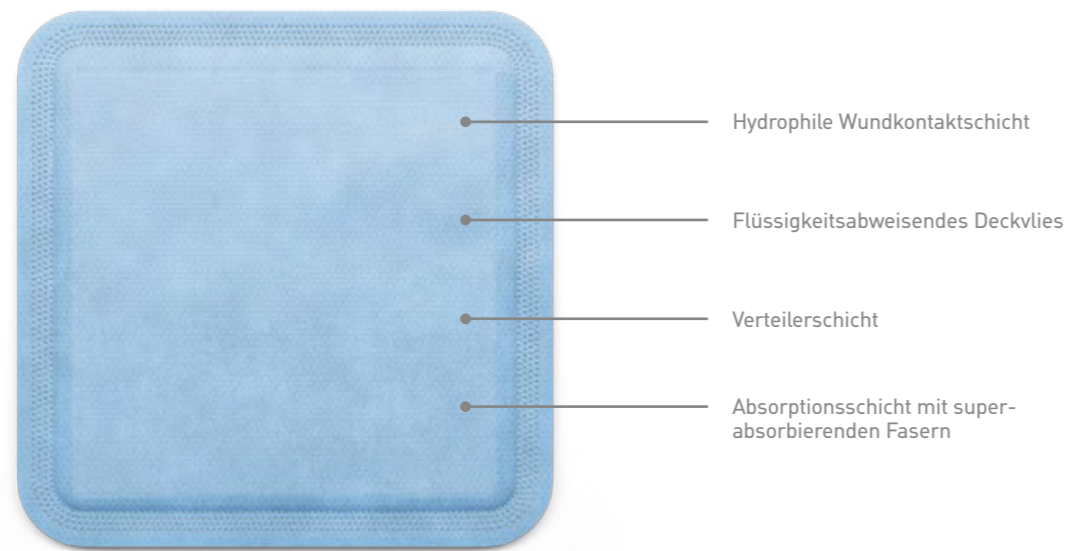

### Vorteile

- Hohes Rückhaltevermögen
- Erhöhte Absorptionskapazität
- Sanft und anpassungsfähig
- Schützt den Wundumgebungsbereich

### Anwendungsgebiete

- Stark bis sehr stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z.B. Ulcus cruris, Dekubitus
- Wunden in der Reinigungsphase
- Tumorwunden
- Wunden, verursacht durch lymphatische Stauungen

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Grösse Wundkissen	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
61 00 00	12,5 x 12,5 cm	9,5 x 9,5 cm	35.05.05.03.1	6994585	10	50
61 01 00	12,5 x 17,5 cm	9,5 x 14,5 cm	35.05.05.04.1	6994579	10	40
61 02 00	12,5 x 22,5 cm	9,5 x 19,5 cm	35.05.05.04.1	6994591	10	90
61 03 00	17,5 x 22,5 cm	14,5 x 19,5 cm	35.05.05.05.1	6994616	10	40
61 04 00	22,5 x 27,5 cm	19,5 x 24,5 cm	35.05.05.06.1	6994622	10	40
61 05 00	22,5 x 32,5 cm	19,5 x 29,5 cm	35.05.05.06.1	6994639	10	50
61 06 00	22,5 x 42,5 cm	19,5 x 39,5 cm	35.05.05.08.1	6994645	10	50

Steril – einzeln verpackt




# Mesorb®



## Hochabsorbierender Saugverband mit flüssigkeitsundurchlässiger Exsudatbarriere

Mesorb ist ein weicher, hochabsorbierender Saugverband, welcher sehr grosse Mengen von Exsudat aufnimmt. Die flüssigkeitsundurchlässige Exsudatbarriere verhindert die Verschmutzung von Bekleidung und Bettwäsche. Mesorb kann bis zu 7 Tage getragen werden, abhängig vom Zustand der Wunde und der Haut oder in Absprache mit medizinischem Fachpersonal.

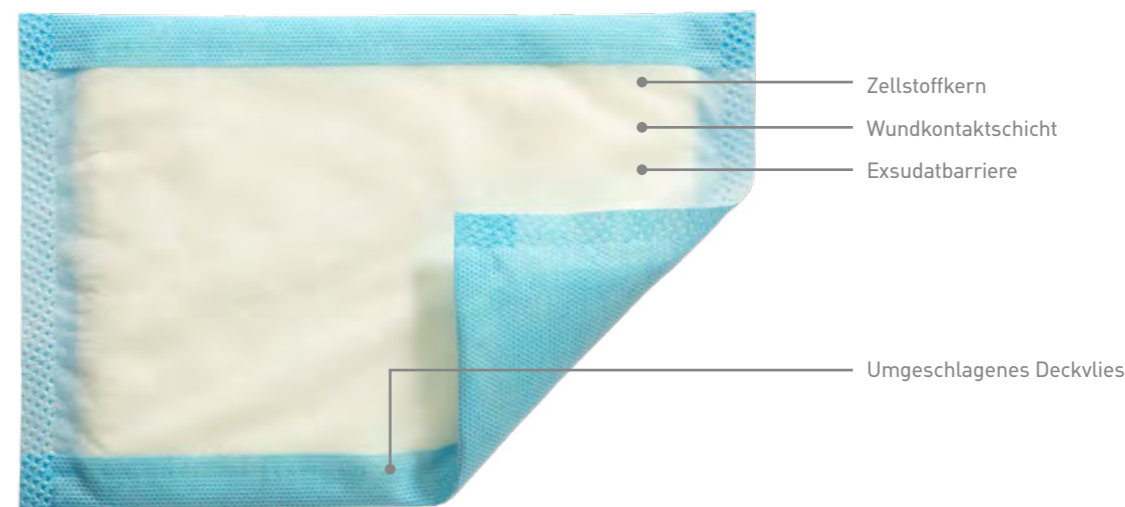

### Vorteile

- Hochabsorbierend
- Gute Polsterwirkung
- Hoher Tragekomfort
- Kosteneffizient

### Anwendungsgebiete

- Stark exsudierende Wunden
- Kann als Primärverband verwendet werden
- Kann als Sekundärverband zusammen mit Mepitel® oder Mepilex® Transfer verwendet werden.

### Ergänzungsprodukte als möglicher Primärverband

Wundkontaktauflagen, wie z.B.  
**Mepilex® Transfer**  
**Mepilex® Transfer Ag**  
**Mepitel® | Mepitel® One**

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
67 70 01	10 x 13 cm	35.01.04.01.1	7413308	50	400
67 72 01	13 x 15 cm	35.01.04.02.1	7413314	50	300
67 74 01	10 x 23 cm	35.01.04.02.1	7413320	50	300
67 76 01	15 x 23 cm	35.01.04.03.1	7413337	50	300
67 77 01	23 x 25 cm	35.01.04.04.1	7413343	30	120
67 78 01	30 x 23 cm	35.01.04.05.1	7413366	30	120

Steril – einzeln verpackt





# Dekubitus Behandlung & Prävention

---

- Mepilex Border Sacrum
- Mepilex Border Heel




# Mepilex® Border Sacrum

# Mepilex® Border Heel

## Selbsthaftender Schaumverband zur Behandlung und Vorbeugung


Mepilex Border Sacrum und Heel sind selbsthaftende, hochabsorbierende Polyurethanschaumverbände zur Versorgung mittel bis sehr stark exsudierender Wunden und zur Prophylaxe von Druckgeschwüren. Der integrierte Superabsorber verhindert, auch unter Kompression, ein Auslaufen und eine Rücknässung des Verbandes. Der Hafttrand mit Safetac Technologie sorgt für die schonende und dennoch sichere Fixierung.

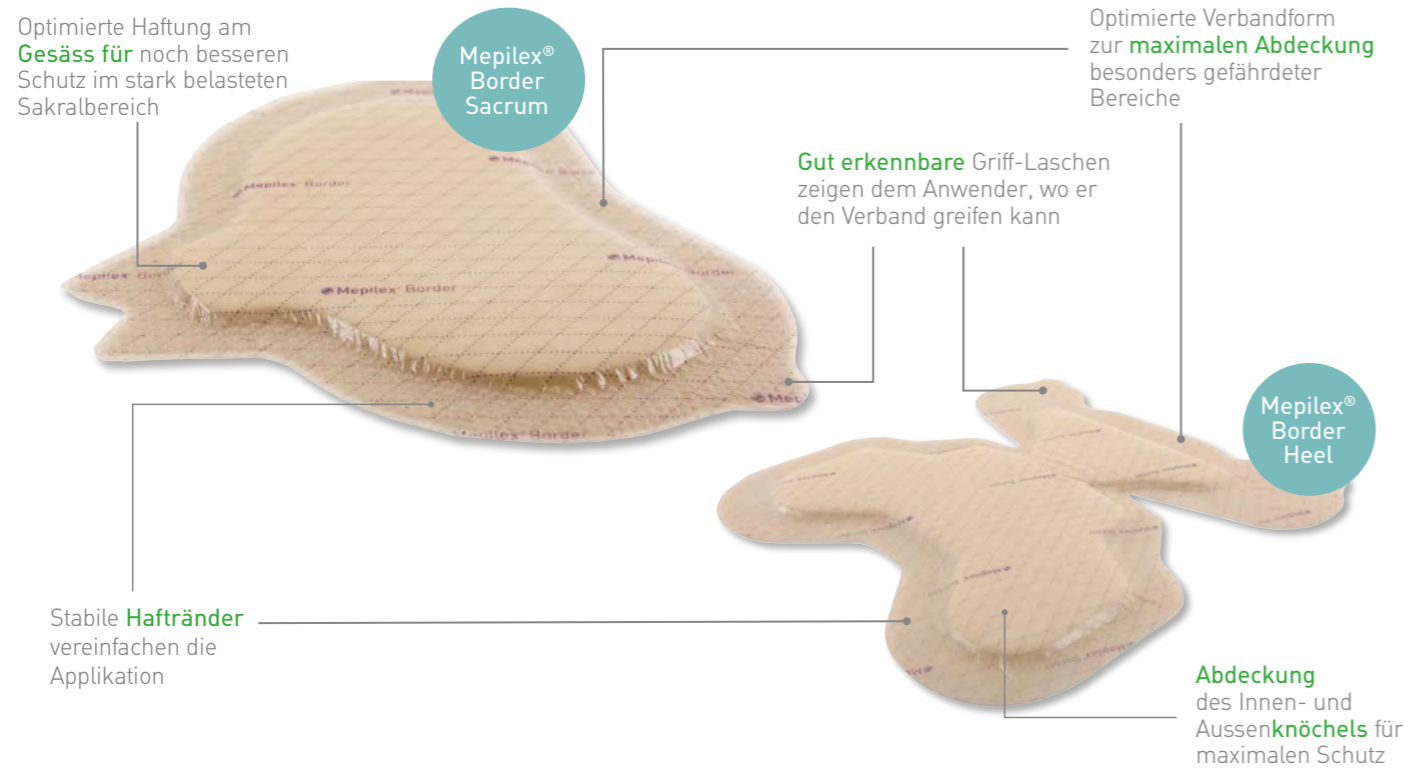

## Mit dem unveränderten, besonders schützenden 5-schichtigen Aufbau




## Warum beugt Mepilex® Border Sacrum Dekubitalulzera effektiv vor?

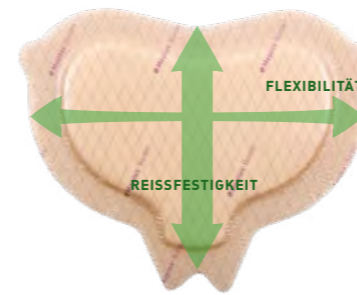

### Deep Defense™ Technologie

**Reissfestigkeit** in der Gleit/Scherrichtung der Patientenbewegung und **Flexibilität** in horizontaler Richtung schützen vor dem kombinierten Effekt der von aussen einwirkenden Kräfte, die zu Dekubitalulzera führen. Ausserdem wird die strukturelle Integrität des Verbandes aufrecht erhalten, auch nach Aufnahme von Sch weiss.

Anwendung von Mepilex® Border Sacrum

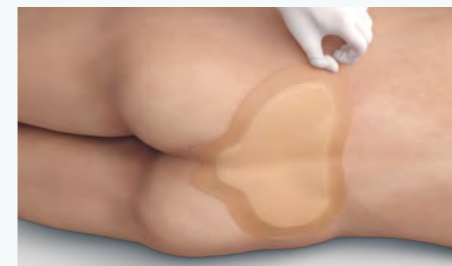

Anwendung von Mepilex® Border Heel



### Vorteile

- Sehr hohes Absorptionsvermögen durch Super-absorber für längere Verbandwechselintervalle und Kosteneffizienz
- Hält Exsudat sicher im Verband – auch unter Druck
- Atraumatischer und schmerzloser Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- Mittelstark bis sehr stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom
- Traumatische Wunden
- Dekubitusprophylaxe

### Bestellinformationen

#### Mepilex Border Sacrum


Art.-Nr.	Grösse	Grösse Wundkissen	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
28 20 50	16 x 20 cm	120 cm <sup>2</sup>	35.05.03.10.1	7367519	5	30
28 24 50	22 x 25 cm	240 cm <sup>2</sup>	35.05.03.10.1	7367502	5	40

#### Mepilex Border Heel

Art.-Nr.	Grösse	Grösse Wundkissen	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
28 27 50	22 x 23 cm	189 cm <sup>2</sup>	35.05.03.11.1	7367525	6	30

Steril - einzeln verpackt

Entwickelt zum Schutz vor den 4 Hauptursachen eines Dekubitus

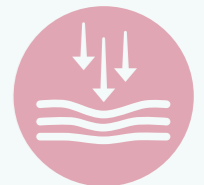

Druck



Scherkräfte



Reibung



Mikro-Klima





# Schlauchbandagen

---

- Tubifast - 2-Way-Strech
- Tubifast Garments



# Tubifast® & Tubifast® Garments

## Elastischer Schlauchverband

Tubifast 2-Way Stretch ist ein elastischer längs- und querdehnbarer Schlauchverband, der sich für die Sicherung von Primärverbänden, wie z.B. Mepilex, Mepilex Lite, Mextra Superabsorbent oder anderen medizinischen Produkten eignet.



### Vorteile

- Längs- und Querdehnbarkeit für sichere Fixierung
- Gute Elastizität für ausreichende Bewegungsfreiheit


### Anwendungsgebiete

- Sicherung von Primärverbänden und anderen medizinischen Produkten



Fasergehalt:  
Viskose, Elastan, Polyamid

Größen- und  
Anwendungsübersicht

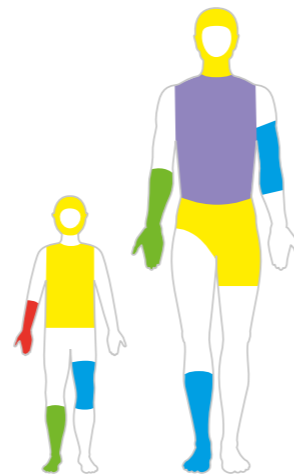

## Bestellinformationen Tubifast

Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedmasse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
10 m Länge						
24 34	Rot [3,5 cm]	9 - 18 cm	34.30.01.03.1	3516715	1	20
24 36	Grün [5 cm]	14 - 24 cm	34.30.01.03.1	3516721	1	24
24 38	Blau [7,5 cm]	24 - 40 cm	34.30.01.05.1	3516738	1	30
24 40	Gelb [10,75 cm]	35 - 64 cm	34.30.01.06.1	3516690	1	12
24 44	Violett [20 cm]	64 - 130 cm	34.30.01.07.1	7084193	1	15

Unsteril – 10m-Produkte auf Rolle

Erstattungsfähig, Zuschnittmuster. Die 1m-Längen Tubifast sind auch einzeln verordnungs- und abgabefähig.

## Beispiele für Anwendungsgebiete



**Gelber Streifen**

Anwendung am Kopf



**Violetter Streifen**

Anwendung am Oberkörper



**Grüner Streifen**

Anwendung an der Hand



**Gelber Streifen**


Anwendung an der Hüfte



**Blauer Streifen**

Anwendung am Bein

## Tubifast® Garments

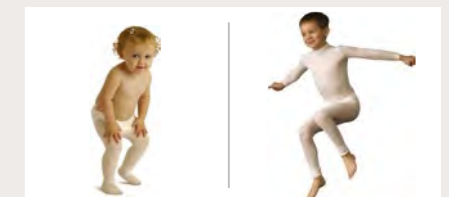

## Bestellinformationen Tubifast Garments

Art.-Nr.	Produkt/Grösse	Pharma-code	Stück/Packung	Stück/Karton
99 20 07	Unterhemd 6-24 Monate	6570230	6	30
99 20 08	Unterhemd 2-5 Jahre	6570247	6	30
99 20 09	Unterhemd 5-8 Jahre	6570253	6	30
99 20 10	Unterhemd 8-11 Jahre	6570276	6	30
99 20 11	Unterhemd 11-14 Jahre	6570282	6	30
99 20 12	Strumpfhose 6-24 Monate	6570649	6	30
99 20 13	Strümpfe 2-5 Jahre	6570655	6	30
99 20 14	Strümpfe 5-8 Jahre	6570661	6	30
99 20 15	Strümpfe 8-11 Jahre	6570678	6	30
99 20 16	Strümpfe 11-14 Jahre	6570684	6	30
99 20 17	Socken 2-14 Jahre	6570690	6	42
59 22	Handschuhe, XS Kind	6570201	6	42
59 23	Handschuhe, S Kind	6570193	6	42
59 21	Handschuhe, M/L Kind - S/M Erwachsener	6570218	6	42
59 20	Handschuhe M/L Erwachsener	6570224	6	42



### Wichtige Information:

Bitte wählen Sie die Tubifast-Kleidung der Grösse und dem Alter des Kindes entsprechend. Im Zweifel über die richtige Grösse sollte ein Kleidungsstück der nächsthöheren Grösse gewählt werden. Trägt das Kind Windeln unter Tubifast Garments, muss dies bei der Wahl der richtigen Grösse berücksichtigt werden.

Unsere Tubifast Garments sind auch erhältlich bei Publicare.  
www.publicare.ch • Tel: 056 484 15 00





# Konventionelle Wundversorgung

---

- Mepore
- Mepore Pro
- Mepore IV
- Mepore Film&Pad
- Mepore Film
- Steripod
- Gauze
- Mesoft



# Mepore® Film&Pad

Transparenter, absorbierender Wundverband



## Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
27 51 00	4 x 5 cm	35.05.10.01.1	3686185	85	340
27 51 10	4 x 5 cm	35.05.10.01.1	3755897	5	70
27 52 00	5 x 7 cm oval	35.05.10.01.1	3686305	85	340
27 52 10	5 x 7 cm oval	35.05.10.01.1	3755905	5	70
27 53 00	5 x 7 cm square	35.05.10.01.1	3686328	85	340
27 53 10	5 x 7 cm square	35.05.10.01.1	3755911	5	70
27 54 00	9 x 10 cm	35.05.10.02.1	3686340	30	180
27 54 10	9 x 10 cm	35.05.10.02.1	3755940	5	50
27 55 00	9 x 15 cm	35.05.10.03.1	3686357	30	240
27 55 10	9 x 15 cm	35.05.10.03.1	3755957	5	50
27 56 00	9 x 20 cm	35.05.10.04.1	3686452	30	240
27 56 10	9 x 20 cm	35.05.10.04.1	3755963	5	40
27 57 00	9 x 25 cm	35.05.10.04.1	3686469	30	150
27 58 00	9 x 30 cm	35.05.10.05.1	3686475	25	125
27 59 00	9 x 35 cm	35.05.10.06.1	3686481	25	100

Steril – einzeln verpackt

# Mepore®

Selbstklebender, absorbierender Wundverband




## Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
67 08 00	6 x 7 cm	34.42.02.01.1	1606466	60	480
67 08 70	6 x 7 cm	34.42.02.01.1	3687279	10	140
67 09 00	10 x 9 cm	34.42.02.03.1	1606472	50	400
67 09 70	10 x 9 cm	34.42.02.03.1	3687285	5	100
67 10 00	15 x 9 cm	34.42.02.04.1	1606489	50	400
67 10 70	15 x 9 cm	34.42.02.04.1	3687316	5	70
67 11 00	20 x 9 cm	34.42.02.05.1	1636154	30	180
67 11 70	20 x 9 cm	34.42.02.05.1	3687291	5	70
67 12 00	25 x 9 cm	34.42.02.06.1	1636160	30	210
67 13 00	30 x 9 cm	34.42.02.07.1	1636177	30	270

Steril – einzeln verpackt

# Mepore® Pro

Wasserfester, selbstklebender Wundverband

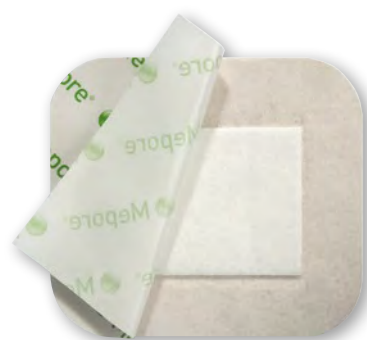

## Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
67 08 20	6 x 7 cm	34.42.02.01.1	2219665	60	480
68 08 40	6 x 7 cm	34.42.02.01.1	3687227	10	140
67 09 20	10 x 9 cm	34.42.02.03.1	3121342	40	320
68 09 40	10 x 9 cm	34.42.02.03.1	3687233	10	200
67 10 20	15 x 9 cm	34.42.02.04.1	3121365	40	320
68 10 40	15 x 9 cm	34.42.02.04.1	3687256	10	140
67 11 20	20 x 9 cm	34.42.02.05.1	2219694	30	180
68 11 40	20 x 9 cm	34.42.02.05.1	3687262	10	140
67 12 20	25 x 9 cm	34.42.02.06.1	2219702	30	210
67 13 20	30 x 9 cm	34.42.02.07.1	2219719	30	270

Steril – einzeln verpackt

# Mepore® IV

Transparenter, atmungsaktiver Kanülenfixierverband



## Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
27 40 00	5,5 x 5 cm	35.05.10.01.1	3396091	100	600
27 42 00	8 x 9 cm	35.05.10.02.1	3396116	70	210
27 44 00	10 x 11 cm	35.05.10.03.1	3396122	70	210

Steril – einzeln verpackt



# Mepore® Film



## Atmungsaktiver, transparenter Folienverband

Mepore Film ist ein selbstklebender, atmungsaktiver Folienverband zur Versorgung sauberer, epithelisierender Wunden. Der Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis gewährleistet eine schonende Anwendung sowie sichere Fixierung.

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
27 06 00	6 x 7 cm	35.05.10.01.1	3531749	100	600
27 06 70	6 x 7 cm	35.05.10.01.1	3531755	10	50
27 15 00	10 x 12 cm	35.05.10.03.1	3531695	70	210
27 15 70	10 x 12 cm	35.05.10.03.1	3531761	10	70
27 25 00	10 x 25 cm	35.05.10.04.1	3531703	20	100
27 25 70	10 x 25 cm	35.05.10.04.1	3531778	10	50
27 30 00	15 x 21 cm	35.05.10.05.1	3531732	10	50

Steril – einzeln verpackt



### Vorteile

- Begutachtung der Wunde möglich
- Schützt vor Kontamination und Flüssigkeit
- Sichere, hautfreundliche Fixierung
- Einfache Anwendung dank Applikationsrahmen

### Anwendungsgebiete

- Abdeckung und Fixierung von Primärverbänden, wie z.B. Hydrogelen, Alginaten oder Schaumverbänden
- Saubere Wunden in der Epithelisierungsphase

# Mepore® Film Roll



## Unsteriler, transparenter Folienverband auf der Rolle

Mepore Film Roll ist ein unsteriler, selbstklebender, atmungsaktiver Folienverband, der sich ideal für die Fixierung von Verbänden, Schläuchen und Kanülen eignet.

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
27 61 05	5 cm x 10 m	35.05.10.12.1	4677165	1	24
27 61 10	10 cm x 10 m	35.05.10.13.1	6847430	1	12
27 61 15	15 cm x 10 m	35.05.10.14.1	4677113	1	8

Unsteril – im Spenderkarton



### Anwendungsgebiete

- Fixierung von Verbänden, Schläuchen und Kanülen
- Prävention vor Hautdegeneration
- Schutz fragiler Haut vor äusserer Kontamination

# Steripod®



## Wundspülsystem mit physiologischer Kochsalzlösung

Die physiologische Kochsalzlösung Steripod ist eine sterile physiologische Lösung mit 0,9 % Natriumchlorid in Reinstwasser, die in einer Polyethylenampulle verpackt ist. Die leicht zusammendrückbare Ampulle bietet genau die Flexibilität, die zum einfachen wirkungsvollen Spülen erforderlich ist, ohne dass dabei das Gewebe geschädigt oder verletzt wird. Steripod ist isotonisch und für Zellen ungefährlich. Da die Ampullen steril, in sich geschlossen und als Einwegprodukt konzipiert sind, entsteht relativ wenig Abfall, und das Risiko einer Kreuzkontamination ist sehr gering.



### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
50 20 00	20 ml	7740919	25	400







## Gazetupfer und Kompressen

Die Tupfer und Kompressen sind aus einem Verbandsmull mit 17 Fäden pro cm<sup>2</sup> hergestellt und finden breite Anwendung im Bereich Wundreinigung, Hautreinigung vor chirurgischen Eingriffen, als Verband als solches und zur Absorption von Körperflüssigkeiten in Wunden.



### Eigenschaften von Gauze

- Ohne Chlor gebleicht
- 100% Baumwolle
- Enthält keine Bindemittel
- Nicht toxisch
- Nicht sensibilisierend
- Zusammensetzung gemäss European Pharmacopiea

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
15 08 00	Gaze-Rundtupfer Nr. 3, ø ca. 2,8 cm, unsteril	n/a	4765308	250	3000
15 08 60	Gaze-Rundtupfer Nr. 3, ø ca. 2,8 cm, steril, Beutel à 5 Stk.	n/a	4765314	150	1500
15 13 00	Gaze-Rundtupfer Nr. 4, ø ca. 6,8 cm, unsteril	n/a	4765320	100	1500
15 13 60	Gaze-Rundtupfer Nr. 4, ø ca. 6,8 cm, steril, Beutel à 5 Stück	n/a	n/a	120	1200
15 17 00	Gaze-Flachtupfer Nr. 3, 25x25 mm, unsteril	n/a	4765283	500	10000
15 30 40	Gaze-Kompressen 5x5cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 2 Stk.	34.01.01.01.1	4765627	100	2000
15 30 65	Gaze-Kompressen 5x5cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 5 Stk.	34.01.01.01.1	4765610	120	2400
15 31 00	Gaze-Kompressen 5x5cm, 8 Lagen, unsteril	34.02.02.01.1	4765633	150	7650
15 33 00	Gaze-Kompressen 7x7,5cm, 8 Lagen, unsteril	34.02.02.02.1	4765679	150	3600
15 80 40	Gaze-Kompressen 10x10cm, 8 Lagen, steril, Beutel à 2 Stk.	34.01.01.03.1	4765538	150	1500
15 84 00	Gaze-Kompressen 10x10cm, 12 Lagen, unsteril	34.01.01.03.1	4765521	100	2000
15 84 40	Gaze-Kompressen 10x10cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 2 Stk.	34.01.01.03.1	4765426	100	1000
15 84 65	Gaze-Kompressen 10x10cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 5 Stk.	34.01.01.03.1	4765366	120	1200
15 85 00	Gaze-Kompressen 10x20cm, 12 Lagen, unsteril	34.01.01.04.1	4765596	50	1000
15 85 40	Gaze-Kompressen 10x20cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 2 Stk.	34.01.01.04.1	4765573	100	900
15 85 60	Gaze-Kompressen 10x20cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 5 Stk.	34.01.01.04.1	4765544	100	900



## Vlieskompressen und Rundtupfer

Mesoft Kompressen und Tupfer sind kostengünstige Alternativen zu den herkömmlichen Baumwollgazeprodukten. Sie zeichnen sich vor allem durch überlegene Absorptionskapazität, Weichheit und geringe Faserfreisetzung aus.



### Eigenschaften von Mesoft

- Geringe Partikelfreisetzung
- Wirtschaftlichkeit
- Formbeständigkeit auch im Nasszustand
- Weichheit

### Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
15 50 30	Mesoft Vlies-Schlitzkomresse 10x10 cm, steril, Beutel à 1 Stk.	34.02.01.03.1	3082576	130	1950
15 60 15	Mesoft Vlies-Komresse 5x5cm, unsteril	34.02.02.01.1	1678827	100	3200
15 60 40	Mesoft Vlies-Komresse 5x5cm, steril, Beutel à 2 Stk.	34.02.01.01.1	3082010	150	3000
15 60 65	Mesoft Vlies-Komresse 5x5cm, steril, Beutel à 5 Stk.	34.02.01.01.1	3082027	150	3000
15 61 15	Mesoft Vlies-Komresse 7,5x7,5cm, unsteril	34.02.02.02.1	1678810	100	2000
15 61 40	Mesoft Vlies-Komresse 7,5x7,5cm, steril, Beutel à 2 Stk.	34.02.01.02.1	3082582	150	4200
15 61 65	Mesoft Vlies-Komresse 7,5x7,5cm, steril, Beutel à 5 Stk.	34.02.01.02.1	3082599	150	4200
15 63 15	Mesoft Vlies-Komresse 10x10cm, unsteril	34.02.02.03.1	1678804	100	5600
15 63 40	Mesoft Vlies-Komresse 10x10cm, steril, Beutel à 2 Stk.	34.02.01.03.1	3075719	150	3450
15 63 65	Mesoft Vlies-Komresse 10x10cm, steril, Beutel à 5 Stk.	34.02.01.03.1	3066330	150	3450
15 64 15	Mesoft Vlies-Komresse 10x20cm, unsteril	34.02.02.04.1	1678796	100	2800
15 64 40	Mesoft Vlies-Komresse 10x20cm, steril, Beutel à 2 Stk.	34.02.01.04.1	3082607	120	1200
15 64 65	Mesoft Vlies-Komresse 10x20cm, steril, Beutel à 5 Stk.	34.02.01.04.1	3082613	120	1200
15 67 00	Mesoft Vlies-Rundtupfer S, ø ca. 2,5cm, unsteril	n/a	2105111	100	2200
15 67 60	Mesoft Vlies-Rundtupfer S, ø ca. 2,5cm, steril Beutel à 5 Stk.	n/a	3082642	100	2800
15 68 00	Mesoft Vlies-Rundtupfer M, ø ca. 3,5cm, unsteril	n/a	2105128	100	1300
15 68 60	Mesoft Vlies-Rundtupfer M, ø ca. 3,5cm, steril Beutel à 5 Stk.	n/a	3082659	100	1500
15 69 00	Mesoft Vlies-Rundtupfer L, ø ca. 4,5cm, unsteril	n/a	2105134	100	900
15 69 60	Mesoft Vlies-Rundtupfer L, ø ca. 4,5 cm, steril Beutel à 5 Stk.	n/a	3082665	70	1050



## Mepilex® XT Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele


Ferse



Zehenzwischenräume



Zeh

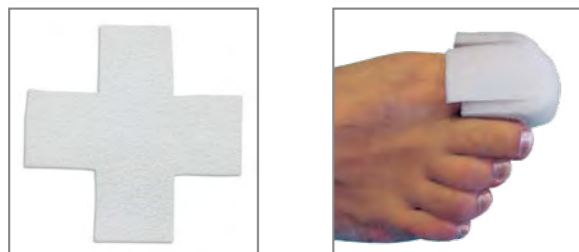

Finger und Zeh




Handzwischenräume



Ellbogen



Achsel

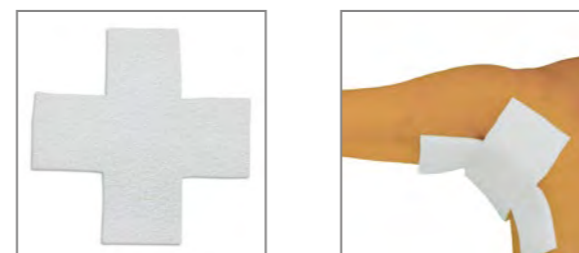

Ohr




Anwendung bei Schläuchen



## Mepilex® Border Lite Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele

Finger 5 x 12,5 cm

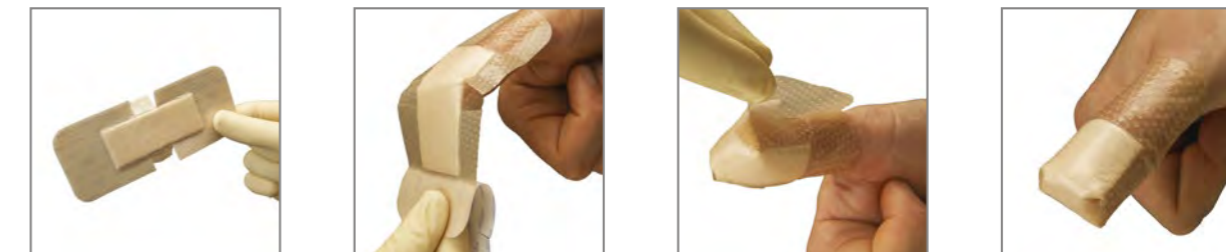

Zeh 5 x 12,5 cm



Ferse 10 x 10 cm



Ellbogen 10 x 10 cm



Ohr 4 x 5 cm





Mepilex® XT



ulcus cruris



ulcus cruris



Verbrennungen bis Grad 2a



Mepilex® XT  
Mepilex®



S. 8

S. 9

Mepilex® Lite



Diabetisches Fussyndrom



Verbrüfung



Strahlenfolge



Mepilex® Lite



S. 10

Mepilex® Transfer



ulcus cruris



Tumorstunde



Strahlenfolge



Mepilex® Transfer



S. 11

Mepilex® Border Flex



venöses ulcus



ulcus cruris



Mepilex Border Heel



Mepilex® Border Flex



S. 14

Mepilex® Border Lite



Schürfwunde



Diabetisches Fussyndrom



epithelisierende Wunde



Mepilex® Border Lite



S. 17

Mepilex® Ag



ulcus cruris



Verbrennungen bis Grad 2a



Diabetisches Fussyndrom



Mepilex® Ag



S. 23

Mepilex® Border Ag



Dekubitus an Ferse



infiziertes ulcus



ulcus cruris venosum



Mepilex® Border Ag



S. 24

Mepitel®



Mepitel bei Epidermolysis Bullosa



Fixierung von Hauttransplantaten



Mepitel auf Hautentnahmestelle



Mepitel®



S. 28

Mepitel® One



Mepitel One auf chirurgischer Wunde



Schürfwunde



Hautriss



Mepitel® One



S. 30


Mepitel® Film



Mepitel Film auf chirurgischer Wunde



Pergament-Haut

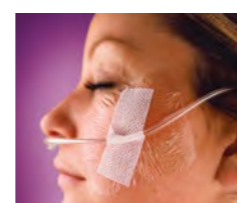

Mepitel Film als -Lande-Zone zum Schutz der gesunden Haut



Mepitel® Film



S. 29



# Notizen



Das neue Wundkonzept ist da!

Bestellen Sie unser kostenloses Wundkonzept per Mail an [info.ch@molnlycke.com](mailto:info.ch@molnlycke.com) oder fragen Sie Ihren Mölnlycke-Ansprechpartner.



# PROVING IT EVERY DAY

Mölnlycke® liefert innovative Lösungen für das Wundmanagement, zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im OP und zur Vorbeugung von Druckgeschwüren. Diese Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Alles, was wir tun, dient einem einzigen Zweck: Medizinische Fachkräfte in die Lage zu versetzen, ihr Bestes zu geben. Und wir sind bestrebt, dies täglich unter Beweis zu stellen.

## Kundenservice:

Tel: 0800 / 563 195

Fax: 0800 / 563 197

E-Mail: [csc.ch@molnlycke.com](mailto:csc.ch@molnlycke.com)

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.ch](http://www.molnlycke.ch)

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Tel: +41 44 744 54 00, Fax: +41 44 744 54 11  
Die Namen Mölnlycke und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.  
©2019 Mölnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten.

