




Weil das
Ergebnis
zählt



Wundversorgung

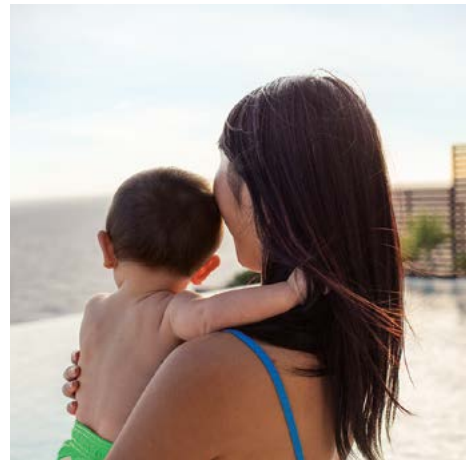










Sortimentsübersicht Schweiz

2018/2019

Wichtige **Tipps und Tricks** für die Wundversorgung

- Nehmen Sie die Schmerzen des Patienten immer ernst
 - Klären Sie die Ursache für die Wunde
 - Jede Berührung der Wunde kann Schmerzen verursachen
 - Schonendes Ablösen der Wundauflage, ggf. durch Anfeuchten der Wundauflage
 - Unnötige Reize wie z.B. Zugluft oder Anstossen/Stechen der Wunde vermeiden
 - Dokumentieren Sie jeden Verbandwechsel
 - Beachten Sie die Richtlinien zur Infektionskontrolle
 - Verwenden Sie nur sterile Instrumente z.B. zum Zuschneiden der Materialien
 - Materialien, die Wundkontakt haben, müssen steril sein; einmal angebrochene Materialien finden beim nächsten Verbandwechsel keine Verwendung mehr; siehe ⓘ auf der Verpackung
 - Reinigen Sie die Wunde stadiengerecht
 - Wundspüllösungen vor Gebrauch ggf. anwärmen
 - Entfernen Sie die Schutzfolie erst nach dem Zuschneiden
 - Wählen Sie einen Verband, der beim Verbandwechsel keine Schmerzen oder eine Traumatisierung der Wunde verursacht oder die Wundumgebungshaut verletzt
 - Folienverbände bei der Entfernung parallel zur Haut überdehnen
 - Wundfüller z.B. Alginat nicht stopfen
 - Verband spannungsfrei applizieren und darauf achten, dass es keine Einschnürungen durch zu festes Anlegen von fixierenden Binden gibt
 - Bedenken Sie die Fließrichtung des Exsudats beim Positionieren des Verbands
 - Keine einschnürende Kleidung tragen, z.B. Socken mit engen Bündchen, Miederhosen, Korsetts, da diese die Durchblutung stören
- Bitte beachten Sie immer die Packungsbeilage des jeweiligen Produktes.

Legende:

 kein bis geringes Exsudat	 mittelstarkes Exsudat	 starkes Exsudat	 kein bis starkes Exsudat. Bei starkem Exsudat bitte Sekundärverband verwenden!
 Fixierung notwendig	 Zuschneidbar	 sehr geringes Allergiepotential	 Duschfest
 Viren- und Bakterienundurchlässig	 Sekundärverband notwendig	 Sekundärverband möglich	

Hinweis:
Dies sind allgemeine Ratschläge zur Wundversorgung und haben keinerlei Anrecht auf Vollständigkeit.
Bitte beachten Sie ggf. Ihre lokalen Behandlungsrichtlinien!
Bitte beachten Sie die jeweiligen Gebrauchsanweisungen der Verbände!

Inhalt

SCHAUMVERBÄNDE & SUPERABSORBER

Mepilex XT	6
Mepilex / Heel	8
Mepilex Lite	9
Mepilex Border Flex	10
Mepilex Border / Sacrum / Heel	12
Mepilex Border Lite	13
Mepilex Border Post-Op.....	14
Mextra Superabsorbent	16
Mesorb	17

ANTIMIKROBIELLE WUNDAUFLAGEN

Mepilex Ag	18
Mepilex Transfer Ag.....	20
Melgisorb Ag.....	21
Mepilex Border Ag / Sacrum Ag	22

WUNDKONTAKTAUFLAGEN & FILMVERBÄNDE

Mepitel & Mepitel One	24
Mepitel Film.....	26
Mepore Film	27
Mepore Film Roll	27
Mepilex Transfer	28

ALGINATE & FASERVERBÄNDE

Melgisorb Plus	29
Exufiber.....	30

WUNDSCHNELLVERBÄNDE & FIXIERUNG

Mepore Film & Pad	32
Mepore Pro	32
Mepore	33
Mepore IV.....	33
Tubifast & Tubifast Garments	34
Mepitac	36
Mefix	36

SONSTIGES

Mepiform (Narbenbehandlung)	37
Steripod	37
Gauze	37
Mesoft	39

ZUSCHNITTMUSTER

Produkte ohne Hafrand	40
Produkte mit Hafrand	41

Stand: März 2018



Proving it every day

Mölnlycke liefert innovative Produkte für das Wundmanagement, Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im OP und zur Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren. Diese Produkte und Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Alles was wir tun, dient einem einzigen Zweck: Medizinische Fachkräfte zu unterstützen, ihr Bestes zu geben um somit eine bestmögliche Versorgung Ihrer Patienten zu gewährleisten. Und wir sind bestrebt, dies täglich unter Beweis zu stellen.

Was wir tun

Unsere Lösungen ermöglichen eine bessere und effizientere Versorgung von Patienten an allen Standorten – vom Krankenhaus bis nach Hause:

1. Wundversorgung

Mit evidenzbasierten Wundversorgungslösungen (z.B. Verbände mit Safetac® Technologie)

2. Dekubitusprophylaxe

Wir reduzieren das Risiko von Dekubitalulzera mit prophylaktischen Verbänden und Hilfsmitteln, die medizinischen Fachkräften die Umlagerung von Patienten erleichtern, sowie durch unterstützende Schulungs- und Beratungsservices.

3. Chirurgische Lösungen

Wir erhöhen die Sicherheit und Effizienz im und rund um den OP mit massgeschneiderten Trays, die auch chirurgische Instrumente beinhalten. Zudem schützen wir Personal und Patienten durch Abdecktücher, OP-Kleidung, Antiseptika und OP-Handschuhe vor Infektionen und bieten entsprechende Fortbildungen und Fachberatung.

Die Gesundheitsversorgung verbessern

Weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, beschränken wir uns nicht darauf, Produkte zu verkaufen. Wir unterstützen medizinische Fachkräfte auch dabei, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Daran anknüpfend nutzen wir unser umfassendes Fachwissen, um passende Lösungen zu entwickeln, die zu besseren Ergebnissen führen.

Innovation für die Zukunft


Angetrieben durch unser stetiges Streben nach Lösungen für unerfüllte Bedürfnisse in der Gesundheitsversorgung werden wir weiter Innovationen schaffen und hochwertige, kostengünstige Lösungen entwickeln, die neue Standards setzen. Wir werden auch weiterhin eng mit Branchenverbänden, Gesundheitsorganisationen und Regierungen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um an Gesundheitsvorschriften und Leitlinien mitzuwirken und die Therapiestandards zu erhöhen. Wir unterstützen alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen, von Pflegekräften und Ärzten über Krankenhausmanager und häusliche Pflegedienste bis hin zu Einkäufern dabei, die besten Ergebnisse zu erzielen.




Die Safetac® Technologie – der entscheidende Unterschied

Die sanfte Safetac® Technologie passt sich auch den kleinsten Strukturen der Haut an, während die Kleber anderer Verbände nur Kontakt mit den obersten Hautzellen haben. So werden Schmerzen beim Verbandwechsel minimiert, die Wundränder wirksam geschützt und Mazerationen vorgebeugt.

Herkömmlicher Kleber

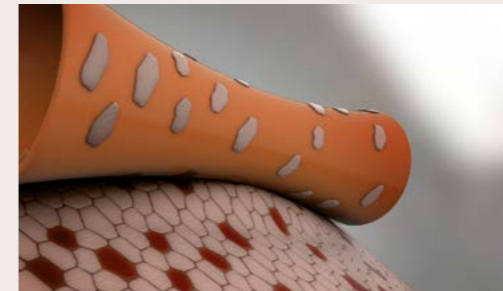

Abziehen der obersten Hautschicht bei herkömmlichem Klebstoff

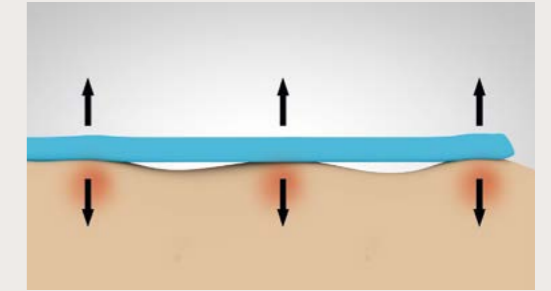


Herkömmliche Klebstoffe haften nur am oberen Rand der Hautporen und müssen deshalb eine stärkere Haftkraft aufweisen, damit der Verband sicher sitzt.

Verbände mit Safetac® Technologie



Kein Abziehen der obersten Hautschicht bei der Safetac® Technologie

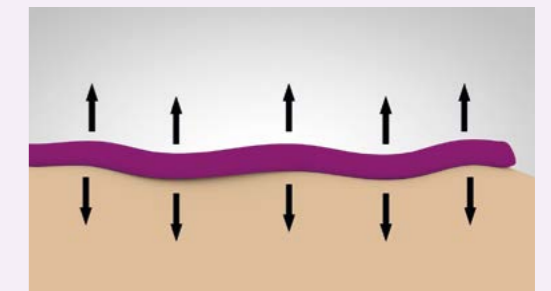

Safetac® passt sich an die Poren an und versiegelt so die Wundränder. Wundauflagen mit Safetac® haften sanft aber sicher.

Nachweislich die beste Wahl für ein optimales Ergebnis.

Die von Mölnlycke Health Care entwickelte Safetac® Technologie bietet Vorteile, die weit über die üblichen Produktversprechen hinausgehen. Safetac optimiert nachweislich den Wundheilungsprozess und kann Wunden sogar vorbeugen. Verbände mit Safetac sind auf jeden Fall eine sichere Wahl für Patienten und Wegbereiter für einen neuen, hohen Standard im

Bereich der Wundversorgung. Uns liegen zahlreiche Belege dafür vor, die die klinischen und wirtschaftlichen Vorteile von Verbänden mit Safetac, darunter Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® und Mepitac® untermauern. Bereits heute haben unsere Verbände das Leben von Millionen Patienten weltweit erleichtert¹⁻³.

* Eine Technologie, die ausschliesslich von Mölnlycke Health Care erhältlich ist.


Safetac
TECHNOLOGY

Referenzen: 1. Davies, P., Rippon, M. Evidence review: the clinical benefits of Safetac technology in wound care. Journal of Wound Care 2008; Supplement:3-31. 2. Santamaria N, Gertz M, Liu W, Rakis S, Sage S, Ng AW, Tudor H, McCann J, Vassiliou T, Morrow F, Smith K, Knott J, Liew D. Clinical effectiveness of a silicone foam dressing for the prevention of heel pressure ulcers in critically ill patients: Border II Trial. Journal of Wound Care 2015; 24(8):340-345. 3. Santamaria N, Santamaria H. An estimate of the potential budget impact of using prophylactic dressings to prevent hospital-acquired PUs in Australia. Journal of Wound Care 2014; 23(11):583-589.



Innovativer Schaumverband für alle Wundphasen

Mepilex XT ist ein weicher Polyurethanschaum, der für leicht bis mittelstark exsudierende und chronische Wunden in allen Heilungsstadien vorgesehen ist.

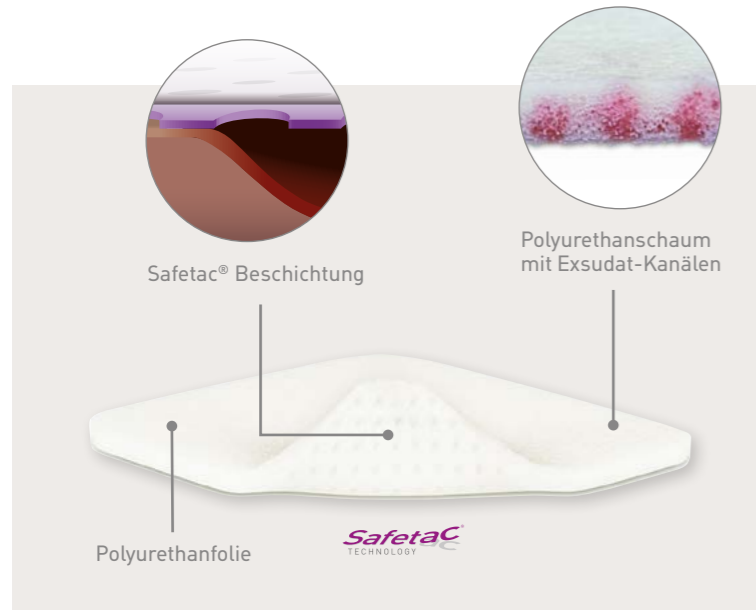

NEU

Anwendungssicherheit durch effektive Aufnahme aller Exsudat-Arten

Ergänzungsprodukt zur Fixierung:



Vorteile

- Absorbiert alle Arten von Exsudat, auch visköses Exsudat
- Effektiver Einsatz in allen Phasen der Wundheilung
- Reduzierung der Verbandwechsel
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Leicht bis mittelstark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom, Dekubitus
- Verbrennungen bis Grad 2a

Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 34.

Beispiele für Anwendungsgebiete



Versorgung an schwierigen Körperstellen



Ulcus cruris arteriosum

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
21 10 15	5 x 5 cm	35.05.03.01.1	6550380	5	40
21 11 00	10 x 10 cm	35.05.03.03.1	6202785	5	70
21 12 00	10 x 20 cm	35.05.03.04.1	6202791	5	45
21 13 00	15 x 15 cm	35.05.03.04.1	6863245	5	25
21 14 00	20 x 20 cm	35.05.03.06.1	6202822	5	20
21 15 00	20 x 50 cm	35.05.03.08.1	7186083	2	12

Steril – einzeln verpackt





Schaumverband

Mepilex ist ein weicher Polyurethanschaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht bis mittelstark exsudierender Wunden.



Ergänzungsprodukt zur Fixierung:



Beispiele für Anwendungsgebiete



Vorteile

- Absorbiert Exsudat schnell und zuverlässig
- Extrem weich und anpassungsfähig
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Leicht bis mittelstark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom
- Verbrennungen bis Grad 2a

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
29 40 15	5 x 5 cm	35.05.03.01.1	09 31 30 54	5	40
29 41 50	10 x 12 cm	35.05.03.03.1	01 60 33 38	5	50
29 42 50	12 x 20 cm	35.05.03.04.1	01 60 33 50	5	50
29 43 50	15 x 17 cm	35.05.03.04.1	01 60 33 73	5	25
29 44 50	20 x 22 cm	35.05.03.06.1	01 60 34 04	5	20

Mepilex Heel

28 81 00	13 x 20 cm	35.05.03.11.1	3296596	5	25
----------	------------	---------------	---------	---	----

Steril – einzeln verpackt



Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.

Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 34.



Dünnere Schaumverband

Mepilex Lite ist ein dünner Polyurethanschaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht exsudierender Wunden. Der Verband ist äusserst flexibel sowie anpassungsfähig und eignet sich auch zur Versorgung geschädigter und zum Schutz gefährdeter Haut.



Ergänzungsprodukt zur Fixierung:



Beispiele für Anwendungsgebiete



Vorteile

- Extrem weich und anpassungsfähig
- Tragen während der Strahlentherapie möglich
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Leicht exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z.B. diabetisches Fussyndrom
- Strahleninduzierte Hautschäden
- Hautschutz

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
28 40 00	6 x 8,5 cm	35.05.03.02.1	2754714	5	70
28 41 00	10 x 10 cm	35.05.03.03.1	2754720	5	50
28 43 00	15 x 15 cm	35.05.03.04.1	2754737	5	50
28 45 00	20 x 50 cm	35.05.03.08.1	5548122	4	24

Steril – einzeln verpackt



Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.

Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 34.


Mepilex® Border Flex



Flexibler Schaumverband mit Hafrand für mehr Möglichkeiten und weniger Kosten.

Mepilex Border Flex haftet dank der Flex Technologie zuverlässiger als andere Verbände, auch bei stärkeren Bewegungen. Dies und die hohe Aufnahmekapazität – von normalen und zähflüssigem Exsudat, sorgen dafür, dass der Verband länger getragen werden kann. Gleichzeitig sorgt die besondere Konstruktion für eine effektive Reduzierung der Bakterienanzahl in der Wunde.

NEU

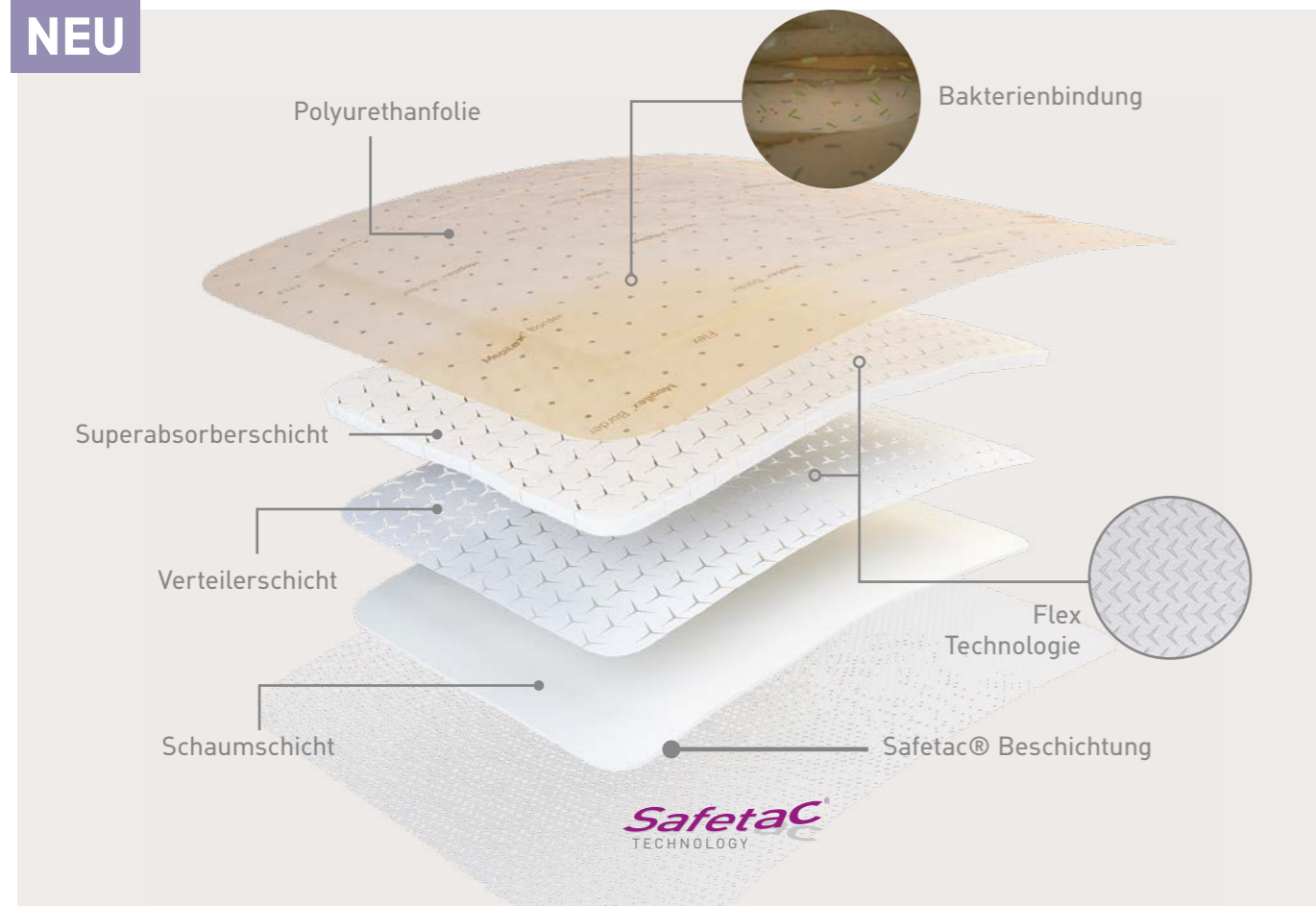

Vorteile

- Flexibilität sorgt für eine sichere und lange Haftung
- Schnelle und sichere Aufnahme aller Exsudatarten – auch visköses Exsudat
- Schnelle Aufnahme, Weiterleitung und sicherer Einschluss von Bakterien, für eine effektive Reduzierung der Bakterienlast in der Wunde. Ganz ohne Wirkstoffe.
- Optimale Anpassungsfähigkeit und verschiedene Formen für hohen Patientenkomfort

Anwendungsgebiete

- Mittelstark bis sehr stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom, Ablederungen
- Traumatische Wunden

Beispiele für Anwendungsgebiete



Blutschwamm am Übergang von Oberschenkel zum Po



Optimale Anpassung und Haftung von Mepilex Border Flex



Oberschenkelamputation



Versorgung mit Mepilex Border Flex

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Grösse Wundkissen	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
59 52 00	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	35.05.04.02.1	7238561	5	50
59 53 00	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	35.05.04.03.1	7238578	5	50
59 50 00	12,5 x 12,5 cm	8,5 x 8,5 cm	35.05.04.03.1	7316798	5	50
59 54 00	15 x 15 cm	11 x 11 cm	35.05.04.04.1	7238590	5	50
59 56 00	15 x 20 cm	11 x 16 cm	35.05.04.05.1	7238609	5	50
28 35 70	7,8 x 10 cm	3,5 x 5,5 cm	35.05.03.02.1	6404081	5	50
28 33 00	13 x 16 cm	9 x 12 cm	35.05.03.04.1	6863274	5	35
28 34 00	15 x 19 cm	11,2 x 15,2 cm	35.05.03.05.1	6006512	5	45


oval

Steril – einzeln verpackt



Selbsthaftender, hochabsorbierender Schaumverband

Mepilex Border ist ein selbsthaftender, hochabsorbierender Polyurethanschaumverband zur Versorgung mittel bis sehr stark exsudierender Wunden. Der integrierte Superabsorber verhindert, auch unter Kompression, ein Auslaufen und eine Rücknässung des Verbandes. Der Hafttrand mit Safetac Technologie sorgt für die schonende und dennoch sichere Fixierung, ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel und schützt das wundumgebende Gewebe vor Schädigung und Mazeration.

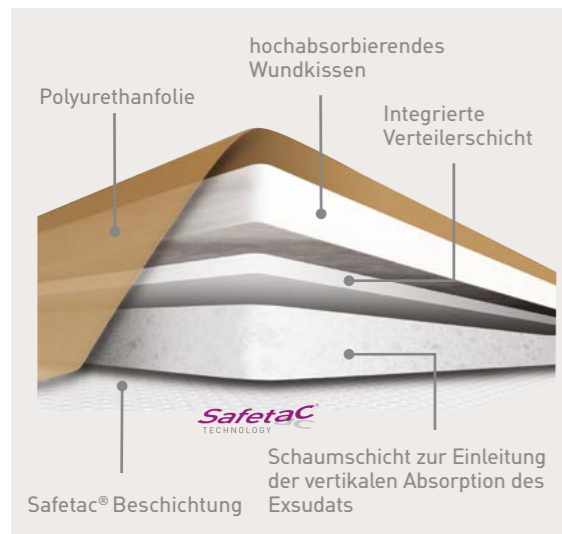


Mepilex Border reduziert klinisch erwiesen die Inzidenz von Dekubitusulzera. Mehr Infos unter:

EVIDENZ FÜR PROPHYLAXE

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



Beispiele für Anwendungsgebiete

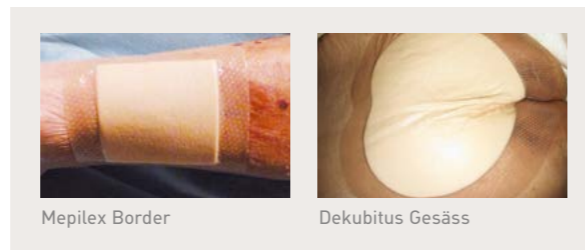

Vorteile

- Sehr hohes Absorptionsvermögen durch Super-absorber für längere Verbandwechselintervalle und Kosteneffizienz
- Hält Exsudat sicher im Verband – auch unter Druck
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Mittelstark bis sehr stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom
- Traumatische Wunden
- Dekubitusprophylaxe

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Grösse Wundkissen	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
29 52 00	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	35.05.03.02.1	2341484	5	70
29 53 00	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	35.05.03.03.1	2341490	5	50
29 54 00	15 x 15 cm	11 x 11 cm	35.05.03.04.1	2341509	5	50
29 56 00	15 x 20 cm	11 x 16 cm	35.05.03.05.1	2341538	5	45
29 58 00	10 x 20 cm	6 x 16 cm	35.05.03.04.1	6863297	5	35

Für die Dekubitusprophylaxe

Mepilex Border Sacrum NEU ab August 2018						
28 24 50	16 x 20 cm	120 cm ²	35.05.03.10.1	7367519	5	30
28 20 50	22 x 25 cm	240 cm ²	35.05.03.10.1	7367502	5	40
Mepilex Border Heel NEU ab August 2018						
28 27 50	22 x 23 cm	189 cm ²	35.05.03.11.1	7367525	6	30

Mepilex® Border Sacrum

Spezialform für den Sakralbereich




Mepilex® Border Heel

Innovative Spezialform für die Ferse



Dünnere, selbsthaftender Schaumverband

Mepilex Border Lite ist ein dünner, selbsthaftender Polyurethanschaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht exsudierender Wunden. Der Hafttrand mit Safetac Technologie sorgt für die schonende und dennoch sichere Fixierung, ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel und schützt das wundumgebende Gewebe vor Schädigung und Mazeration.

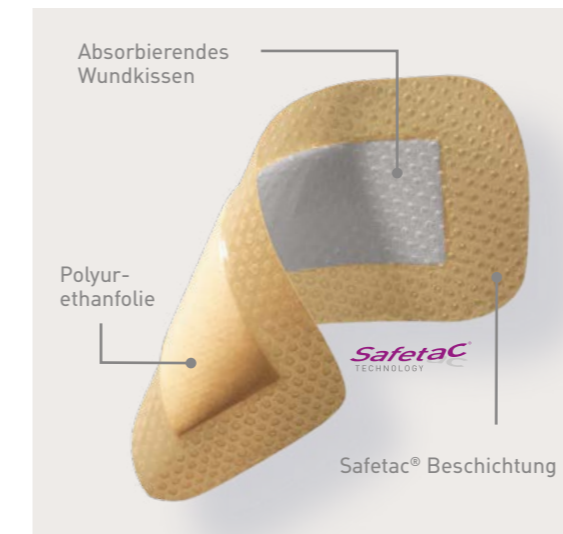

Beispiele für Anwendungsgebiete



Vorteile

- flexibler Einsatz durch umfangreiches Grössensortiment
- gute Haftung für eine sichere Anwendung
- atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- nicht bis leicht exsudierende Wunden
- chronische Wunden, z.B. diabetisches Fussyndrom
- traumatische Wunden, z.B. Schnitt- und Schürfwunden
- epithelisierende Wunden

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Grösse Wundkissen	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
28 10 00	4 x 5 cm	2 x 3 cm	35.05.03.01.1	3034436	10	70
28 11 00	5 x 12,5 cm	2,5 x 8,5 cm	35.05.03.02.1	3034442	5	65
28 12 00	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	35.05.03.02.1	3034459	5	70
28 13 00	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	35.05.03.03.1	3034465	5	50
28 15 00	15 x 15 cm	11 x 11 cm	35.05.03.04.1	3034471	5	50

Steril – einzeln verpackt



Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.


Mepilex® Border Post-Op

Selbsthaftender, flexibler Komplettverband für chirurgische Wunden

Mepilex Border Post-Op ist ein Komplettverband für chirurgische Wunden, der Exsudat sehr effektiv absorbiert und zuückhält. Der Verband minimiert die Bildung von Spannungsblasen und verhindert Schmerzen und Trauma beim Verbandwechsel.



NEU

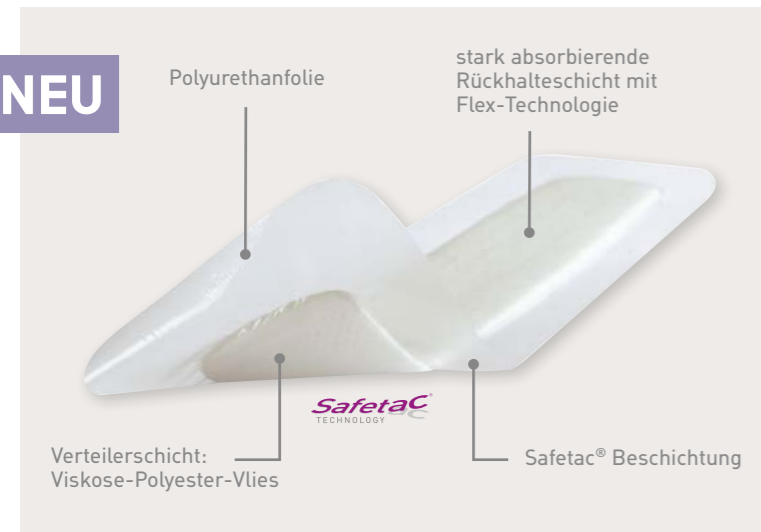

Zwei randomisierte Studien Eine prospektive Studie Eine Beobachtungsstudie

Vier unabhängige Studien kamen zu dem Ergebnis, dass Patienten, die mit Mepilex Border Post-Op behandelt wurden, **keine Anzeichen von Blasenbildung oder Hautschäden zeigten.**

Vorteile

- Überlegenes Exsudatmanagement dank Superabsorber-Fasern für längere Tragezeiten und weniger Verbandwechsel
- Einzigartiges flexibles Flex-Cut Wundkissen, in alle Richtungen dehnbar
- Duschfeste und atmungsaktive Aussenfolie
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Chirurgische Wunden, wie z.B. Hüft- und Knie-Operationen

Beispiele für Anwendungsgebiete



Mepilex® Border Post-Op am Knie

chirurgische Wunde

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Grösse Wundkissen	Absorption	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
49 61 00	6 x 8 cm	3 x 5 cm	Mittel-hoch	35.05.03.02.1	7073203	10	80
49 62 00	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm	Mittel-hoch	35.05.03.03.1	7073226	10	70
49 63 00	10 x 15 cm	4,5 x 10 cm	Mittel-hoch	35.05.03.03.1	7073232	10	100
49 64 00	10 x 20 cm	4,5 x 14,5 cm	Hoch	35.05.03.04.1	7073249	10	120
49 64 50	10 x 25 cm	4,5 x 19,5 cm	Hoch	35.05.03.04.1	7073255	10	60
49 66 00	10 x 30 cm	4,5 x 24 cm	Hoch	35.05.03.05.1	7073261	10	40
49 66 50	10 x 35 cm	4,5 x 29 cm	Hoch	35.05.03.05.1	7073278	5	55

Steril – einzeln verpackt



Mextra® Superabsorbent



Superabsorbierender Wundverband mit flüssigkeitsabweisendem Deckvlies

Mextra Superabsorbent ist ein superabsorbierender Verband, der Wundexsudat über die Wundkontaktschicht absorbiert und zuverlässig in seinem Kern festhält. Das flüssigkeitsabweisende Deckvlies fungiert als Exsudatbarriere und verhindert das Durchtreten von Exsudat nach oben.



Ergänzungsprodukte als möglicher Primärverband

Wundkontaktauflagen, wie z.B.
Mepilex® Transfer
Mepilex® Transfer Ag
Mepitel® | Mepitel® One

ODER

Exufiber®

Ergänzungsprodukte zur Fixierung **Tubifast®**
WITH 2-WAY STRETCH TECHNOLOGY

Vorteile

- Hohes Rückhaltevermögen
- Erhöhte Absorptionskapazität
- Sanft und anpassungsfähig
- Schützt den Wundumgebungsbereich

Anwendungsgebiete

- Stark bis sehr stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z.B. Ulcus cruris, Dekubitus
- Wunden in der Reinigungsphase
- Tumorwunden
- Wunden, verursacht durch lymphatische Stauungen

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Grösse Wundkissen	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
61 00 00	12,5 x 12,5 cm	9,5 x 9,5 cm	35.05.05.03.1	6994579	10	50
61 01 00	12,5 x 17,5 cm	9,5 x 14,5 cm	35.05.05.04.1	6994585	10	40
61 02 00	12,5 x 22,5 cm	9,5 x 19,5 cm	35.05.05.04.1	6994591	10	90
61 03 00	17,5 x 22,5 cm	14,5 x 19,5 cm	35.05.05.05.1	6994616	10	40
61 04 00	22,5 x 27,5 cm	19,5 x 24,5 cm	35.05.05.06.1	6994622	10	40
61 05 00	22,5 x 32,5 cm	19,5 x 29,5 cm	35.05.05.06.1	6994639	10	50
61 06 00	22,5 x 42,5 cm	19,5 x 39,5 cm	35.05.05.08.1	6994645	10	50

Steril – einzeln verpackt

Informationen zu Mepilex Transfer erhalten Sie auf Seite 28, zu Mepilex Transfer Ag auf Seite 20, zu Mepitel und Mepitel One auf Seite 24, zu Exufiber auf Seite 30. Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 34.

Mesorb®



Hochabsorbierender Saugverband mit flüssigkeitsundurchlässiger Exsudatbarriere

Mesorb ist ein weicher, hochabsorbierender Saugverband, welcher sehr grosse Mengen von Exsudat aufnimmt. Die flüssigkeitsundurchlässige Exsudatbarriere verhindert die Verschmutzung von Bekleidung und Bettwäsche. Mesorb kann bis zu 7 Tage getragen werden, abhängig vom Zustand der Wunde und der Haut oder in Absprache mit medizinischem Fachpersonal.



Ergänzungsprodukte als möglicher Primärverband

Wundkontaktauflagen, wie z.B.
Mepilex® Transfer
Mepilex® Transfer Ag
Mepitel® | Mepitel® One

Vorteile

- Hochabsorbierend
- Gute Polsterwirkung
- Hoher Tragekomfort
- Kosteneffizient
- MVTR - g/m²/24h: 53000

Anwendungsgebiete

- Stark exsudierende Wunden
- Kann als Primärverband verwendet werden
- Kann als Sekundärverband zusammen mit Mepitel® oder Mepilex® Transfer verwendet werden.

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
67 70 01	10 x 13 cm	35.01.04.01.1	6982145	50	400
67 72 01	13 x 15 cm	35.01.04.02.1	7076555	50	300
67 74 01	10 x 23 cm	35.01.04.02.1	7005489	50	300
67 76 01	15 x 23 cm	35.01.04.03.1	6991919	50	300
67 77 01	23 x 25 cm	35.01.04.04.1	3753935	30	120
67 78 01	30 x 23 cm	35.01.04.05.1	1409665	30	120

Steril – einzeln verpackt

Informationen zu Mepilex Transfer erhalten Sie auf Seite 28, zu Mepitel auf Seite 24.



Antimikrobieller Schaumverband mit Silber

Mepilex Ag ist ein antimikrobieller Polyurethanschaumverband mit Silbersulfat, zur Versorgung kritisch kolonisierter und infizierter, oberflächlicher Wunden. Sobald der Verband mit dem Exsudat in Berührung kommt, werden Silberionen freigesetzt, die wundspezifische Erreger innerhalb von 30 Minuten bis zu 7 Tage effektiv inaktivieren.



Ergänzungsprodukt zur Fixierung:



Beispiele für Anwendungsgebiete



Ulcus cruris mixtum



Funktionsweise von Mepilex Ag

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
28 70 21	6 x 8,5 cm	3686564	5	35
28 71 10	10 x 10 cm	3516750	5	70
28 72 10	10 x 20 cm	3516767	5	45
28 73 10	15 x 15 cm	6863251	5	35
28 74 10	20 x 20 cm	3516796	5	25
28 75 10	20 x 50 cm	3984066	2	12

Steril – einzeln verpackt

Vorteile

- Verträgliche und verordnungsfähige Silberverbindungen (Silbersulfat)
- Schnelle (30 Min.) und lang anhaltende (bis 7 Tage) antimikrobielle Wirkung
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete


- Mittelstark exsudierende Wunden
- Infizierte Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom
- Verbrennungen bis Grad 2a



Bestellen Sie jetzt Ihren kostenlosen Ratgeber für **thermische Verletzungen** per Mail: info.ch@molnlycke.com

Drainagefähiger, antimikrobieller Schaumverband mit Silber

Versorgung von kritisch kolonisierten und infizierten Wunden, die leicht bis stark exsudieren. Sobald der Verband mit Exsudat in Kontakt kommt, werden Silberionen freigesetzt, die wundspezifische Erreger innerhalb von 30 Minuten effektiv inaktivieren. Das Exsudat wird in den Sekundärverband weitergeleitet.

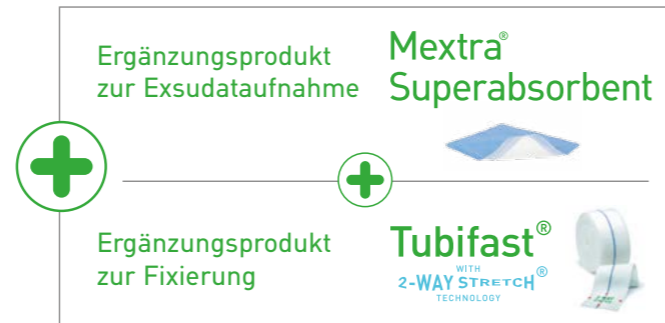

Beispiele für Anwendungsgebiete



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
39 40 00	7,5 x 8,5 cm	5602382	10	70
39 41 00	10 x 12,5 cm	5602399	5	50
39 48 00	15 x 20 cm	5602413	10	50
39 45 00	20 x 50 cm	5602407	2	12

Steril – einzeln verpackt

Vorteile

- Verträgliche und verordnungsfähige Silberverbindungen (Silbersulfat)
- Schnelle (30 Min.) und lang anhaltende (bis 14 Tage) antimikrobielle Wirkung
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Leicht bis sehr stark exsudierende Wunden
- Infizierte Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko
- Verbrennungen bis Grad 2a
- Chronische Wunden, wie z.B. diabetisches Fussyndrom, Ulcus cruris, Dekubitus
- Hautentnahmestellen
- Exulzierende Tumorwunden



Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.

Informationen zum Sekundärverband Mextra Superabsorbent erhalten Sie auf Seite 16. Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 34.



Antimikrobieller Alginatverband

Melgisorb Ag ist ein hochabsorbierender, antimikrobieller Kalzium-Alginatverband zur Versorgung von kritisch kolonisierten und infizierten oberflächlichen sowie tiefen Wunden. Die Strukturstabilität der Fasern ermöglicht die rückstandsarme Entfernung beim Verbandwechsel.



Vorteile

- Absorbiert mehr als 45%* andere silberhaltige Verbände
- Strukturstabilität: die hohe Strukturstabilität der Fasern ermöglicht die rückstandsarme Entfernung in einem Stück
- Schnelle und anhaltende antimikrobielle Wirkung


* Im Vergleich zu silberhaltigen Hydrofaserverbänden - data on file

Anwendungsgebiete


- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Oberflächliche Wunden und Wundhöhlen
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Dekubitus, Diabetisches Fussyndrom
- Hautentnahmestellen
- Traumatische Wunden
- Verbrennungen bis Grad 2a

Informationen zu Mepilex Border Flex erhalten Sie auf Seite 10, zu Mextra Superabsorbent auf Seite 16. Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 34.

Ergänzungsprodukte zur Exsudataufnahme

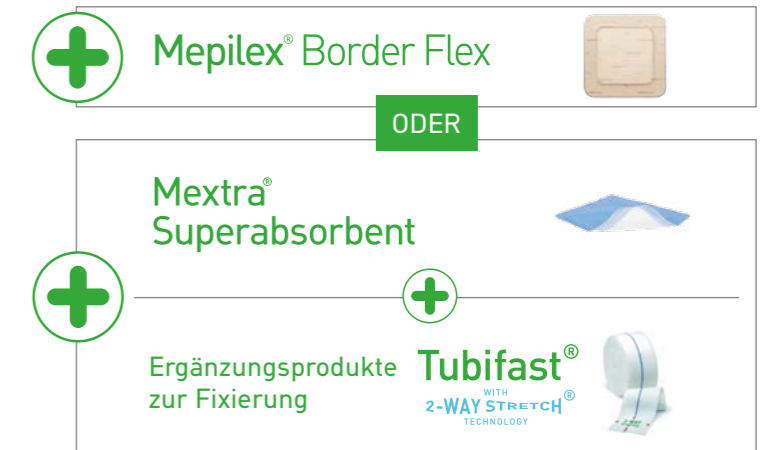

Beispiele für Anwendungsgebiete

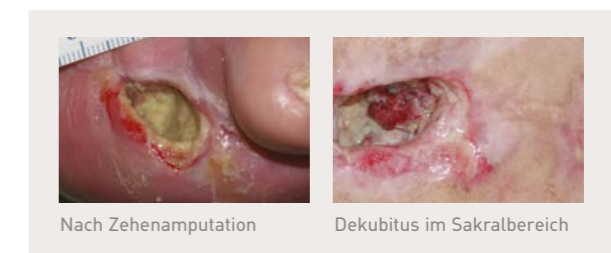

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
Kompressen				
25 60 55	5 x 5 cm	7082662	10	100
25 61 05	10 x 10 cm	7082679	10	100
25 61 55	15 x 15 cm	7082685	10	100
Tamponade				
25 66 05	3 x 44 cm	7082691	10	100

Steril – einzeln verpackt

Mepilex® Border Ag



Selbsthaftender, hochabsorbierender, antimikrobieller Schaumverband

Mepilex Border Ag ist ein selbsthaftender, hochabsorbierender Kompletverband mit Silbersulfat zur Versorgung kritisch kolonisierter und infizierter oberflächlicher Wunden. Mepilex Border Ag inaktiviert wundspezifische Erreger innerhalb von 30 Minuten und bis zu 7 Tage. Durch die Reduzierung der Mikroorganismen reduziert Mepilex Border Ag automatisch den Geruch. Der integrierte Superabsorber verhindert auch unter Kompression ein Auslaufen und eine Rücknässung des Verbandes.



Mepilex® Border Sacrum Ag Spezialform für den Sakralbereich



Beispiele für Anwendungsgebiete



infiziertes Ulcus cruris venosum



Mepilex Border Ag



Dekubitus der Ferse



Ulcus cruris venosum

Vorteile

- Verträgliche und verordnungsfähige Silberverbindungen (Silbersulfat)
- Schnelle (30 Min.) und lang anhaltende (bis 7 Tage) antimikrobielle Wirkung
- Sehr hohes Absorptionsvermögen durch integrierten Superabsorber für längere Verbandwechselintervalle und Kosteneffizienz
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Infizierte Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko
- Verbrennungen bis Grad 2a
- Chronische Wunden, wie z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, diabetisches Fussyndrom

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Grösse Wundkissen	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
39 52 00	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	4677277	5	70
39 53 00	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	4677283	5	50
39 54 00	15 x 15 cm	11 x 11 cm	4677231	5	50

Mepilex Border Sacrum Ag

38 20 00	18 x 18 cm	120 cm ²	4677225	5	40
----------	------------	---------------------	---------	---	----

Steril – einzeln verpackt

Mepitel® & Mepitel® One

Beidseitig & einseitig beschichtete Wundkontaktauflage

Mepitel mit Safetac Technologie ist das weltweit erste moderne Wunddistanzgitter seiner Art. Dank Safetac steht Mepitel für ungestörte Wundruhe und kosteneffiziente Versorgung. Die innovative Weiterentwicklung Mepitel One gewährleistet eine sehr hohe Transparenz und eine besonders einfache Handhabung.

Bis zu 14 Tage ungestörte Wundheilung und weniger Schmerzen beim Verbandwechsel

Mepitel®

Beidseitig beschichtetes Wunddistanzgitter mit Safetac® Technologie

Safetac®
TECHNOLOGY

- Für nicht bis stark exsudierende Wunden und auch auf freiliegenden Strukturen (Sehnen, Knochen, Muskeln) anwendbar
- Kein Verrutschen von Primär- und Deckverband

Mepitel® One

Einseitig beschichtetes Wunddistanzgitter mit Safetac® Technologie

Safetac®
TECHNOLOGY

- Für nicht bis stark exsudierende Wunden – allein oder in Kombination mit einem Deckverband
- Besonders einfache Applikation

Die Vorteile auf einen Blick:




Mepitel One auf Verbrennungen



Sehr guter Exsudattransfer und topische Anwendung von Substanzen möglich dank offener Netzstruktur



Wundbegutachtung ohne Verbandwechsel möglich

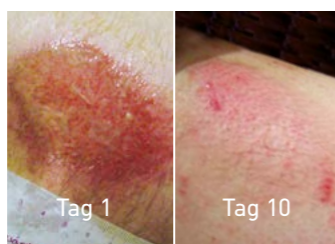


Gute Wundheilungstendenz

Klinische Evidenz – für mehr Sicherheit!

98
Publikationen zu Mepitel und/oder Mepitel One



Kombinationsmöglichkeit

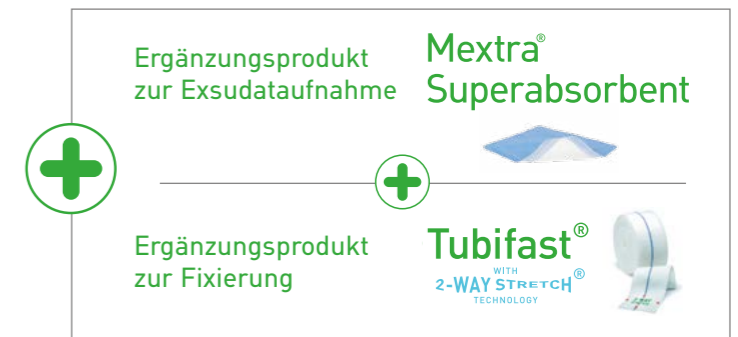

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video Mepitel One.



Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video Mepitel.



Mepitel®

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
29 05 00	5 x 7 cm	35.05.08.01.1	6855837	5	25
29 07 00	8 x 10 cm	35.05.08.02.1	6863280	5	50
29 10 00	12 x 15 cm	35.05.08.03.1	3628294	5	60
29 20 30	20 x 32 cm	35.05.08.05.1	3628302	5	30

Steril – einzeln verpackt

Mepitel® One

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
28 90 00	5 x 7 cm	35.05.08.01.1	4379485	5	70
28 92 00	8 x 10 cm	35.05.08.02.1	4379491	5	50
28 94 00	12 x 15 cm	35.05.08.03.1	4379516	5	50
28 96 50	18 x 27,5 cm	35.05.08.04.1	4379522	5	40

Steril – einzeln verpackt

Informationen zum Sekundärverband Mextra Superabsorbent erhalten Sie auf Seite 16. Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 34.

Mepitel® Film




Hautschützendes Folienverband

Mepitel Film ist ein sanfter, transparenter, atmungsaktiver Folienverband mit Safetac Technologie. Er kann als sanfter Hautschutz im Bereich von reibungs-, scherkraft- und mazerationsgefährdeten Körperstellen oder für die Versorgung oberflächlicher Wunden angewendet werden.



Beispiele für Anwendungsgebiete

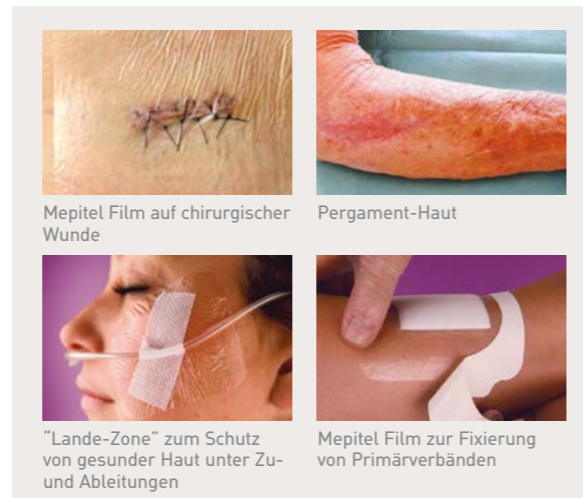

Vorteile von Mepitel Film

- Sichere und einfache Anwendung dank des Applikationsrahmens
- Rückstandsloses Entfernen
- Hautähnliches Gefühl
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Nicht exsudierende Wunden
- Dekubitus Kategorie 1 & 2
- Hautschutz bei empfindlicher Haut und im Bereich von reibungs-, scherkraft- und mazerationsgefährdeten Körperstellen
- „Lande-Zone“ für Fixierung von medizinischen Produkten
- Prävention von strahleninduzierten Hautschäden

Bestellinformationen


Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
29 61 70	6 x 7 cm	35.05.10.20.1	5153636	10	50
29 62 70	10 x 12 cm	35.05.10.22.1	5153642	10	70
29 64 70	10 x 25 cm	35.05.10.23.1	5153659	10	50
29 66 70	15 x 20 cm	35.05.10.24.1	5153665	10	70

Steril – einzeln verpackt



Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.

Mepore® Film

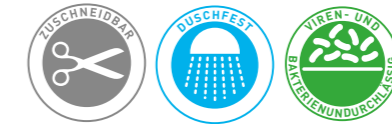

Atmungsaktiver, transparenter Folienverband

Mepore Film ist ein selbstklebender, atmungsaktiver Folienverband zur Versorgung sauberer, epithelisierender Wunden. Der Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis gewährleistet eine schonende Anwendung sowie sichere Fixierung.



Vorteile

- Begutachtung der Wunde möglich
- Schützt vor Kontamination und Flüssigkeit
- Sichere, hautfreundliche Fixierung
- Einfache Anwendung dank Applikationsrahmens

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
27 06 00	6 x 7 cm	35.05.10.01.1	3531749	100	600
27 06 70	6 x 7 cm	35.05.10.01.1	3531755	10	50
27 15 00	10 x 12 cm	35.05.10.03.1	3531695	70	210
27 15 70	10 x 12 cm	35.05.10.03.1	3531761	10	70
27 25 00	10 x 25 cm	35.05.10.04.1	3531703	20	100
27 25 70	10 x 25 cm	35.05.10.04.1	3531778	10	50
27 30 00	15 x 21 cm	35.05.10.05.1	3531732	10	50

Steril – einzeln verpackt

Anwendungsgebiete

- Abdeckung und Fixierung von Primärverbänden, wie z.B. Hydrogelen, Alginaten oder Schaumverbänden
- Saubere Wunden in der Epithelisierungsphase

Mepore® Film Roll



Unsteriler, transparenter Folienverband auf der Rolle

Mepore Film Roll ist ein unsteriler, selbstklebender, atmungsaktiver Folienverband, der sich ideal für die Fixierung von Verbänden, Schläuchen und Kanülen eignet.



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
27 61 05	5 cm x 10 m	35.05.10.12.1	4677165	1	24
27 61 10	10 cm x 10 m	35.05.10.13.1	6847430	1	12
27 61 15	15 cm x 10 m	35.05.10.14.1	4677113	1	8

Unsteril – im Spenderkarton

Anwendungsgebiete

- Fixierung von Verbänden, Schläuchen und Kanülen
- Prävention vor Hautdegeneration
- Schutz fragiler Haut vor äusserer Kontamination

Mepilex® Transfer



Drainagefähiger Schaumverband

Mepilex Transfer ist ein dünner, durchlässiger Polyurethanschaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht bis sehr stark exsudierender Wunden. Der Verband leitet Exsudat zuverlässig in einen Sekundärverband weiter. Er dient insbesondere zum Abdecken grosser Haut- und Wunddefekte.



Beispiele für Anwendungsgebiete



Vorteile

- Hohe Wirtschaftlichkeit besonders bei stark exsudierenden Wunden
- Bei unterschiedlichen Exsudatmengen einsetzbar
- Äusserst flexibel und anpassungsfähig
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Leicht bis sehr stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Gamaschenulcera
- Tumorwunden / exulzierende Tumore
- Strahleninduzierte Hautschäden
- Verbrennungen bis Grad 2a
- Epidermolysis Bullosa

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
29 47 00	10 x 12 cm	35.05.03.03.1	3516827	5	50
29 48 00	15 x 20 cm	35.05.03.05.1	2619301	5	40
29 45 02	20 x 50 cm	35.05.03.08.1	5539778	4	24

Steril – einzeln verpackt



Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.

Informationen zum Sekundärverband Mextra Superabsorbent erhalten Sie auf Seite 16. Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 34.

Melgisorb® Plus



Absorbierender Alginatverband

Hochabsorbierender Kalzium-Natrium-Alginatverband zur Versorgung von exsudierenden, oberflächlichen und tiefen Wunden.



Vorteile

- Hoch absorbierend
- Bildet ein Gel in Kontakt mit Wundflüssigkeit oder NaCl-haltigen Lösungen
- Verklebt durch Vergelen nicht mit dem feuchten Wundbett

Ergänzungsprodukte zur Exsudataufnahme



Anwendungsgebiete

- Mittel bis stark exsudierende Wunden
- Oberflächliche Wunden und Wundhöhlen
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Dekubitus, diabetisches Fussyndrom
- Hautentnahmestellen
- Traumatische Wunden

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
Kompressen					
25 20 00	5 x 5 cm	35.05.06.01.1	5967184	10	100
25 22 00	10 x 10 cm	35.05.06.02.1	5967190	10	100
25 25 00	10 x 20 cm	35.05.06.03.1	5967209	10	100
Tamponade					
25 35 00	3 x 45 cm	35.05.06.08.1	5967215	5	50


Steril – einzeln verpackt

Informationen zu Mepilex Border Flex erhalten Sie auf Seite 10, zu Mextra Superabsorbent auf Seite 16. Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 34.




Gelbildender Faserverband

Exufiber ist ein gelbildender Faserverband mit patentierter Hydrolock®-Technologie und besteht aus hoch absorbierenden Polyvinylalkohol-Fasern (PVA). Exufiber ist für eine Vielzahl oberflächlicher und tiefer exsudierender Wunden geeignet. Für Absorption und Retention von Exsudat, Blut und Bakterien.

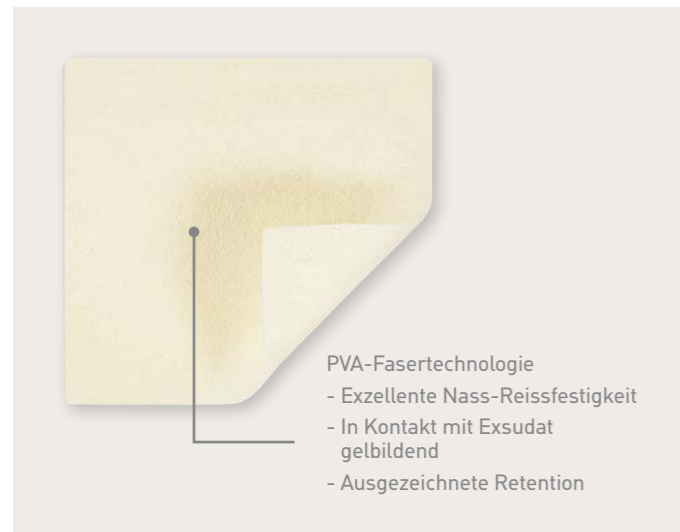

Ergänzungsprodukte

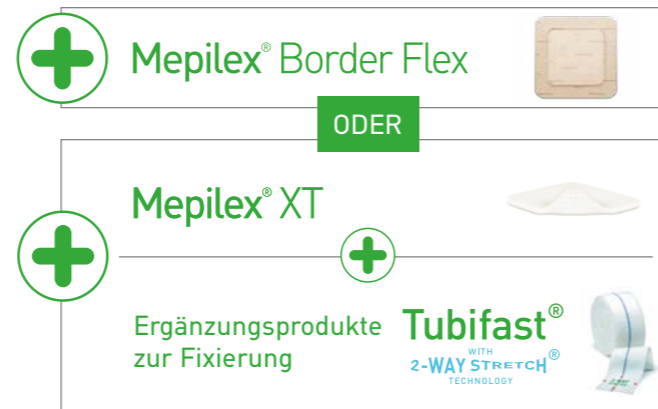

Vorteile

- Überlegenes Rückhaltevermögen
- Hohe Nassreissfestigkeit
- Hohe Absorption von Exsudat, Blut und Bakterien
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit

Anwendungsgebiete

- Stark exsudierende Wunden
- Oberflächliche Wunden und Wundhöhlen
- Chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Dekubitus, diabetisches Fussyndrom
- Oberflächliche Verbrennungen
- Chirurgische Wunden
- Hautentnahmestellen
- Palliative Wunden

Beispiele für Anwendungsgebiete



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/Packung	Stück/Karton
Kompressen					
60 33 00	5 x 5 cm	35.05.07.01.1	6202839	10	40
60 33 01	10 x 10 cm	35.05.07.02.1	6202845	10	60
60 33 02	15 x 15 cm	35.05.07.04.1	6202851	10	60
Tamponade					
60 33 08	2 x 45 cm	35.05.07.09.1	6481130	5	20

Steril – einzeln verpackt

Informationen zu Mepilex Border Flex erhalten Sie auf Seite 10, zu Mepilex XT auf Seite 6. Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 34.

Mepore® Film&Pad



Transparenter, absorbierender Wundverband



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
27 51 00	4 x 5 cm	35.05.10.01.1	3686185	85	340
27 51 10	4 x 5 cm	35.05.10.01.1	3755897	5	70
27 52 00	5 x 7 cm oval	35.05.10.01.1	3686305	85	340
27 52 10	5 x 7 cm oval	35.05.10.01.1	3755905	5	70
27 53 00	5 x 7 cm square	35.05.10.01.1	3686328	85	340
27 53 10	5 x 7 cm square	35.05.10.01.1	3755911	5	70
27 54 00	9 x 10 cm	35.05.10.02.1	3686340	30	180
27 54 10	9 x 10 cm	35.05.10.02.1	3755940	5	50
27 55 00	9 x 15 cm	35.05.10.03.1	3686357	30	240
27 55 10	9 x 15 cm	35.05.10.03.1	3755957	5	50
27 56 00	9 x 20 cm	35.05.10.04.1	3686452	30	240
27 56 10	9 x 20 cm	35.05.10.04.1	3755963	5	40
27 57 00	9 x 25 cm	35.05.10.04.1	3686469	30	150
27 58 00	9 x 30 cm	35.05.10.05.1	3686475	25	125
27 59 00	9 x 35 cm	35.05.10.06.1	3686481	25	100

Steril – einzeln verpackt

Mepore®



Selbstklebender, absorbierender Wundverband



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
67 08 00	6 x 7 cm	34.42.02.01.1	1606466	60	480
67 08 70	6 x 7 cm	34.42.02.01.1	3687279	10	140
67 09 00	10 x 9 cm	34.42.02.03.1	1606472	50	400
67 09 70	10 x 9 cm	34.42.02.03.1	3687285	5	100
67 10 00	15 x 9 cm	34.42.02.04.1	1606489	50	400
67 10 70	15 x 9 cm	34.42.02.04.1	3687316	5	70
67 11 00	20 x 9 cm	34.42.02.05.1	1636154	30	180
67 11 70	20 x 9 cm	34.42.02.05.1	3687291	5	70
67 12 00	25 x 9 cm	34.42.02.06.1	1636160	30	210
67 13 00	30 x 9 cm	34.42.02.07.1	1636177	30	270

Steril – einzeln verpackt

Rollen

33 19 00	4 cm x 5 m	34.40.01.04.1	1172269	1	24
33 20 00	7 cm x 5 m	34.40.01.04.1	1170365	1	18

Unsteril

Mepore® Pro



Wasserfester, selbstklebender Wundverband



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
67 08 20	6 x 7 cm	34.42.02.01.1	2219665	60	480
68 08 40	6 x 7 cm	34.42.02.01.1	3687227	10	140
67 09 20	10 x 9 cm	34.42.02.03.1	3121342	40	320
68 09 40	10 x 9 cm	34.42.02.03.1	3687233	10	200
67 10 20	15 x 9 cm	34.42.02.04.1	3121365	40	320
68 10 40	15 x 9 cm	34.42.02.04.1	3687256	10	140
67 11 20	20 x 9 cm	34.42.02.05.1	2219694	30	180
68 11 40	20 x 9 cm	34.42.02.05.1	3687262	10	140
67 12 20	25 x 9 cm	34.42.02.06.1	2219702	30	210
67 13 20	30 x 9 cm	34.42.02.07.1	2219719	30	270

Steril – einzeln verpackt

Mepore® IV



Transparenter, atmungsaktiver Kanülenfixierverband



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
27 40 00	5,5 x 5 cm	35.05.10.01.1	3396091	100	600
27 42 00	8 x 9 cm	35.05.10.02.1	3396116	70	210
27 44 00	10 x 11 cm	35.05.10.03.1	3396122	70	210

Steril – einzeln verpackt

Tubifast® & Tubifast® Garments



Elastischer Schlauchverband

Tubifast 2-Way Stretch ist ein elastischer längs- und querdehnbarer Schlauchverband, der sich für die Sicherung von Primärverbänden, wie z.B. Mepilex, Mepilex Lite, Mextra Superabsorbent oder anderen medizinischen Produkten eignet.



Vorteile

- Längs- und Querdehnbarkeit für sichere Fixierung
- Gute Elastizität für ausreichende Bewegungsfreiheit

Anwendungsgebiete

- Sicherung von Primärverbänden und anderen medizinischen Produkten


Fasergehalt:
Viskose, Elastan, Polyamid

Bestellinformationen Tubifast

Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedmasse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
10 m Länge						
24 34	Rot (3,5 cm)	9 - 18 cm	34.30.01.03.1	3516715	1	20
24 36	Grün (5 cm)	14 - 24 cm	34.30.01.03.1	3516721	1	24
24 38	Blau (7,5 cm)	24 - 40 cm	34.30.01.05.1	3516738	1	30
24 40	Gelb (10,75 cm)	35 - 64 cm	34.30.01.06.1	3516690	1	12
24 44	Violett (20 cm)	64 - 130 cm	34.30.01.07.1	7084193	1	15

Unsteril – 10 m-Produkte auf Rolle

Größen- und Anwendungsübersicht

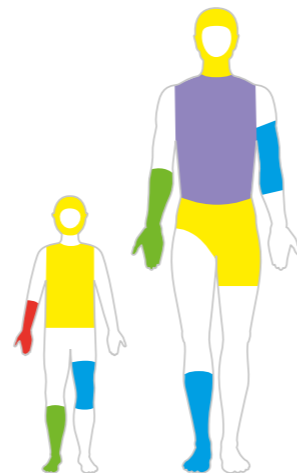

Erstattungsfähig, Zuschnittmuster. Die 1 m-Längen Tubifast sind auch einzeln verordnungs- und abgabefähig.

Beispiele für Anwendungsgebiete



Gelber Streifen

Anwendung am Kopf



Violetter Streifen

Anwendung am Oberkörper



Grüner Streifen

Anwendung an der Hand



Gelber Streifen


Anwendung an der Hüfte



Blauer Streifen

Anwendung am Bein

Tubifast® Garments

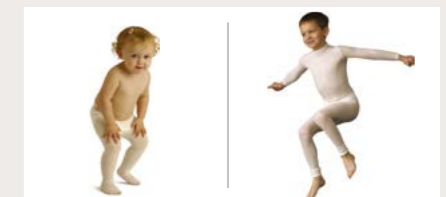

Bestellinformationen Tubifast Garments

Art.-Nr.	Produkt/ Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung	Stück/ Karton
99 20 07	Unterhemd 6-24 Monate	6570230	6	30
99 20 08	Unterhemd 2-5 Jahre	6570247	6	30
99 20 09	Unterhemd 5-8 Jahre	6570253	6	30
99 20 10	Unterhemd 8-11 Jahre	6570276	6	30
99 20 11	Unterhemd 11-14 Jahre	6570282	6	30
99 20 12	Strumpfhose 6-24 Monate	6570649	6	30
99 20 13	Strümpfe 2-5 Jahre	6570655	6	30
99 20 14	Strümpfe 5-8 Jahre	6570661	6	30
99 20 15	Strümpfe 8-11 Jahre	6570678	6	30
99 20 16	Strümpfe 11-14 Jahre	6570684	6	30
99 20 17	Socken 2-14 Jahre	6570690	6	42
59 22	Handschuhe, XS Kind	6570201	6	42
59 23	Handschuhe, S Kind	6570193	6	42
59 21	Handschuhe, M/L Kind - S/M Erwachsener	6570218	6	42
59 20	Handschuhe M/L Erwachsener	6570224	6	42



Wichtige Information:

Bitte wählen Sie die Tubifast-Kleidung der Grösse und dem Alter des Kindes entsprechend. Im Zweifel über die richtige Grösse sollte ein Kleidungsstück der nächsthöheren Grösse gewählt werden. Trägt das Kind Windeln unter Tubifast Garments, muss dies bei der Wahl der richtigen Grösse berücksichtigt werden.

Unsere Tubifast Garments sind erhältlich bei Publicare.
www.publicare.ch • Tel: 056 484 15 00

Mepitac®



Fixierverband

Mepitac ist die ideale und schonende Fixiermöglichkeit für Patienten mit empfindlicher und fragiler Haut.



Beispiele für Anwendungsgebiete



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
29 83 00	2 x 300 cm	34.40.02.01.1	2910982	1	12
29 84 00	4 x 150 cm	34.40.02.01.1	2911007	1	12

Unsteril – auf Rolle

Anwendungsgebiete

- Fixierung von z.B. Schläuchen, Verbänden, Sonden, Elektroden, IV Kanülen

Vorteile

- Rückstandsfreies Entfernen
- Sehr geringes Allergiepotehtial, atmungsaktiv und wasserabweisend
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Mefix®



Fixiervlies

Luftdurchlässiges und querdehnbares Vlies zur Fixierung von Verbänden und /oder medizinischen Produkten. Der Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis gewährleistet eine schonende Anwendung.



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
31 02 50	2,5 cm x 10 m	34.40.04.01.1	895698	1	39
31 05 00	5 cm x 10 m	34.40.04.02.1	863770	1	20
31 10 00	10 cm x 10 m	34.40.04.03.1	863787	1	20
31 15 00	15 cm x 10 m	34.40.04.04.1	860518	1	20
31 20 00	20 cm x 10 m	34.40.04.05.1	895706	1	10
31 30 00	30 cm x 10 m	34.40.04.06.1	1085607	1	10

Unsteril – auf Rolle

Anwendungsgebiete

- Fixierung von Verbänden, Kompressen, Kathetern und Kanülen
- Ideal für den Nacken, Ellenbogen und Kniebereich

Vorteile

- Schonende Anwendung dank hautfreundlichem Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis

Mepiform®



Selbsthaftender Verband zur Narbenbehandlung

Mepiform ist ein dünner und komfortabler Verband mit Safetac Technologie, der zur Behandlung von alten und frischen hypertrophen Narben und Keloiden geeignet ist.



Beispiele für Anwendungsgebiete



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
29 36 00	4 x 30 cm	3780079	5	50
29 37 00	5 x 7,5 cm	6982151	5	25
29 38 00	10 x 18 cm	7050685	5	35

einzel verpackt

Vorteile

- Dünn und diskret
- Einfache Anwendung
- Nachgewiesene Wirksamkeit, klinisch getestet
- Für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandwechsel

Anwendungsgebiete

- Geschlossene, saubere Wunden nach Entfernung von Nahtmaterial
- Reduzierung von alten und frischen, hypertrophen Narben und Keloiden
- Zur Narbenvorbeugung

Steripod®



Wundspülsystem mit physiologischer Kochsalzlösung

Die physiologische Kochsalzlösung Steripod ist eine sterile physiologische Lösung mit 0,9 % Natriumchlorid in Reinstwasser, die in einer Polyethylenampulle verpackt ist. Die leicht zusammendrückbare Ampulle bietet genau die Flexibilität, die zum einfachen wirkungsvollen Spülen erforderlich ist, ohne dass dabei das Gewebe geschädigt oder verletzt wird. Steripod ist isotonisch und für Zellen ungefährlich. Da die Ampullen steril, in sich geschlossen und als Einwegprodukt konzipiert sind, entsteht relativ wenig Abfall, und das Risiko einer Kreuzkontamination ist sehr gering.



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Stück/ Packung	Stück/ Karton
50 10 00	20 ml	25	400



Gazetupfer und Kompressen

Die Tupfer und Kompressen sind aus einem Verbandsmull mit 17 Fäden pro cm² hergestellt und finden breite Anwendung im Bereich Wundreinigung, Hautreinigung vor chirurgischen Eingriffen, als Verband als solches und zur Absorption von Körperflüssigkeiten in Wunden.



Eigenschaften von Gauze

- Ohne Chlor gebleicht
- 100% Baumwolle
- Enthält keine Bindemittel
- Nicht toxisch
- Nicht sensibilisierend
- Zusammensetzung gemäss European Pharmacopiea

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
15 08 00	Gaze-Rundtupfer Nr. 3, ø ca. 2,8 cm, unsteril	n/a	4765308	250	3000
15 08 60	Gaze-Rundtupfer Nr. 3, ø ca. 2,8 cm, steril, Beutel à 5 Stk.	n/a	4765314	150	1500
15 13 00	Gaze-Rundtupfer Nr. 4, ø ca. 6,8 cm, unsteril	n/a	4765320	100	1500
15 13 60	Gaze-Rundtupfer Nr. 4, ø ca. 6,8 cm, steril, Beutel à 5 Stück	n/a	n/a	120	1200
15 17 00	Gaze-Flachtupfer Nr. 3, 25x25 mm, unsteril	n/a	4765283	500	10000
15 30 40	Gaze-Kompressen 5x5cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 2 Stk.	34.01.01.01.1	4765627	100	2000
15 30 65	Gaze-Kompressen 5x5cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 5 Stk.	34.01.01.01.1	4765610	120	2400
15 31 00	Gaze-Kompressen 5x5cm, 8 Lagen, unsteril	34.02.02.01.1	4765633	150	7650
15 33 00	Gaze-Kompressen 7x7,5cm, 8 Lagen, unsteril	34.02.02.02.1	4765679	150	3600
15 80 40	Gaze-Kompressen 10x10cm, 8 Lagen, steril, Beutel à 2 Stk.	34.01.01.03.1	4765538	150	1500
15 84 00	Gaze-Kompressen 10x10cm, 12 Lagen, unsteril	34.01.01.03.1	4765521	100	2000
15 84 40	Gaze-Kompressen 10x10cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 2 Stk.	34.01.01.03.1	4765426	100	1000
15 84 65	Gaze-Kompressen 10x10cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 5 Stk.	34.01.01.03.1	4765366	120	1200
15 85 00	Gaze-Kompressen 10x20cm, 12 Lagen, unsteril	34.01.01.04.1	4765596	50	1000
15 85 40	Gaze-Kompressen 10x20cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 2 Stk.	34.01.01.04.1	4765573	100	900
15 85 60	Gaze-Kompressen 10x20cm, 12 Lagen, steril, Beutel à 5 Stk.	34.01.01.04.1	4765544	100	900



Vlieskompressen und Rundtupfer

Mesoft Kompressen und Tupfer sind kostengünstige Alternativen zu den herkömmlichen Baumwollgazeprodukten. Sie zeichnen sich vor allem durch überlegene Absorptionskapazität, Weichheit und geringe Faserfreisetzung aus.



Eigenschaften von Mesoft


- Geringe Partikelfreisetzung
- Wirtschaftlichkeit
- Formbeständigkeit auch im Nasszustand
- Weichheit

Bestellinformationen


Art.-Nr.	Grösse	MiGeL	Pharmacode	Stück/ Packung	Stück/ Karton
15 50 30	Mesoft Vlies-Schlitzkomresse 10x10 cm, steril, Beutel à 1 Stk.	34.02.01.03.1	3082576	130	1950
15 60 15	Mesoft Vlies-Komresse 5x5cm, unsteril	34.02.02.01.1	1678827	100	3200
15 60 40	Mesoft Vlies-Komresse 5x5cm, steril, Beutel à 2 Stk.	34.02.01.01.1	3082010	150	3000
15 60 65	Mesoft Vlies-Komresse 5x5cm, steril, Beutel à 5 Stk.	34.02.01.01.1	3082027	150	3000
15 61 15	Mesoft Vlies-Komresse 7,5x7,5cm, unsteril	34.02.02.02.1	1678810	100	2000
15 61 40	Mesoft Vlies-Komresse 7,5x7,5cm, steril, Beutel à 2 Stk.	34.02.01.02.1	3082582	150	4200
15 61 65	Mesoft Vlies-Komresse 7,5x7,5cm, steril, Beutel à 5 Stk.	34.02.01.02.1	3082599	150	4200
15 63 15	Mesoft Vlies-Komresse 10x10cm, unsteril	34.02.02.03.1	1678804	100	5600
15 63 40	Mesoft Vlies-Komresse 10x10cm, steril, Beutel à 2 Stk.	34.02.01.03.1	3075719	150	3450
15 63 65	Mesoft Vlies-Komresse 10x10cm, steril, Beutel à 5 Stk.	34.02.01.03.1	3066330	150	3450
15 64 15	Mesoft Vlies-Komresse 10x20cm, unsteril	34.02.02.04.1	1678796	100	2800
15 64 40	Mesoft Vlies-Komresse 10x20cm, steril, Beutel à 2 Stk.	34.02.01.04.1	3082607	120	1200
15 64 65	Mesoft Vlies-Komresse 10x20cm, steril, Beutel à 5 Stk.	34.02.01.04.1	3082613	120	1200
15 67 00	Mesoft Vlies-Rundtupfer S, ø ca. 2,5cm, unsteril	n/a	2105111	100	2200
15 67 60	Mesoft Vlies-Rundtupfer S, ø ca. 2,5cm, steril Beutel à 5 Stk.	n/a	3082642	100	2800
15 68 00	Mesoft Vlies-Rundtupfer M, ø ca. 3,5cm, unsteril	n/a	2105128	100	1300
15 68 60	Mesoft Vlies-Rundtupfer M, ø ca. 3,5cm, steril Beutel à 5 Stk.	n/a	3082659	100	1500
15 69 00	Mesoft Vlies-Rundtupfer L, ø ca. 4,5cm, unsteril	n/a	2105134	100	900
15 69 60	Mesoft Vlies-Rundtupfer L, ø ca. 4,5 cm, steril Beutel à 5 Stk.	n/a	3082665	70	1050

Mepilex® XT Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele


Ferse

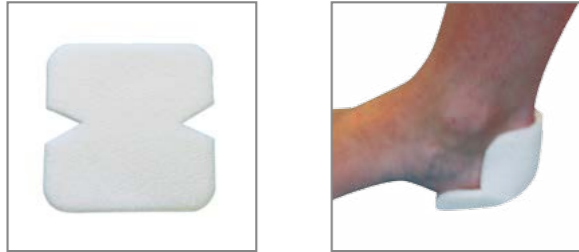


Zehenzwischenräume

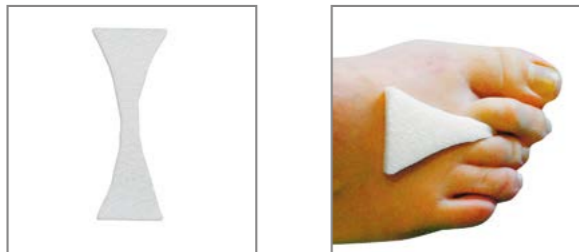

Zeh

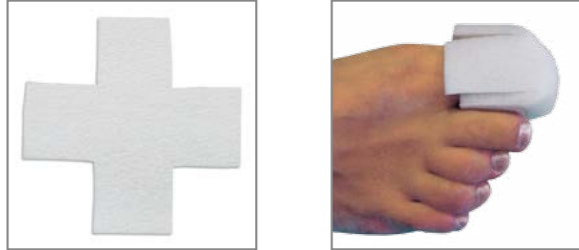

Finger und Zeh

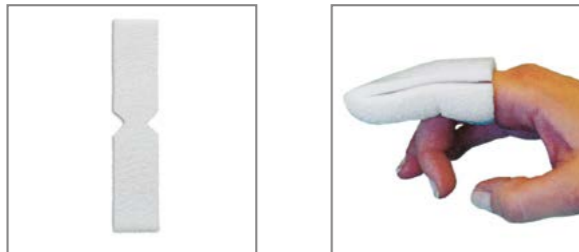


Handzwischenräume



Ellbogen



Achsel

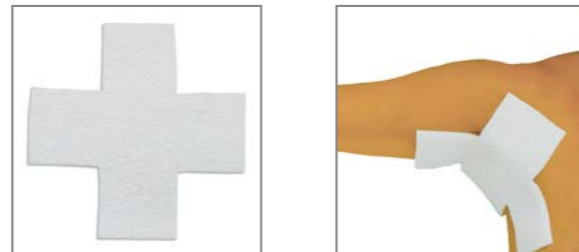

Ohr



Anwendung bei Schläuchen



Mepilex® Border Lite Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele

Finger 5 x 12,5 cm



Zeh 5 x 12,5 cm



Ferse 10 x 10 cm



Ellbogen 10 x 10 cm



Ohr 4 x 5 cm



Mepilex® XT		 ulcus cruris	 ulcus cruris	 Verbrennungen bis Grad 2a		Mepilex® XT Mepilex®	   	S. 6 S. 8
Mepilex® Lite		 Diabetisches Fussyndrom	 Verbrüchung	 Strahlenfolge		Mepilex® Lite	   	S. 9
Mepilex® Transfer		 ulcus cruris	 Tumorwunde	 Strahlenfolge		Mepilex® Transfer	   	S. 28
Mepilex® Border Flex		 venöses ulcus	 ulcus cruris	 Mepilex Border Heel		Mepilex® Border Flex	   	S. 10
Mepilex® Border Lite		 Schürfwunde	 Diabetisches Fussyndrom	 epithelisierende Wunde		Mepilex® Border Lite	   	S. 13
Mepilex® Ag		 ulcus cruris	 Verbrennungen bis Grad 2a	 Diabetisches Fussyndrom		Mepilex® Ag	   	S. 18
Mepilex® Border Ag		 Dekubitus an Ferse	 infiziertes ulcus	 ulcus cruris venosum		Mepilex® Border Ag	   	S. 22
Mepitel®		 Mepitel bei Epidermolysis Bullosa	 Fixierung von Hauttransplantaten	 Mepitel auf Hautentnahmestelle		Mepitel®	   	S. 24
Mepitel® One		 Mepitel One auf chirurgischer Wunde	 Schürfwunde	 Hautriss		Mepitel® One	   	S. 24
Mepitel® Film		 Mepitel Film auf chirurgischer Wunde	 Pergament-Haut	 Mepitel Film als -Lande-Zone zum Schutz der gesunden Haut		Mepitel® Film	   	S. 26

PROVING IT

EVERY DAY

Mölnlycke liefert innovative Lösungen für das Wundmanagement, zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im OP und zur Vorbeugung von Druckgeschwüren. Diese Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Alles, was wir tun, dient einem einzigen Zweck: Medizinische Fachkräfte in die Lage zu versetzen, ihr Bestes zu geben. Und wir sind bestrebt, dies täglich unter Beweis zu stellen.

Kundenservice:

Tel.: 0800 / 563 195

Fax: 0800 / 563 197

Email: csc.ch@molnlycke.com

Referenzauszug über die Wirksamkeit der Safetac® Technologie.

1. Price PE et al. Dressing-related pain in patients with chronic wounds: an international patient perspective. IWJ 2008, 2. Principles of best practice: Minimising pain at wound dressing related procedures. A consensus document. London, 2004 3. Minimising pain at dressing-related procedures: "Implementation of pain relieving strategies". A consensus document Toronto, 2007. 4. Dykes PJ et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. JWC 2001 5. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005 6. Wiberg A B et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the World Union of Wound Healing Societies, Toronto, Canada, 2008. 7. Meaume S, et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Dressing in stage II pressure ulcers. OWM, 2003 8. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. JWC 2007 9. Zillmer R et al. Biophysical effects of repetitive removal of adhesive dressings on periwound skin. JWC 2006 10. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008 11. K. Zarghooni et al., Effect of a Modern Dressing Compared to Standard Dressings on Outcome after Primary Hip and Knee Arthroplasty, Cologne, May 2015.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.ch

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Tel.: +41 44 744 54 00, Fax: +41 44 744 54 11
Die Namen Mölnlycke Health Care und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
©2018 Mölnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten. DWC0025

